

# Compat<sup>®</sup> Buddy

## Umfassendes Sortiment an Verlängerungssets für flache Gastrostomie-Ernährungs sonden

Die Compat<sup>®</sup> Buddy Verlängerungssets für flache Gastrostomie-Ernährungs sonden sind für die enterale Verabreichung von Nahrung, Flüssigkeiten und/oder Arzneimitteln bestimmt. Sie sind für Patienten geeignet, die eine Nahrungsergänzung benötigen und eine flache Gastrostomie-Ernährungs sonde (Button) besitzen. Kann auch zur gastralen Dekompression verwendet werden.

### Funktionen auf einen Blick

#### Mehrere Größen und Funktionen:

- Winkelsteckverbinder für kontinuierliche Ernährung und gerader Steckverbinder für Bolusernährung.
- 5, 30 und 60 cm für unterschiedliche Patientenbedürfnisse und klinische Anforderungen.
- Dualport für eine einfache Verabreichung von Arzneimitteln (optional).
- Schraubverschluss und Schließklemme (optional) verhindern ein Auslaufen von Flüssigkeit und ermöglichen eine einfache Handhabung.


#### Kompatibilität:

- Die Compat<sup>®</sup> Buddy Verlängerungssets sind mit Compat<sup>®</sup> Buddy Button und den meisten anderen Buttons, einschließlich Mic-Key<sup>®</sup>, Aquarius<sup>™</sup>, MiniONE<sup>®</sup> und Freka<sup>®</sup> Belly kompatibel.
- Sie sind ausschließlich mit Überleitsets und Spritzen mit ENFit<sup>®</sup> Konnektor kompatibel, um eine bessere Patientensicherheit zu gewährleisten.

**Patientensicherheit:** Die ENFit<sup>®</sup> Konnektoren werden gemäß ISO 80369-3 hergestellt. Sie sind mit intravenösen Infusionssets nicht kompatibel, um die Patientensicherheit zu erhöhen, und dabei zu helfen, versehentliche Fehlan schlüsse zu vermeiden.

**Sichere Materialien:** DEHP-, BPA- und latex-frei\*.


### Bestellinformationen

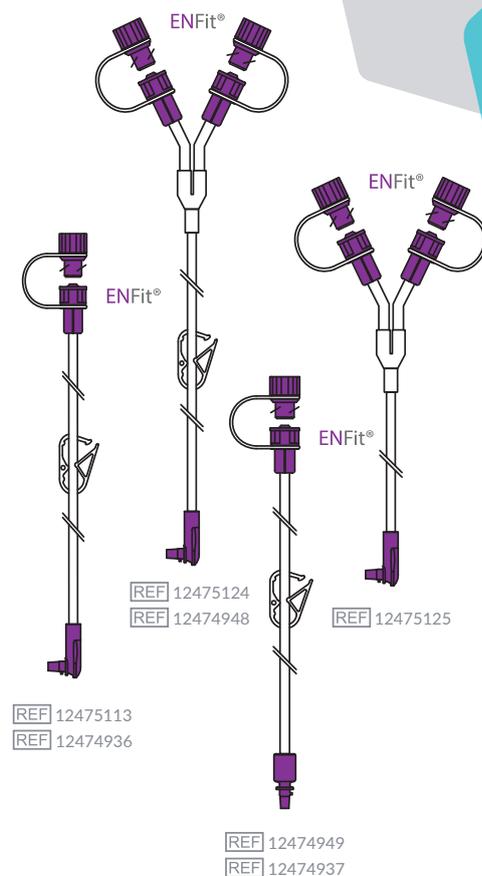

	Konnektor	ENFit <sup>®</sup> Port	Länge (cm)	Artikelnummer	Menge/Karton
Compat <sup>®</sup> Buddy Verlängerungsset für flache Gastrostomie-Ernährungs sonden	Winkelsteckverbinder	Dual	5	12475125	10
	Winkelsteckverbinder	Dual	30	12475124	
	Winkelsteckverbinder	Dual	60	12474948	
	Winkelsteckverbinder	Einfach	30	12475113	
	Winkelsteckverbinder	Einfach	60	12474936	
	Gerader Steckverbinder	Einfach	30	12474949	
	Gerader Steckverbinder	Einfach	60	12474937	

Patientenversorgung. Unsere Priorität.

# Umfassendes Sortiment an Verlängerungssets für flache Gastrostomie-Ernährungs sonden

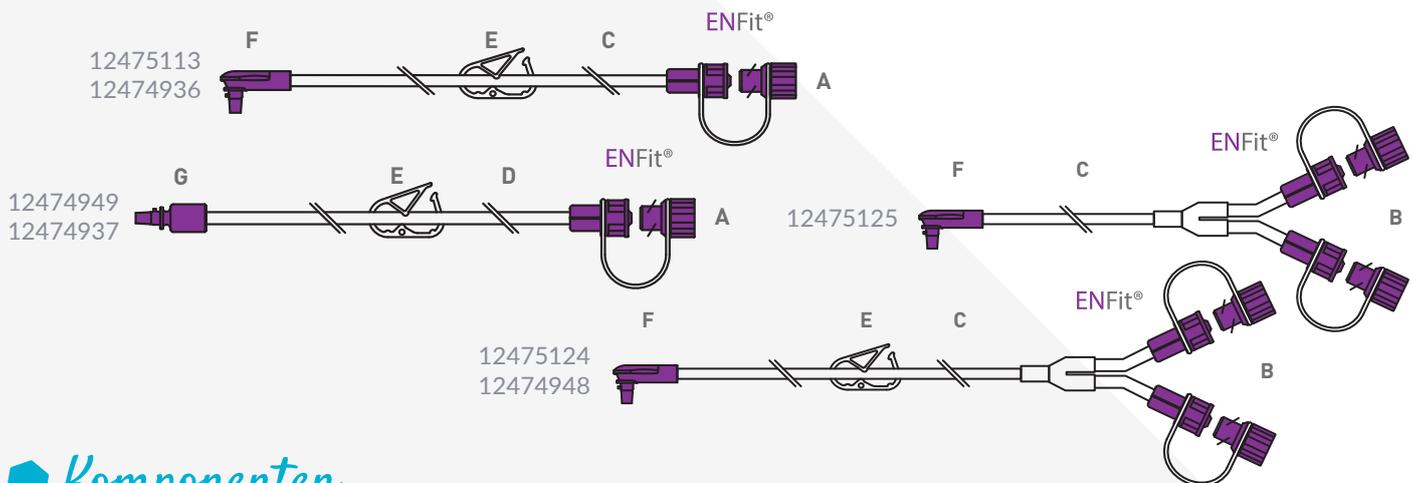

## Komponenten

- A** ENFit® drehverriegelbarer Ernährungsport mit Verschlusskappe und Haltegurt
- B** Dual ENFit® drehverriegelbarer Ernährungsport mit Verschlusskappe und Haltegurt
- C** PVC-Schlauch mit Standardöffnung, Außendurchmesser 4,15 mm
- D** PVC-Schlauch mit großer Öffnung, Außendurchmesser 5,4 mm
- E** Schließklemme
- F** Winkelsteckverbinder mit Ausrichtungsmarkierung (patientenseitiger Sondenanschluss)
- G** Gerader Steckverbinder mit Ausrichtungsmarkierung (patientenseitiger Sondenanschluss)

## Technische Daten

- Steril:** Mit Ethylenoxid (EO) sterilisiert.
- Verpackung:** Einzel verpackt in einem Karton von: 10 Stück pro Packung (19 x 19 x 10 cm)  
24 Packungen in einem Versandkarton (60 x 40 x 42 cm)
- Lagerung:** An einem trockenen Ort, bei Raumtemperatur und vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt lagern.
- Haltbarkeit:** 3 Jahre ab Herstellungsdatum. Verfallsdatum auf der Verpackung.
- Dauer der Anwendung:** Bis zu 7 Tagen und 5 Nutzungen pro Tag.
- Sondenlänge:** 5, 30 oder 60 cm.
- Außendurchmesser der Sonde:** 4,15 mm (REF. mit Winkelsteckverbinder) oder 5,4 mm (REF. mit geradem Steckverbinder).
- ISO-Norm:** ENFit® Konnektor nach ISO 80369-3.
- CE-Kennzeichnung:** Entspricht den Anforderungen der Europäischen Richtlinie 93/42/EWG über Medizinprodukte. Eine CE-Zertifizierung wurde von einer akkreditierten benannten Stelle ausgestellt: TÜV SÜD (CE 0123).
- Klassifizierung:** Klasse IIa.
- Rechtmäßiger Hersteller:** Cedic Srl, Via Liberazione 63/9, IT-20068 Peschiera Borromeo (MI).
- Nachhaltigkeit:** Das Umweltmanagementsystem entspricht ISO 14001:2015.
- Materialien:** Schlauchsystem: PVC. ENFit® und Button-Konnektoren: Copolyester. Alle Materialien sind DEHP-, BPA- und latex-frei\*. Weitere Einzelheiten auf Anfrage.
- Herkunftsland:** Hergestellt in Italien.

\*DEHP und BPA werden während des Herstellungsprozesses nicht absichtlich zugesetzt. Enthält kein Naturkautschuklatex.  
Die Marken ENFit® und Compat® werden mit Zustimmung genutzt. Mic-Key® ist eine eingetragene Marke der Firma Halyard Health, Inc. oder deren Tochtergesellschaften.  
Freka® ist eine eingetragene Marke der Fresenius Kabi AG. MiniONE® ist eine eingetragene Marke von Applied Medical Technology, Aquarius™ ist eine eingetragene Marke von Degania Medical, Inc.

Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Compat® Vertriebsvertreter oder auf der Webseite unter [www.compat.com](http://www.compat.com).

AXI00469 REV.0 17. JUNI 2021

# Compat®