

Compat[®] Buddy

Stoma-Messinstrument

Das Compat[®] Buddy Stoma-Messinstrument dient zur Bestimmung der Tiefe eines optimal platzierten Gastrostomie-Stomatrakts, um die richtige Auswahl der Länge des Compat[®] Buddy Gastrostomie-Buttons zu gewährleisten.


● Funktionen auf einen Blick

Das Compat[®] Buddy Stoma-Messinstrument umfasst einen röhrenförmigen Schaft mit unterteilter Skala, eine verschiebbare Platte und einen Rückhalteballon zur Messung der Stomalänge.

Patientenkomfort: Das Compat[®] Buddy Stoma-Messinstrument ermöglicht die Auswahl der passenden Länge des Compat[®] Buddy Gastrostomie-Buttons, **um gastrischen Flüssigkeitsverlust und Hautreizungen zu vermeiden.**

Sichere Materialien: Das Compat[®] Buddy Stoma-Messinstrument ist steril, DEHP-, BPA- und Latex-frei*.

An die meisten Bedürfnisse angepasst: Das Compat[®] Buddy Stoma-Messinstrument gehört zu einem umfassenden Sortiment an Gastrostomie-Buttons und Zubehör, **die den meisten klinischen Anforderungen für enterale Langzeiternährung entsprechen.**

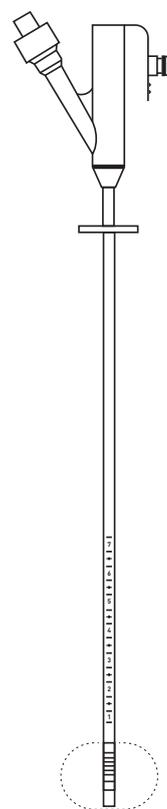

● Bestellinformationen

Produktbezeichnung	Artikelnummer	Menge/Karton
Compat [®] Buddy Stoma-Messinstrument	12461149	2

Patientenversorgung. Unsere Priorität.

Stoma-Messinstrument



Komponenten

- A Inflationsventil mit Luer-Konnektor
- B Trichterkonnektor mit Verschlusskappe
- C Verschiebbare Platte
- D 12 FR Sondenschaft mit in Zentimeter unterteilter Skala und Markierungen alle 0,25 cm
- E 5 ml Rückhalteballon aus Silikon

Technische Daten

- Steril:** Mit Ethylenoxid (EO) sterilisiert.
- Verpackung:** Einzeln verpackt in einem Karton von je 2 Stück.
- Lagerung:** In der Originalverpackung, bei Raumtemperatur und in einer trockenen Umgebung lagern. Vor direkter Sonneneinstrahlung und Wärmestrahlung schützen.
- Haltbarkeit:** 3 Jahre ab Herstellungsdatum. Verfallsdatum auf der Verpackung.
- Dauer der Anwendung:** Für den Einmalgebrauch.
- Größe:** 12 FR 5 ml.
- CE-Kennzeichnung:** Entspricht den Anforderungen der Europäischen Richtlinie 93/42/EWG über Medizinprodukte. Eine CE-Zertifizierung wurde von einer akkreditierten benannten Stelle ausgestellt: TÜV SÜD (CE 0123).
- Klassifizierung:** Klasse I (steril).
- Rechtmäßiger Hersteller:** Degania Silicone Ltd.
- Materialien:** Silikon. Alle Materialien sind DEHP-, BPA- und Latex-frei*. Weitere Einzelheiten auf Anfrage.

*DEHP und BPA werden während des Herstellungsprozesses nicht absichtlich zugesetzt. Enthält kein Naturkautschuklatex. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Compat® Vertriebsvertreter oder auf der Webseite unter www.compat.com
*Sofern nicht anders angegeben, werden alle Markenzeichen mit Zustimmung verwendet.

AXI00333 REV.0 17. JUNI 2021