

# Compat<sup>®</sup> DualPort

## Sonda Nasogastrica a Lume Singolo con Doppio Connettore per Nutrizione e Drenaggio

Compat<sup>®</sup> DualPort è una sonda nasogastrica a lume singolo con doppio connettore per: 1) la somministrazione enterale di sostanze nutritive, fluidi e medicinali attraverso la porta ENFit<sup>®</sup> specifica per la nutrizione enterale e 2) drenaggio gastrico/aspirazione intermittente del contenuto dello stomaco attraverso la porta di drenaggio con attacco a imbuto.

### Panoramica delle caratteristiche

**Progettata per la Terapia Intensiva:** Compat<sup>®</sup> DualPort è dotata di un connettore a imbuto e di un connettore ENFit<sup>®</sup> per **semplificare il drenaggio gastrico e la somministrazione enterale di sostanze nutritive, fluidi e medicinali** grazie all'uso di un'unica sonda per entrambe le operazioni.

- Permette di effettuare sia la nutrizione che il drenaggio/l'aspirazione gastrici con un'unica sonda.
- Elimina la necessità di posizionare una seconda sonda per passare dalla modalità di drenaggio/aspirazione alla modalità di nutrizione enterale.
- Progettata per resistere alla piegatura durante il controllo dei residui gastrici.


Le clamp aiutano a impedire perdite di liquidi e **facilitano l'aspirazione dei fluidi gastrici**.

**Comfort del Paziente:** Compat<sup>®</sup> DualPort è realizzata in poliuretano radio-opaco morbido con estremità distale arrotondata per **migliorare il comfort del paziente**.

**Ausili per il Posizionamento:** Include un mandrino pre-lubrificato a circuito aperto utile a **facilitare il posizionamento**, il quale:

- Consente l'iniezione di acqua e fluidi radio-opachi senza doverlo rimuovere.
- Al momento della rimozione, riduce il rischio di spostamento della sonda.

Compat<sup>®</sup> DualPort è compatibile con tutti i set di somministrazione e siringhe ENFit<sup>®</sup>, nonché con la maggior parte dei dispositivi di drenaggio/aspirazione\*.

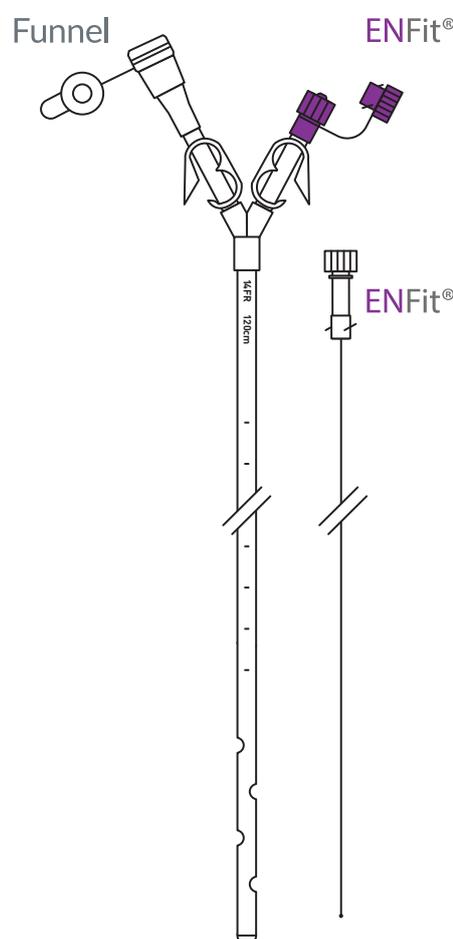


### Informazioni per gli Ordini

Nome prodotto	Codice prodotto	N. pezzi/conf.
Compat <sup>®</sup> DualPort 14 FR 120 CM S	12391311	20

*La Cura del Paziente. La Nostra Priorità.*

# Sonda Nasogastrica a Lume Singolo con Doppio Connettore per Nutrizione e Drenaggio

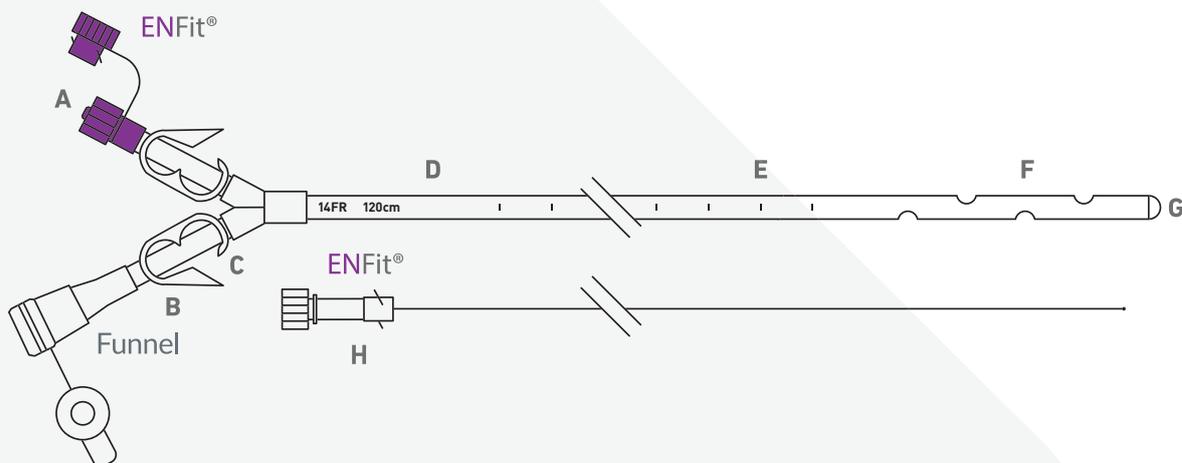

## Componenti

- A** Connettore ENFit® per nutrizione con chiusura a rotazione provvisto di tappo
- B** Connettore a imbuto con tappo progettato per essere compatibile con la maggior parte dei dispositivi di drenaggio/aspirazione\*\*
- C** Clamp di chiusura
- D** Identificazione del prodotto, calibro (FR) e lunghezza stampati sul tubo
- E** Tubo della sonda in poliuretano radio-opaco con contrassegni di profondità di posizionamento ogni 5 cm
- F** 4 aperture laterali alternate
- G** Estremità distale arrotondata
- H** Mandrino prelubrificato e a circuito aperto

## Specifiche

- Sterile:** Sterilizzata con ossido di etilene (EO).
- Confezionamento:** Confezionata singolarmente in scatole da 20 pezzi (29,5 × 25 × 17 cm).
- Conservazione:** Conservare nella confezione originale a temperatura ambiente e in un locale asciutto. Tenere al riparo dalla luce solare e da radiazioni termiche.
- Durata:** 3 anni dalla data di produzione. Data di scadenza indicata sulla confezione.
- Durata di impiego:** Fino a 29 giorni. Monouso.
- Lunghezza:** 120 cm.
- Diametro:** 14 FR.
- Standard ISO:** Connettore ENFit® realizzato in conformità allo standard ISO 80369-3.
- Marchio CE:** Conforme alla direttiva europea 93/42/CEE concernente i dispositivi medici. Certificazione CE rilasciata da un organismo notificato accreditato: TÜV SÜD (CE0123).
- Classificazione:** Classe IIa.
- Fabbricante legale:** Cedic Srl, Via Liberazione 63/9, IT-20068 Peschiera Borromeo (MI).
- Sostenibilità:** Sistema di gestione ambientale conforme a ISO 14001:2015.
- Materiali:** Tubi in poliuretano. Connettore ENFit® in copoliestere. Connettore a imbuto in poliuretano. Tutti i materiali utilizzati sono privi di DEHP, BPA e lattice\*. Ulteriori dettagli disponibili su richiesta.
- Paese di origine:** Prodotto in Italia.

\*\*Non vengono intenzionalmente aggiunti DEHP e BPA durante il processo di fabbricazione. Non formulato con lattice di gomma naturale.

Per richiedere maggiori informazioni, contattare il rappresentante Compat® di fiducia o visitare il sito [www.compat.com](http://www.compat.com)

\* Se non diversamente specificato, tutti i marchi commerciali sono stati utilizzati previa autorizzazione.

AXI00018 REV.1 09 NOVEMBRE 2023

# Compat®