

Compat® DualPort

Sond med en Lumen och Dubbel Port för Nasogastrisk Näringstillförsel och Dränering

Compat® DualPort är en nasogastrisk sond med en lumen och dubbel port avsedd för: 1) administrering av enteral näring, vätskor och läkemedel via ENFit® specifik enteral matningsport och 2) magdränage/intermittent aspiration av maginnehåll via dräneringsporten med konfattning.

Egenskaper i Korthet

Utformad för IVA: Compat® DualPort är utrustad med en koppling med konfattning samt en ENFit®-koppling för att **förenkla magsäcksdränage och administrering av näring, vätskor och läkemedel**, genom att använda en sond för båda syftena.

- Tillåter både gastrisk matning och dränering/aspirering via en och samma sond.
- Förhindrar behovet av en andra sond när patienten övergår från dränering/aspirering till enteral näringstillförsel.
- Utformad för att motstå kollaps när gastriska retentioner kontrolleras.


Klämmor som förhindrar vätskeläckage och **underlättar gastrisk vätskeaspiration**.

Patientkomfort: Compat® DualPort är tillverkad av mjuk röntgentät polyuretan med rundad distal ände för att **främja patientkomforten**.

Hjälp vid Placering: En försmord och öppen genomflödesledare ingår **som stöd vid placering**:

- Gör det möjligt att injicera vatten och röntgentäta vätskor utan att ledaren avlägsnas.
- Kan minska risken för att sonden rubbas när ledaren avlägsnas.

Compat® DualPort är kompatibel med alla ENFit®-aggregat och sprutor samt de flesta dräneringsenheter*.

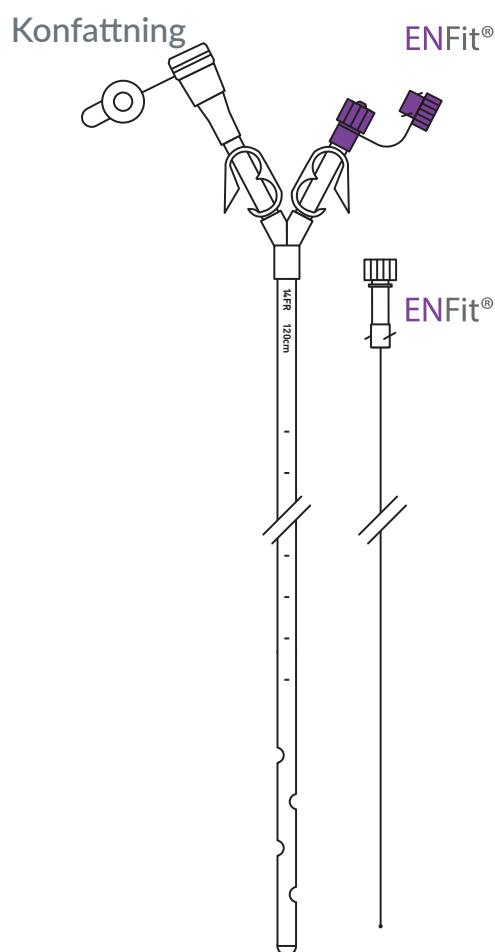


Beställningsinformation

Produktnamn	Produktkod	Kvantitet/ Förpackning
Compat® DualPort 14FR 120 CM S	12391311	20

Patientvård. Vår Prioritet.

Sond med en Lumen och Dubbel Port för Nasogastrisk Näringstillförsel och Dränering

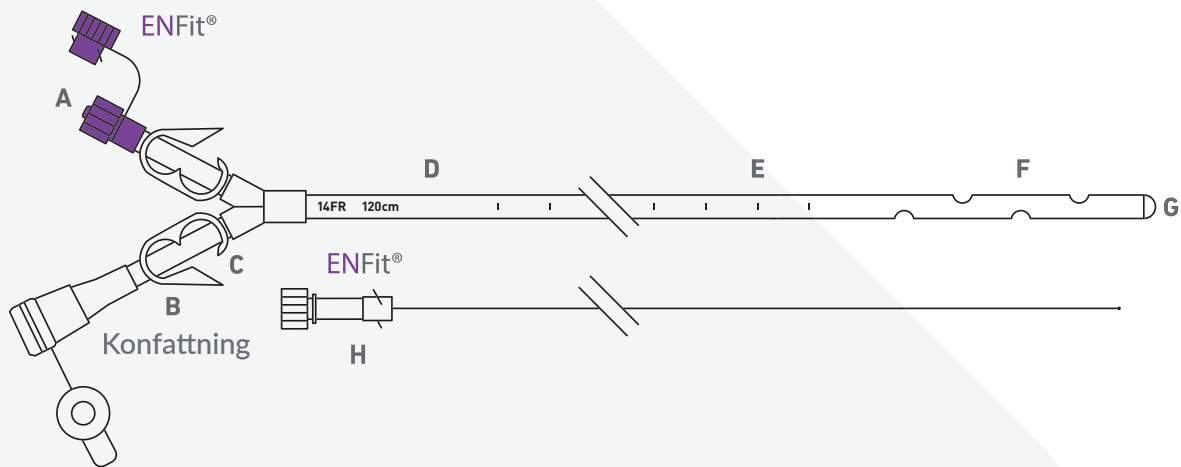

Komponenter

- A ENFit® näringskoppling med vridlås och lock
- B Koppling med konfattning och lock kompatibel med de flesta dräneringsenheter*
- C Låsklämmor
- D Produktidentifiering, tryckt storlek (FR) och längd på skaftet
- E Röntgentäta sondskaft i polyuretan med markörer för placeringsdjup var femte centimeter
- F Fyra laterala alternativa öppningar
- G Rundad distal ände
- H Försmord och öppen genomflödesledning

Specifikationer

- Steril:** Steriliserad med etylenoxid (ETO).
- Förpackning:** Individuellt förpackad i kartong med 20 stycken (29,5 × 25 × 17 cm).
- Förvaring:** Förvara i originalförpackning i en torr miljö mellan +5 och +40 °C. Skyddas från direkt solljus och värmestrålning.
- Hållbarhetstid:** 3 år från tillverkningsdatum. Utgångsdatum finns på förpackningen.
- Användningstid:** Upp till 29 dagar. För engångsbruk.
- Längd:** 120 cm.
- Diameter:** 14FR.
- ISO-standard:** ENFit®-kopplingar är tillverkade i enlighet med ISO 80369-3.
- CE-märkning:** Överensstämmer med direktiv 93/42/EEG om medicintekniska produkter. CE-certifiering har utfärdats av ett ackrediterat anmält organ: TÜV SÜD (CE0123).
- Klassificering:** Klass IIa.
- Juridisk tillverkare:** Cedec Srl, Via Liberazione 63/9, IT-20068 Peschiera Borromeo (MI).
- Hållbarhet:** Miljöledningssystemet uppfyller ISO 14001:2015.
- Material:** Sond: Polyuretan. ENFit®-koppling: Kopolyester. Koppling med konfattning: Polyuretan. Fri från DEHP, BPA och latex**. Ytterligare information ges på begäran.
- Ursprungsland:** Tillverkad i Italien.

*Vis inkompatibilitet kan förekomma.
**Inget DEHP och BPA tillsätts avsiktligt under tillverkningsprocessen. Naturgummitatex tillsätts inte.

För ytterligare information kontakta din Compat®-representant eller besök www.compat.com
*Alla varumärken används med tillstånd, om inte annat anges.

AXI00018 REV.1 09 NOVEMBER 2023

Compat®