

Compat ella®

Compat Ella® Combiset 1,5 l

Das Compat Ella® Combiset 1,5 l ist für die enterale Verabreichung von Nahrung, Flüssigkeiten oder Medikamenten bestimmt und ist für die Verwendung mit der Compat Ella® Ernährungspumpe geeignet.

◆ Funktionen auf einen Blick

Das Compat Ella® Combiset 1,5 l umfasst einen integrierten 1,5 l Flexibaggle® Behälter, einen ENFit® 3-Wege-Medikamentenport und ein ENFit® distales Ende (patientenseitiger Sondenanschluss).

Zuverlässige Ernährung: Das Compat Ella® Combiset 1,5 l ist mit der patentierten zuverlässigen Auto-Anti-Free-Flow(AAFF)-Technologie ausgestattet. AAFF ist in die Kassette integriert und wird immer automatisch aktiviert, um die **Patientensicherheit zu gewährleisten**.


Sichere Konnektoren: Das Compat Ella® Combiset 1,5 l umfasst ENFit® Konnektoren, die nach ISO 80369-3 hergestellt werden. Der ENFit® Konnektor ist mit intravenösen Infusionssets nicht kompatibel, um die **Patientensicherheit zu erhöhen**, und dabei helfen, versehentliche Fehlanlüsse zu vermeiden.

Praktisch: Der integrierte 1,5-l-Behälter bietet ein praktisches offenes System mit einer eingebauten Aufhängung und einem Schraubverschluss. Die breite obere Füllöffnung ermöglicht das Befüllen des Beutels mit Nahrung oder Wasser, **ohne das Ernährungsprogramm zu unterbrechen oder den Behälter aus der Aufhängung zu entnehmen**.

Sichere Materialien: Der 1,5-l-Behälter besteht aus Ethylen-Vinylacetat (EVA), einem weichen und lebensmittelfreundlichen Material. Das Compat Ella® Combiset 1,5 l ist steril, DEHP-, BPA- and Latex-frei*.

Kompatibilität:

- Enterale Ernährungssonden: ENFit®
- Spritzen: ENFit®

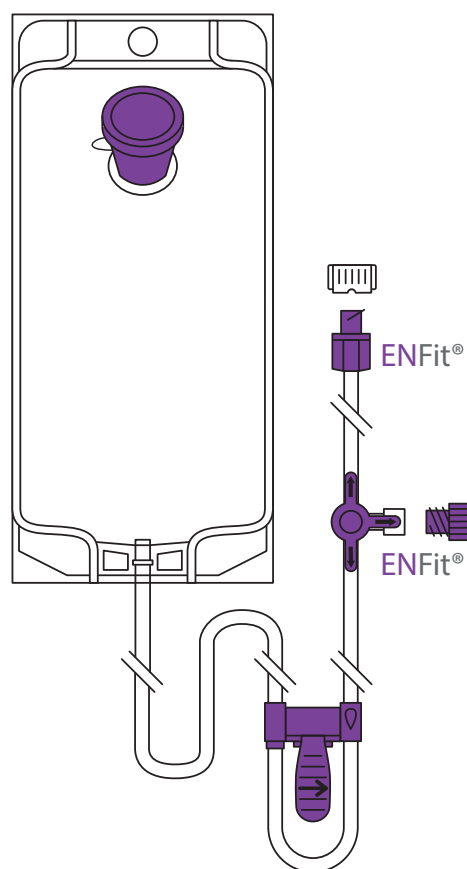


◆ Bestellinformationen

| Produktbezeichnung | Artikelnummer | Menge/Karton |
|-----------------------------|---------------|--------------|
| Compat Ella® Combiset 1,5 l | 12298202 | 30 |

Kennen Sie schon Compat Ella®?

Compat Ella® Combiset 1,5 l

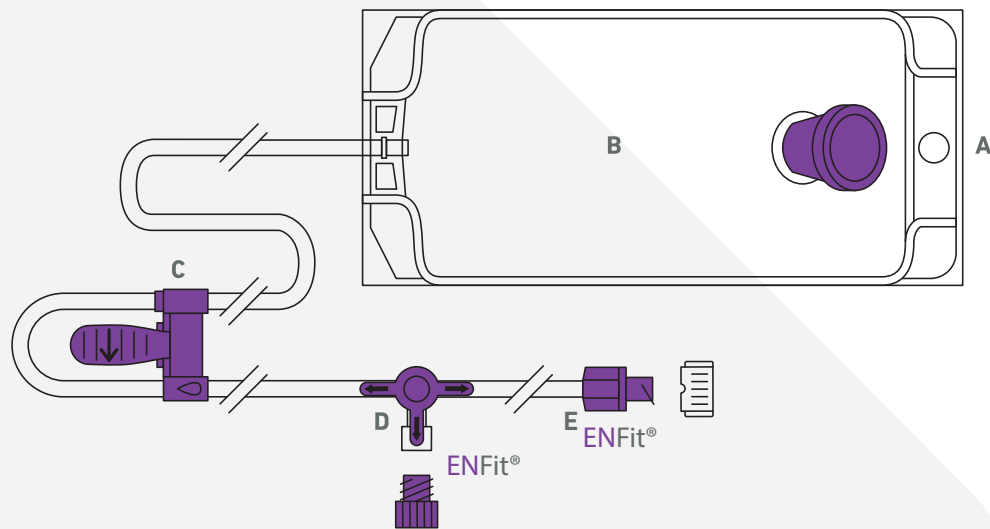

Komponenten

- A Breite obere Füllöffnung mit Aufhängung und Schraubverschluss
- B Flexibaggle® 1,5-l-Behälter aus EVA mit Graduierungen (bei 50 und 100 ml) und Markierungen für Patientenname und weitere wichtige Informationen (Formel, Flussrate und Datum)
- C Compat Ella® Pumpenkassette mit integrierter und patentierter Auto-Anti-Free-Flow(AAFF)-Sicherheitsfunktion
- D Mit ENFit® kompatibler 3-Wege-Medikamentenport mit Verschlusskappe
- E ENFit® distales Ende mit Verschlusskappe (patientenseitiger Sondenanschluss)

Technische Daten

- Steril:** Mit Ethylenoxid (EO) sterilisiert.
- Verpackung:** Einzeln verpackt in Kartons zu je 30 Stück (58,5 x 38,5 x 16 cm).
- Lagerung:** Bei Raumtemperatur lagern. Vor direkter Sonneneinstrahlung und Luftfeuchtigkeit schützen.
- Haltbarkeit:** 3 Jahre ab Herstellungsdatum. Verfallsdatum auf der Verpackung.
- Dauer der Anwendung:** 24 Stunden. Zum Einmalgebrauch.
- Länge:** Abstand zwischen Beutel und patientenseitigem Sondenanschluss: 230 cm. Abstand zwischen Flexibaggle® und Pumpe: 50 cm.
- Durchmesser:** Nenn-Innendurchmesser: 3,0 mm. Nenn-Außendurchmesser: 4,15 mm.
- ISO-Norm:** ENFit® Konnektor nach ISO 80369-3.
- CE-Kennzeichnung:** Entspricht den Anforderungen der Europäischen Richtlinie 93/42/EWG über Medizinprodukte. Eine CE-Zertifizierung wurde von einer akkreditierten benannten Stelle ausgestellt: TÜV SÜD (CE 0123).
- Klassifizierung:** Klasse IIa.
- Rechtmäßiger Hersteller:** Cedic Srl, Via Liberazione 63/9, IT-20068 Peschiera Borromeo (MI).
- Nachhaltigkeit:** Das Umweltmanagementsystem entspricht ISO 14001.
- Materialien:** Schlauchsystem: PVC und Silikon. Alle Materialien sind DEHP-, BPA- und Latex-frei*. Weitere Einzelheiten auf Anfrage.
- Herkunftsland:** Hergestellt in Ägypten.

*DEHP und BPA werden während des Herstellungsprozesses nicht absichtlich zugesetzt. Enthält kein Naturkautschuklatex. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Compat® Vertriebsvertreter oder auf der Webseite unter www.compat.com

*Sofern nicht anders angegeben, werden alle Markenzeichen mit Zustimmung verwendet.

AXI00402 REV.1 08. April 2026