

# Compat ella®

## Compat Ella® Combiset 1,5 L

La tubulure Compat Ella® Combiset 1,5 L est indiquée pour l'administration de solutions nutritives, de liquides et/ou de médicaments par la voie entérale avec la pompe de nutrition Compat Ella®.

### Aperçu des Caractéristiques

La tubulure Compat Ella® Combiset 1,5 L comporte un réservoir Flexibaggle® 1,5 L intégré, un port de médication à 3 voies ENFit® et une extrémité distale ENFit® (raccord pour la sonde du patient).

**Une Administration Fiable :** La tubulure Compat Ella® Combiset 1,5 L dispose d'une sécurité brevetée anti-débit libre automatique. Ce système est intégré à la cassette et est toujours actif pour la sécurité du patient.


**Des Connecteurs plus Sûrs :** La tubulure Compat Ella® Combiset 1,5 L dispose de connecteurs ENFit® conformes à la norme ISO 80369-3. Les connecteurs ENFit® sont conçus pour être incompatibles IV pour promouvoir la sécurité du patient en contribuant à éviter les connexions involontaires.

**Facilité d'Utilisation :** Le réservoir intégré de 1,5 L offre un système pratique avec une suspension intégrée et un bouchon à vis. La large ouverture supérieure permet de remplir le récipient avec une solution de nutrition ou avec de l'eau sans avoir à arrêter l'administration ou à retirer le réservoir de la suspension.

**Des Matériaux Sûrs :** Le réservoir de 1,5 L est composé d'éthylène vinyle acétate (EVA), un matériau souple compatible avec les aliments. Le Compat Ella® Combiset 1,5 L est stérile et exempt de DEHP, de BPA et de latex\*.

#### Compatibilité :

- Sondes de nutrition entérale : ENFit®
- Seringues : ENFit®

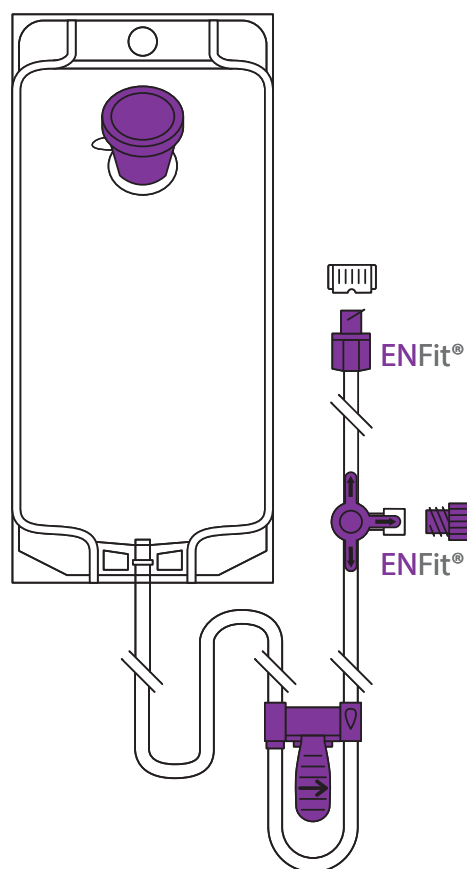


### Informations de Commande

Description	Numéro d'article	Unité de vente/carton
Compat Ella® Combiset 1,5 L	12298202	30

Connaissez-vous Compat Ella® ?

# Compat Ella® Combiset 1,5 L

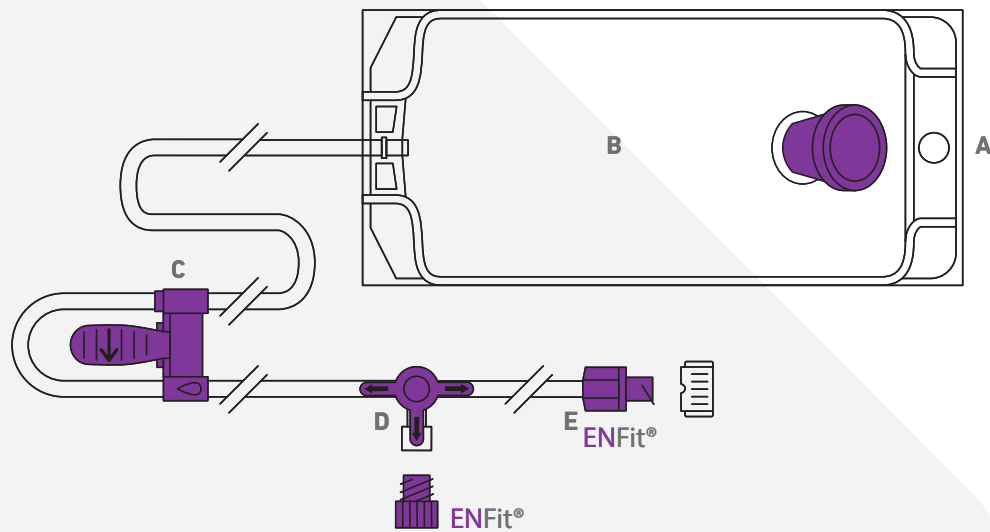

## Composants

- A** Large ouverture avec fermeture à vis et suspension intégrée
- B** Flexibag® 1,5 litre en EVA avec graduations (à 50 mL et chaque 100 mL) et champs d'inscription pour le nom du patient et autres informations importantes (formule, volume, date et débit)
- C** Cassette pour pompe Compat Ella® avec système de sécurité breveté anti-débit libre automatique
- D** Port de médication à 3 voies compatible ENFit® avec bouchon
- E** Extrémité distale ENFit® avec bouchon (raccord pour la sonde du patient)

## Spécifications

<b>Stérile :</b>	Stérilisé à l'oxyde d'éthylène (EO).
<b>Emballage :</b>	Emballé individuellement en carton de 30 pièces (58,5 x 38,5 x 16 cm).
<b>Stockage :</b>	Stocker à température ambiante. Tenir à l'abri de la lumière du soleil et de l'humidité.
<b>Durée de conservation :</b>	3 ans à partir de la date de production. Date d'expiration indiquée sur l'emballage.
<b>Durée d'utilisation :</b>	24 heures. À usage unique.
<b>Longueur :</b>	Distance du Flexibag® à l'extrémité de la sonde du patient : 230 cm. Distance du Flexibag® à la pompe : 50 cm.
<b>Diamètres :</b>	Diamètre nominal intérieur : 3,0 mm. Diamètre nominal extérieur : 4,15 mm.
<b>Norme ISO :</b>	Connecteur ENFit® conforme à la norme ISO 80369-3.
<b>Marquage CE :</b>	Conforme à la directive européenne relative aux dispositifs médicaux 93/42/CEE. Une certification CE a été délivrée par un organisme notifié accrédité : TÜV SÜD (CE0123).
<b>Classification :</b>	Classe IIa.
<b>Fabricant légal :</b>	Cedic Srl, Via Liberazione 63/9, 20068 Peschiera Borromeo (MI).
<b>Développement durable :</b>	Système de management environnemental conforme à la norme ISO 14001.
<b>Matériaux :</b>	Tubulure : PVC et silicone. Tous les matériaux sont exempts de DEHP, de BPA et de latex. Informations supplémentaires sur demande.
<b>Pays d'origine :</b>	Fabriqué en Egypte.

\*Le DEHP et le BPA ne sont pas ajoutés intentionnellement au cours du processus de fabrication. Non formulé avec du latex de caoutchouc naturel.

Pour plus d'informations, veuillez contacter votre délégué médical Compat® ou visitez [www.compat.com](http://www.compat.com)

\*Sauf mention contraire, toutes les marques commerciales sont utilisées avec permission.

AXI00402 RÉV.2 08 AVRIL 2026

# Compat®