

Compat ella®

Compat Ella® Combiset 1,5 L

O Compat Ella® Combiset 1,5 L é destinado à administração de nutrição, fluidos e medicamentos enterais e é adequado para uso com a bomba de nutrição Compat Ella®.

Características Principais

O Compat Ella® Combiset 1,5 L possui um recipiente integrado de 1,5 L Flexibaggle®, uma porta de medicação de 3 vias ENFit® e uma extremidade distal ENFit® (conexão da sonda do lado do paciente).

Segurança Garantida: O Compat Ella® Combiset 1,5 L apresenta a tecnologia patenteada Auto-Anti-Free-Flow (AAFF). Esta incorporada ao “sistema” e é sempre ativada automaticamente para **garantir a segurança do paciente**.


Conectores mais Seguros: O Compat Ella® Combiset 1,5 L inclui conectores ENFit® fabricados de acordo com a norma ISO 80369-3. O conector ENFit® é projetado para ser incompatível com IV para **promover a segurança do paciente**, ajudando a evitar conexões indevidas acidentais.

Conveniência: O recipiente integrado de 1,5 L oferece um prático sistema para o abastecimento, com uma perfuração incorporada para encaixe no pedestal e uma tampa de rosca. A grande abertura de enchimento superior permite reabastecer o recipiente com nutrição ou água **sem interromper o programa de nutrição ou remover o recipiente do suporte**.

Materiais Seguros: O recipiente de 1,5 L é feito de Acetato de Vinil Etileno (EVA), um material macio e compatível com alimentos. O Compat Ella® Combiset 1,5 L é **estéril e isento de DEHP, BPA e Látex***.

Compatibilidade:

- Sondas de nutrição enteral: ENFit®
- Seringas: ENFit®

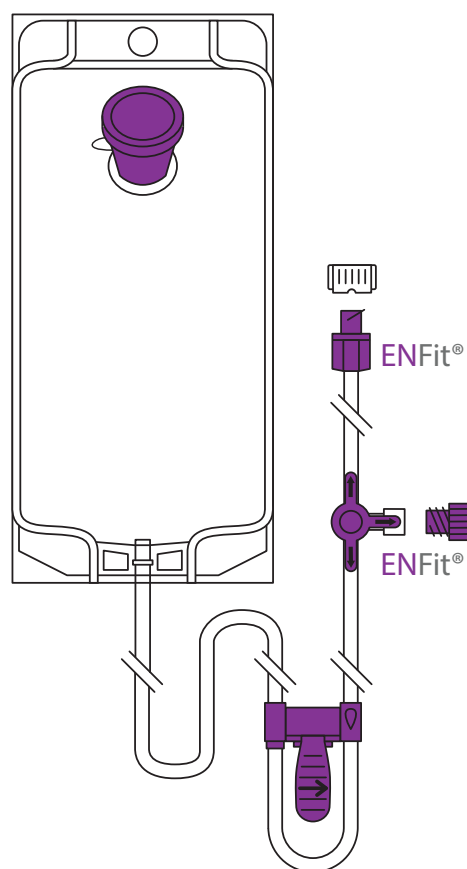


Informações para Pedido

Nome do Produto	Código do Produto	Qtd./Caixa
Compat Ella® Combiset 1,5 L	12298202	30

Já conhece a Compat Ella®?

Compat Ella® Combiset 1,5 L

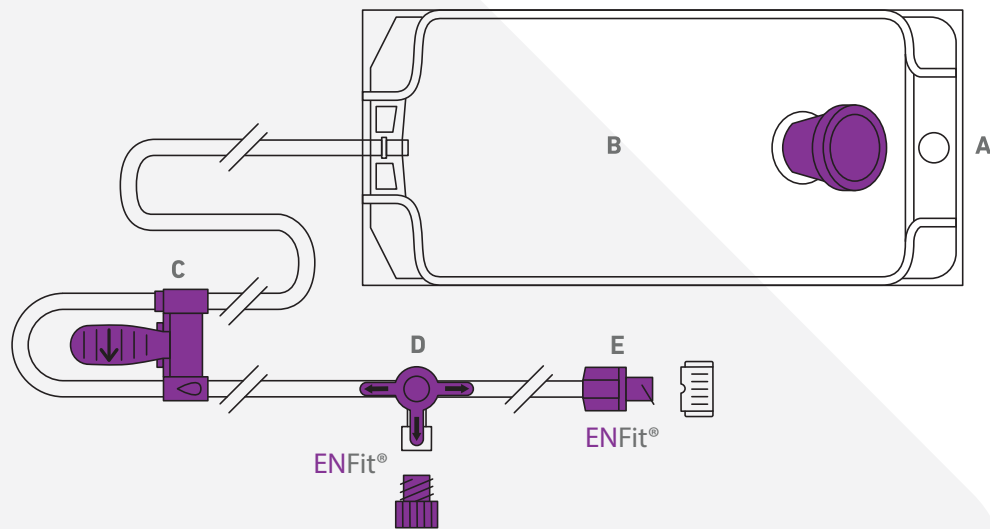

Componentes

- A Grande abertura de enchimento superior com gancho incorporado e tampa de rosca
- B Recipiente Flexibaggle® de 1,5 L feito em EVA com graduação (50 ml e a cada 100 ml) e etiquetas para o nome do paciente e outras informações importantes (fórmula, volume, data e fluxo)
- C Cassete para bomba Compat Ella® com sistema de segurança Auto-Anti-Free-Flow (AAFF) patentado e integrado
- D Porta de medicação de 3 vias compatível ENFit® com tampa
- E Extremidade distal ENFit® com tampa (conexão da sonda do lado do paciente)

Especificações

- Esterilização:** Esterilizado com Óxido de Etileno (EO).
- Embalagem:** Embalado individualmente em caixas de 30 itens (58,5 × 38,5 × 16 cm).
- Armazenamento:** Armazenar em temperatura ambiente. Manter afastado da luz solar e da umidade.
- Prazo de validade:** 3 anos a partir da data de produção. Data de validade indicada na embalagem.
- Duração de utilização:** 24 horas. Para uso único.
- Comprimento:** Distância do recipiente à conexão da sonda do lado do paciente: 230 cm. Distância do Flexibaggle® à bomba: 50 cm.
- Diâmetros:** Diâmetro interno nominal: 3,0 mm. Diâmetro externo nominal: 4,15 mm.
- Norma ISO:** Conector ENFit® fabricado de acordo com a norma ISO 80369-3.
- Marca CE:** Em conformidade com a Diretiva Europeia para Dispositivos Médicos 93/42/EEC. Foi emitida uma certificação CE por um Organismo Notificado credenciado: TÜV SÜD (CE0123).
- Classificação:** Classe IIa.
- Fabricante legal:** Cedic Srl, Via Liberazione 63/9, IT-20068 Peschiera Borromeo (MI), Itália.
- Sustentabilidade:** Sistema de Gestão Ambiental em conformidade com a norma ISO 14001.
- Materiais:** Sonda: PVC e silicone. Todos os materiais são isentos de DEHP, BPA e látex*.
- País de origem:** Fabricado na Egito.

*DEHP e BPA não são adicionados intencionalmente durante o processo de fabricação. Não formulado com látex de borracha natural.

Para obter mais informações, entre em contato com seu representante da Compat® ou acesse www.compat.com

*Salvo indicação em contrário, todas as marcas registradas são utilizadas com permissão.

AXI00402 REV.1 08 DE ABRIL DE 2026

Compat®