

# Compat ella<sup>®</sup>

## Compat Ella<sup>®</sup> Combiset 1,5 L

Compat Ella<sup>®</sup> Combiset 1,5 L är avsett för administrering av enteral näring, vätskor eller läkemedel, och kan användas tillsammans med Compat Ella<sup>®</sup> sondmatningspump.

### Egenskaper i Korthet

Compat Ella<sup>®</sup> Combiset 1,5 L har en integrerad 1,5 liter Flexibaggle<sup>®</sup>-behållare, en ENFit<sup>®</sup> 3-vägs läkemedelsport och en ENFit<sup>®</sup> distal ände (sondkoppling på patientsidan).

**Pålitlig Näringstillförsel:** Compat Ella<sup>®</sup> Combiset 1,5 L är utrustad med den patenterade säkerhetsfunktionen Auto-Anti-Free-Flow (AAFF). AAFF finns inbyggd i kassetten och aktiveras alltid automatiskt för att **säkerställa patientsäkerheten**.


**Säkrare Kopplingar:** Compat Ella<sup>®</sup> Combiset 1,5 L har ENFit<sup>®</sup>-kopplingar tillverkade enligt ISO 80369-3. ENFit<sup>®</sup>-kopplingarna är IV-inkompatibla för att **främjapatient-säkerheten** genom att förhindra oavsiktliga felkopplingar.

**Fördelar:** Den integrerade 1,5 L behållaren erbjuder ett smidigt öppet system med inbyggd hängare och skruvlock. Den stora toppfyllningsöppningen gör det möjligt att fylla på behållaren med näring och vatten utan att matningsprogrammet behöver stoppas, eller att behållaren behöver avlägsnas från hängaren.

**Säkra Material:** 1,5 L behållaren är tillverkad av etylen vinylacetat (EVA), ett mjukt material som är kompatibelt med livsmedel. Compat Ella<sup>®</sup> Combiset 1,5 L är **sterilt** och fritt från DEHP, BPA och latex\*.

#### Kompatibilitet:

- Enterala matningssonder: ENFit<sup>®</sup>
- Sprutor: ENFit<sup>®</sup>

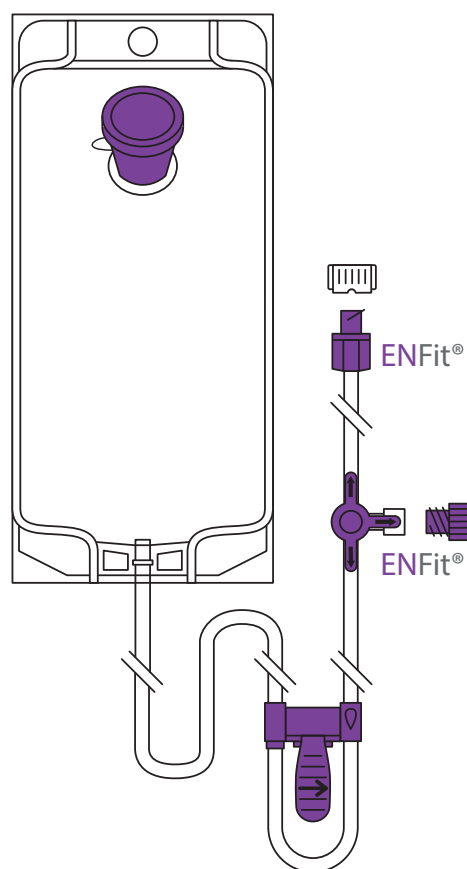


### Beställningsinformation

Produktnamn	Produktkod	Kvantitet/ Förpackning
Compat Ella <sup>®</sup> Combiset 1,5 L	12298202	30

Har du Träffat Compat Ella<sup>®</sup>?

# Compat Ella® Combiset 1,5 L

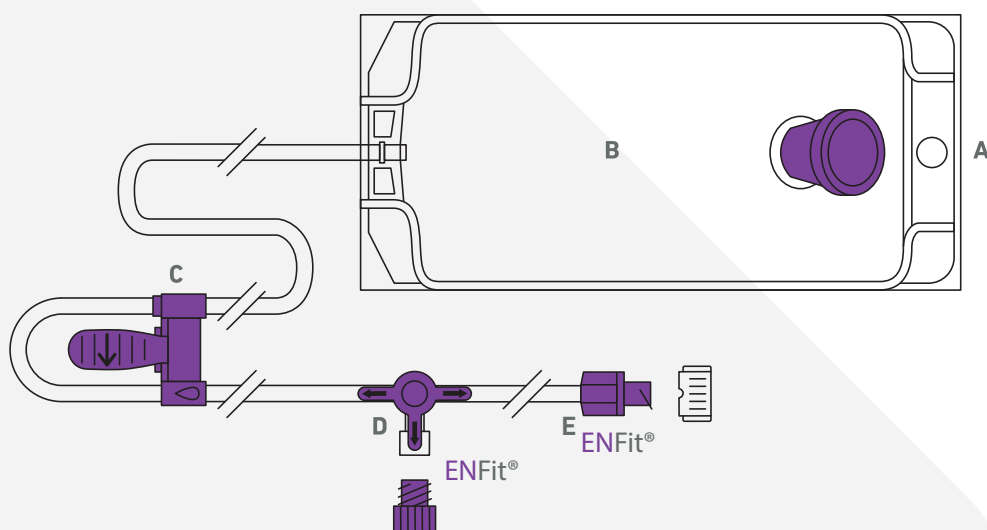

## Komponenter

- A Stor toppfyllningsöppning med inbyggd hängare och skruvlock
- B Flexibaggle® 1,5 L behållare tillverkad i etylenvinylacetat (EVA) med graderingar (vid 50 ml och varje 100 ml) och märkningar för patientnamn och annan viktig information (formula, volym, datum och frekvens)
- C Compat Ella® pumpkassett med den integrerade och patenterade säkerhetsfunktionen Auto-Anti-Free-Flow (AAFF)
- D ENFit®-kompatibel 3-vägs läkemedelsport med lock
- E ENFit® distal ände med lock (patientsidans sondkoppling)

## Specifikationer

<b>Steril:</b>	Steriliserad med etylenoxid (EO).
<b>Förpackning:</b>	Individuellt förpackad i kartong med 30 stycken (58,5 x 38,5 x 16 cm).
<b>Förvaring:</b>	Rumstemperatur. Skyddas mot direkt solljus och fukt.
<b>Hållbarhetstid:</b>	3 år från tillverkningsdatum. Utgångsdatum finns på förpackningen.
<b>Användningstid:</b>	24 timmar. För engångsbruk.
<b>Längd:</b>	Avstånd från behållare till patientens sondkoppling: 230 cm. Avstånd från Flexibaggle® till pump: 50 cm.
<b>Diameter:</b>	Nominell innerdiameter: 3,0 mm. Nominell ytterdiameter: 4,15 mm.
<b>ISO-standard:</b>	ENFit®-kopplingar är tillverkade i enlighet med ISO 80369-3.
<b>CE-märkning:</b>	Överensstämmer med direktiv 93/42/EEG om medicintekniska produkter. CE-certifiering har utfärdats av ett ackrediterat anmält organ: TÜV SÜD (CE0123).
<b>Klassificering:</b>	Klass IIa.
<b>Juridisk tillverkare:</b>	Cedic Srl, Via Liberazione 63/9, IT-20068 Peschiera Borromeo (MI).
<b>Hållbarhet:</b>	Miljöledningssystemet uppfyller ISO 14001.
<b>Material:</b>	Sond: PVC och silikon. Alla material är fria från DEHP, BPA och latex*. Ytterligare information ges på begäran.
<b>Ursprungsland:</b>	Tillverkad i Egypten.

\*Inget DEHP och BPA tillsätts avsiktligt under tillverkningsprocessen. Naturgummilates ingår inte vid tillverkning.

För ytterligare information kontakta din Compat®-representant eller besök [www.compat.com](http://www.compat.com)

\*Alla varumärken används med tillstånd, om inte annat anges.

AXI00402 REV.1 08 APRIL 2026

# Compat®