

Compat ella®

Compat Ella® Combiset 1,5 L

Compat Ella® Combiset 1,5 L är avsett för administrering av enteral näring, vätskor eller läkemedel, och kan användas tillsammans med Compat Ella® sondmatningspump.

Egenskaper i Korthet

Compat Ella® Combiset 1,5 L har en integrerad 1,5 liter Flexibaggle®-behållare, en ENFit® 3-vägs läkemedelsport och en ENFit® distal ände (sondkoppling på patientsidan).

Pålitlig Näringstillförsel: Compat Ella® Combiset 1,5 L är utrustad med den patenterade säkerhetsfunktionen Auto-Anti-Free-Flow (AAFF). AAFF finns inbyggd i kassetten och aktiveras alltid automatiskt för att **säkerställa patientsäkerheten**.


Säkrare Kopplingar: Compat Ella® Combiset 1,5 L har ENFit®-kopplingar tillverkade enligt ISO 80369-3. ENFit®-kopplingarna är IV-inkompatibla för att **främja patientsäkerheten** genom att förhindra oavsiktliga felkopplingar.

Fördelar: Den integrerade 1,5 L behållaren erbjuder ett smidigt öppet system med inbyggd hängare och skruvlock. Den stora toppfyllningsöppningen gör det möjligt att fylla på behållaren med näring och vatten **utan att matningsprogrammet behöver stoppas, eller att behållaren behöver avlägsnas från hängaren**.

Säkra Material: 1,5 L behållaren är tillverkad av etylen vinylacetat (EVA), ett mjukt material som är kompatibelt med livsmedel. Compat Ella® Combiset 1,5 L är **sterilt och fritt från DEHP, BPA och latex***.

Kompatibilitet:

- Enterala matningssonder: ENFit®
- Sprutor: ENFit®

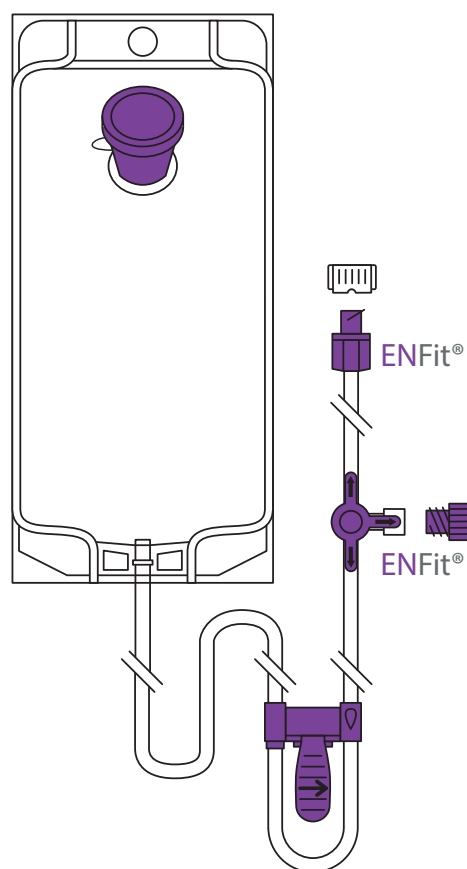


Beställningsinformation

Produktnamn	Produktkod	Kvantitet/ Förpackning
Compat Ella® Combiset 1,5 L	12298202	30

Har du Träffat Compat Ella®?

Compat Ella® Combiset 1,5 L

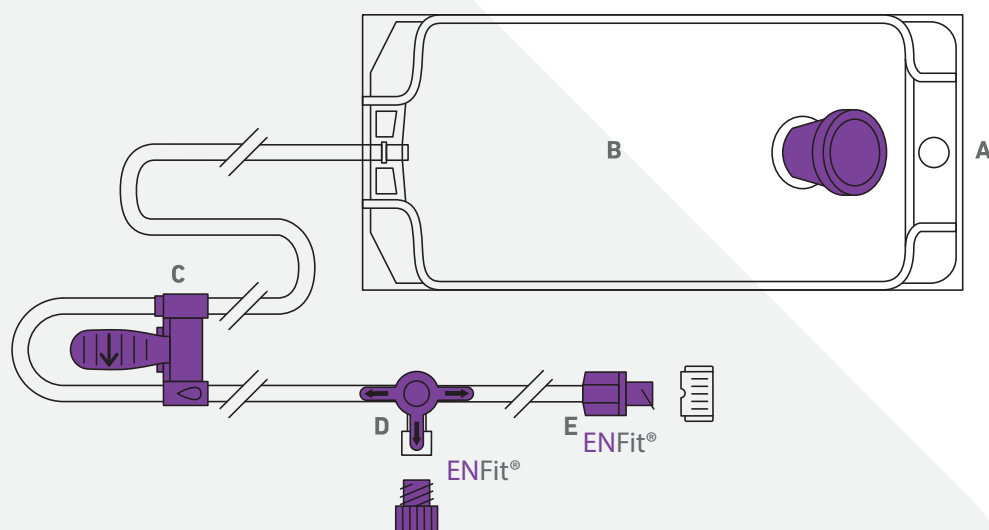

Komponenter

- A** Stor toppfyllningsöppning med inbyggd hängare och skruvlock
- B** Flexibaggle® 1,5 L behållare tillverkad i etylenvinylacetat (EVA) med graderingar (vid 50 ml och varje 100 ml) och märkningar för patientnamn och annan viktig information (formula, volym, datum och frekvens)
- C** Compat Ella® pumpkassett med den integrerade och patenterade säkerhetsfunktionen Auto-Anti-Free-Flow (AAFF)
- D** ENFit®-kompatibel 3-vägs läkemedelsport med lock
- E** ENFit® distal ände med lock (patientsidans sondkoppling)

Specifikationer

Steril:	Steriliserad med etylenoxid (EO).
Förpackning:	Individuellt förpackad i kartong med 30 stycken (58,5 x 38,5 x 16 cm).
Förvaring:	Rumstemperatur. Skyddas mot direkt solljus och fukt.
Hållbarhetstid:	3 år från tillverkningsdatum. Utgångsdatum finns på förpackningen.
Användningstid:	24 timmar. För engångsbruk.
Längd:	Avstånd från behållare till patientens sondkoppling: 230 cm. Avstånd från Flexibaggle® till pump: 50 cm.
Diameter:	Nominell innerdiameter: 3,0 mm. Nominell yttre diameter: 4,15 mm.
ISO-standard:	ENFit®-kopplingar är tillverkade i enlighet med ISO 80369-3.
CE-märkning:	Överensstämmer med direktiv 93/42/EEG om medicintekniska produkter. CE-certifiering har utfärdats av ett ackrediterat anmält organ: TÜV SÜD (CE0123).
Klassificering:	Klass IIa.
Juridisk tillverkare:	Cedic Srl, Via Liberazione 63/9, IT-20068 Peschiera Borromeo (MI).
Hållbarhet:	Miljöledningssystemet uppfyller ISO 14001:2015.
Material:	Sond: PVC och silikon. Alla material är fria från DEHP, BPA och latex*. Ytterligare information ges på begäran.
Ursprungsland:	Tillverkad i Italien.

*Inget DEHP och BPA tillsätts avsiktligt under tillverkningsprocessen. Naturgummilates ingår inte vid tillverkning.

För ytterligare information kontakta din Compat®-representant eller besök www.compat.com

*Alla varumärken används med tillstånd, om inte annat anges.

AXI00402 REV.0 22 SEPTEMBER 2022

Compat®