

Compat ella®

Compat Ella® Dual Spike Set

Das Compat Ella® Dual Spike Set ist für die gleichzeitige enterale Verabreichung von Nahrungs- und/oder Flüssigkeitszufuhr über zwei separate Spike-Behälter bestimmt und ist für die Verwendung mit der Compat Ella® Ernährungspumpe geeignet.

Funktionen auf einen Blick

Das Compat Ella® Dual Spike Set umfasst zwei ENPlus Ernährungskonnektoren für die **gleichzeitige enterale Ernährung und/oder Flüssigkeitszufuhr**, einen kompatiblen ENFit® 3-Wege-Medikamentenport und ein ENFit® distales Ende (patientenseitiger Sondenanschluss).


Zuverlässige Ernährung: Das Compat Ella® Dual Spike Set ist mit der patentierten zuverlässigen Auto-Anti-Free-Flow(AAFF)-Technologie ausgestattet. AAFF ist in die Kassette integriert und wird immer automatisch aktiviert, um **die Patientensicherheit zu gewährleisten**.

Sichere Konnektoren: Das Compat Ella® Dual Spike Set enthält ENFit® Konnektoren gemäß ISO 80369-3 und zwei ENPlus-Konnektoren gemäß ISO 18250-3. ENFit® und ENPlus-Konnektoren sind mit intravenösen Infusionssets nicht kompatibel, um **die Patientensicherheit zu erhöhen**, und dabei zu helfen, versehentliche Fehlan schlüsse zu vermeiden.

Sichere Materialien: Das Compat Ella® Dual Spike Set ist steril, **DEHP-, BPA- and Latex-frei***.

Kompatibilität:

- Nahrungsbehälter: ENPlus
- Enterale Ernährungssonden: ENFit®
- Spritzen: ENFit®

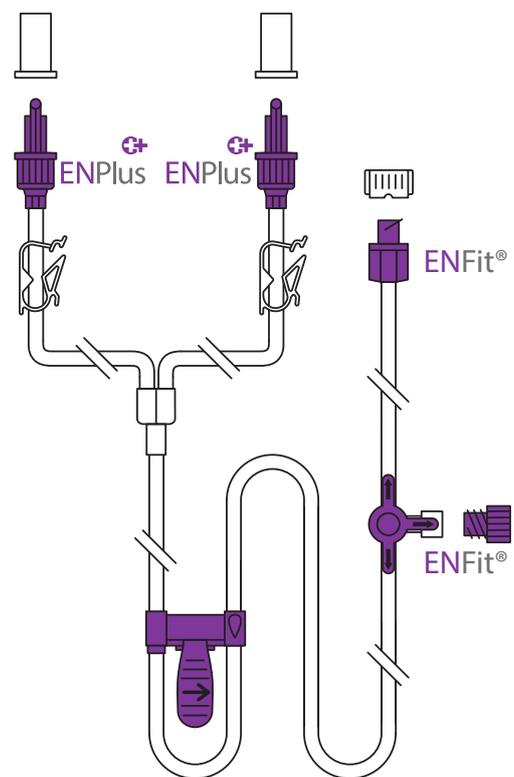


Bestellinformationen

Produktbezeichnung	Artikelnummer	Menge/Karton
Compat Ella® Dual Spike Set	12297288	30

Kennen Sie schon Compat Ella®?

Compat Ella® Dual Spike Set

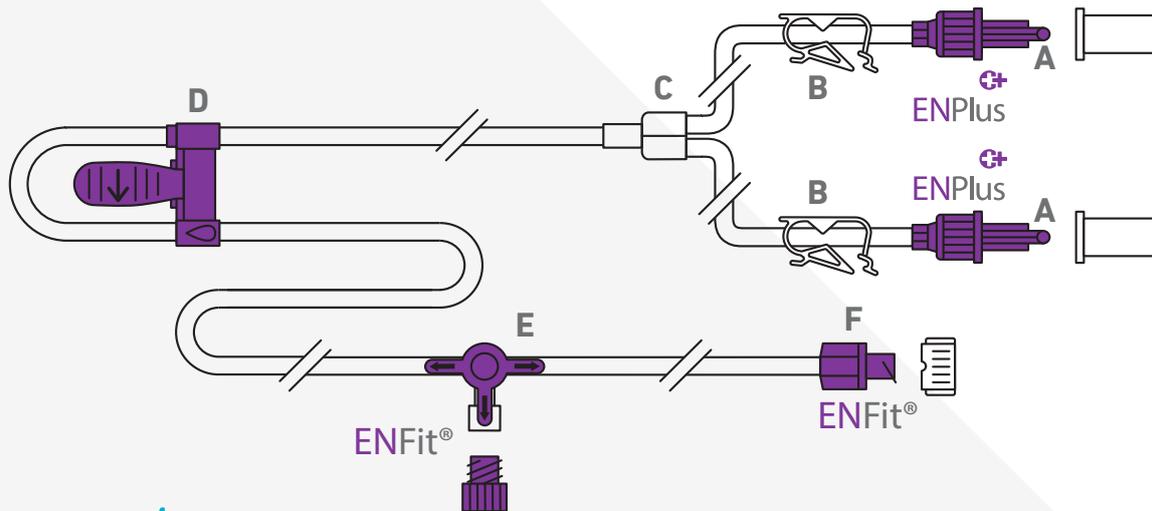

Komponenten

- A ENPlus ‚nur enterale‘ Konnektoren (Ernährungskonnektor) mit Drehverschluss und Verschlusskappe
- B Kneifklemme zum manuellen Ausschalten des Flüssigkeitsdurchflusses
- C Y-Stück
- D Compat Ella® Pumpenkassette mit integrierter und patentierter Auto-Anti-Free-Flow(AAFF)-Sicherheitsfunktion
- E ENFit® kompatibler 3-Wege-Medikamentenport mit Verschlusskappe
- F ENFit® distales Ende mit Verschlusskappe (patientenseitiger Sondenanschluss)

Technische Daten

Steril:	Mit Ethylenoxid (EO) sterilisiert.
Verpackung:	Einzelverpackt in Kartons zu je 30 Stück (29,5 x 26 x 19 cm).
Lagerung:	Bei Raumtemperatur lagern. Vor direkter Sonneneinstrahlung und Luftfeuchtigkeit schützen.
Haltbarkeit:	3 Jahre ab Herstellungsdatum. Verfallsdatum auf der Verpackung.
Dauer der Anwendung:	24 Stunden. Zum Einmalgebrauch.
Länge:	Abstand vom Ernährungskonnektor zum patientenseitigen Sondenanschluss: 230 cm. Abstand zwischen Ernährungskonnektor und Y-Stück: 30 cm. Abstand zwischen Ernährungskonnektor und Pumpe: 50 cm.
Durchmesser:	Nenn-Innendurchmesser: 3,0 mm. Nenn-Außendurchmesser: 4,15 mm.
ISO-Norm:	ENFit® Konnektor nach ISO 80369-3 und ENPlus-Konnektor nach ISO 18250-3.
CE-Kennzeichnung:	Entspricht den Anforderungen der Europäischen Richtlinie 93/42/EWG über Medizinprodukte. Eine CE-Zertifizierung wurde von einer akkreditierten benannten Stelle ausgestellt: TÜV SÜD (CE 0123).
Klassifizierung:	Klasse IIa.
Rechtmäßiger Hersteller:	Cedic Srl, Via Liberazione 63/9, IT-20068 Peschiera Borromeo (MI).
Nachhaltigkeit:	Das Umweltmanagementsystem entspricht ISO 14001:2015.
Materialien:	Schlauchsystem: PVC und Silikon. Alle Materialien sind DEHP-, BPA- und latex-frei*. Weitere Einzelheiten auf Anfrage.
Herkunftsland:	Hergestellt in Italien.

*DEHP und BPA werden während des Herstellungsprozesses nicht absichtlich zugesetzt. Enthält kein Naturkautschuklatex.
Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Compat® Vertriebsvertreter oder auf der Webseite unter www.compat.com
*Sofern nicht anders angegeben, werden alle Markenzeichen mit Zustimmung verwendet.