

Compat ella®

Compat Ella® Dual Spike Set

Compat Ella® Dual Spike Set är avsett för samtidig administrering av enteral näring och/eller hydrering via två separata behållare och kan användas tillsammans med Compat Ella® sondmatningspump.

Egenskaper i Korthet

Compat Ella® Dual Spike Set är utrustat med två ENPlus-näringskopplingar som tillåter **samtidig administrering av enteral näring och/eller hydrering**, en ENFit®-kompatibel 3-vägs läkemedelsport och en ENFit® distal ände (patientsidans sondkoppling).


Pålitlig Näringstillförsel: Compat Ella® Dual Spike Set är utrustat med den patenterade säkerhetsfunktionen Auto-Anti-Free-Flow (AAFF). AAFF finns inbyggt i kassetten och aktiveras alltid automatiskt för att **garantera patientsäkerheten**.

Säkrare Kopplingar: Compat Ella® Dual Spike Set är försett med ENFit®-kopplingar tillverkade enligt ISO 80369-3 och två ENPlus-kopplingar tillverkade enligt ISO 18250-3. ENFit®- och ENPlus-kopplingarna är IV-inkompatibla för att **främja patientsäkerheten** genom att förhindra oavsiktliga felkopplingar.

Säkra Material: Compat Ella® Dual Spike Set är sterilt och fritt från DEHP, BPA och latex*.

Kompatibilitet:

- Näringsbehållare: ENPlus
- Enterala matningssonder: ENFit®
- Sprutor: ENFit®

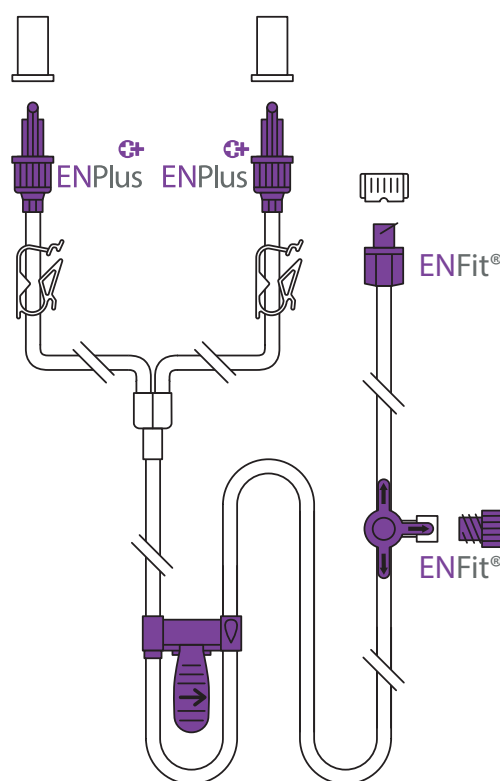


Beställningsinformation

Produktnamn	Produktkod	Kvantitet/ Förpackning
Compat Ella® Dual Spike Set	12297288	30

Har du Träffat Compat Ella®?

Compat Ella® Dual Spike Set

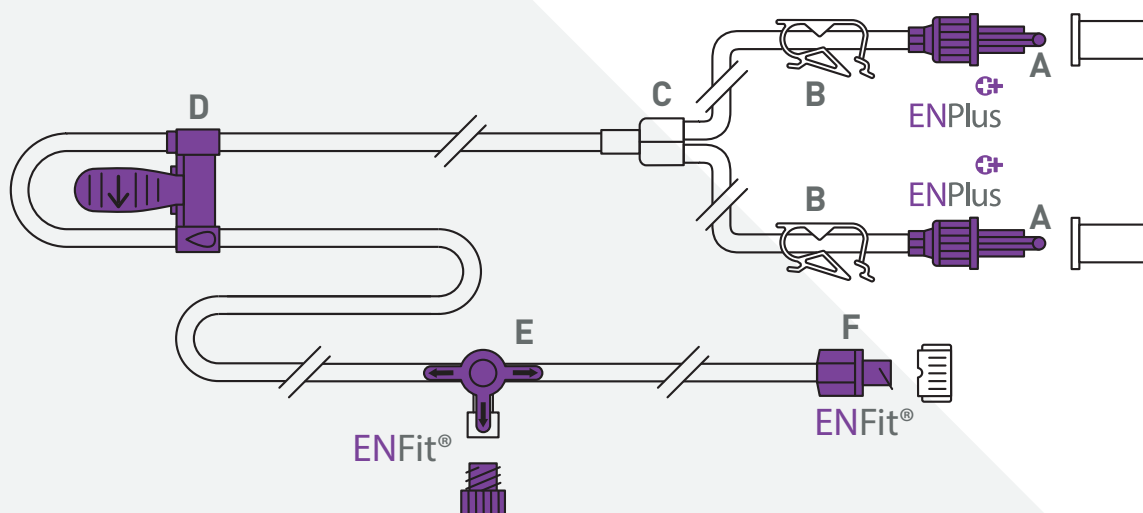

Komponenter

- A ENPlus-koppling "endast enteral" (näringsskoppling) med vridbart lås och lock
- B Klämmor för att stänga av vätskeflödet manuellt
- C Y-koppling
- D Compat Ella® pumpkassett med den inbyggda patenterade säkerhetsfunktionen Auto-Anti-Free-Flow (AAFF)
- E ENFit® kompatibel 3-vägs läkemedelsport med lock
- F ENFit® distal ände med lock (patientsidans sondkoppling)

Specifikationer

Steril:	Steriliserad med etylenoxid (EO).
Förpackning:	Individuellt förpackad i kartong med 30 stycken (29,5 x 26 x 19 cm).
Förvaring:	Rumstemperatur. Skyddas från direkt solljus och fukt.
Hållbarhetstid:	3 år från tillverkningsdatum. Utgångsdatum finns på förpackningen.
Användningstid:	24 timmar. För engångsbruk.
Längd:	Avstånd från näringsskoppling till patientsidans sondkoppling: 230 cm. Avstånd från näringsskoppling till Y-koppling: 30 cm. Avstånd från näringsskoppling till pump: 50 cm.
Diameter:	Nominell innerdiameter: 3,0 mm. Nominell ytterdiameter: 4,15 mm.
ISO-standard:	ENFit®-kopplingar är tillverkade enligt ISO 80369-3 och ENPlus-kopplingar är tillverkade enligt ISO 18250-3.
CE-märkning:	Överensstämmer med direktiv 93/42/EEG om medicintekniska produkter. CE-certifiering har utfärdats av ett ackrediterat anmält organ: TÜV SÜD (CE0123).
Klassificering:	Klass IIa.
Juridisk tillverkare:	Cedic Srl, Via Liberazione 63/9, IT-20068 Peschiera Borromeo (MI).
Hållbarhet:	Miljöledningssystemet uppfyller ISO 14001:2015.
Material:	Sond: PVC och silikon. Alla material är fria från DEHP, BPA och latex*.
Ursprungsland:	Tillverkad i Italien.

*Inget DEHP och BPA tillsätts avsiktligt under tillverkningsprocessen. Naturgummilatex tillsätts inte.

För ytterligare information kontakta din Compat®-representant eller besök www.compat.com

*Alla varumärken används med tillstånd, om inte annat anges.

AXI00010 REV.0 22 SEPTEMBER 2022

Compat®