

# Compat ella®

## Equipo Compat Ella® Via Simples

O equipo Compat Ella® Via Simples é destinado à administração de nutrição, fluidos e medicamentos enterais e é adequado para uso com a bomba de nutrição Compat Ella®.

### Características principais

O equipo Compat Ella® Via Simples apresenta um conector de nutrição ENPlus, uma porta de medicação de 3 vias compatível com ENFit® e uma extremidade distal ENFit® (conexão da sonda do lado do paciente).


**Segurança garantida:** O equipo Compat Ella® Via Simples apresenta a tecnologia de segurança patenteada Auto-Anti-Free-Flow (AAFF). AAFF está integrada na cassete e é sempre ativada automaticamente para **garantir a segurança do paciente**.

**Conectores mais seguros:** O equipo Compat Ella® Via Simples inclui conectores ENFit® fabricados de acordo com a norma ISO 80369-3 e um conector ENPlus fabricado de acordo com a norma ISO 18250-3. Os conectores ENFit® e ENPlus são projetados para serem incompatíveis com IV para **promover a segurança do paciente**, ajudando a evitar conexões indevidas acidentais.

**Materiais seguros:** O equipo Compat Ella® Via Simples é estéril, isento de DEHP, BPA e Látex\*.

#### Compatibilidade:

- Recipientes de nutrição: ENPlus
- Sondas de nutrição enteral: ENFit®
- Seringas: ENFit®

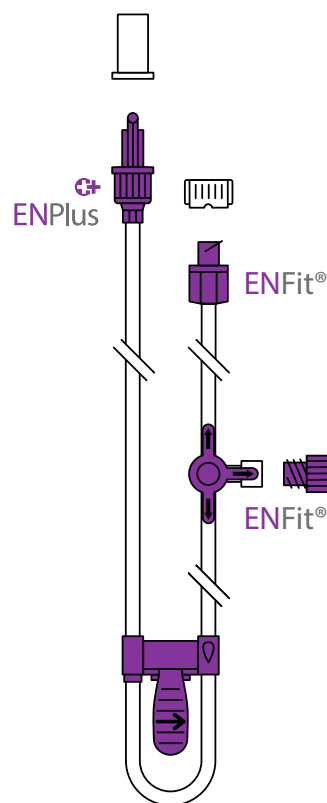


### Informações para pedido

Nome do Produto	Código do Produto	Qtd./Caixa
Equipo Compat Ella® Via Simples	12298203	30

Já conhece a Compat Ella®?

# Equipo *Compat Ella*<sup>®</sup> Via Simples

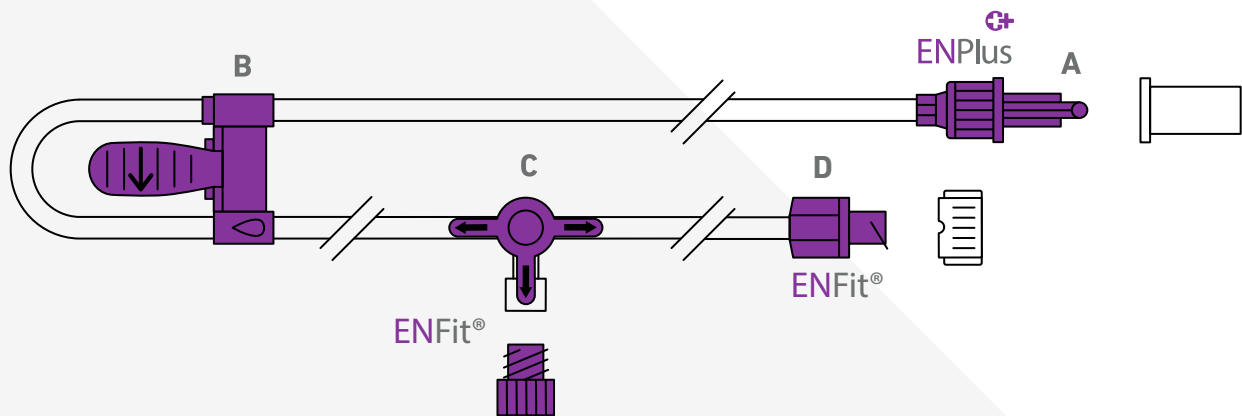

## Componentes

- A Conector ENPlus 'apenas enteral' (conexão de nutrição) com fechamento giratório e tampa
- B Cassete para bomba *Compat Ella*<sup>®</sup> com sistema de segurança Auto-Anti-Free-Flow (AAFF) patenteado e integrado
- C Porta de medicação de 3 vias compatível ENFit<sup>®</sup> com tampa
- D Extremidade distal ENFit<sup>®</sup> com tampa (conexão da sonda do lado do paciente)

## Especificações

<b>Esterilização:</b>	Esterilizado com Óxido de Etileno (EO).
<b>Embalagem:</b>	Embalado individualmente em caixas de 30 itens (29,5 x 26 x 19 cm).
<b>Armazenamento:</b>	Armazenar em temperatura ambiente. Manter afastado da luz solar e da umidade.
<b>Prazo de validade:</b>	3 anos a partir da data de produção. Data de validade indicada na embalagem.
<b>Duração de utilização:</b>	24 horas. Para uso único.
<b>Comprimento:</b>	Distância da conexão de nutrição à conexão da sonda do lado do paciente: 230 cm. Distância da conexão de nutrição à bomba: 50 cm.
<b>Diâmetros:</b>	Diâmetro interno nominal: 3,0 mm. Diâmetro externo nominal: 4,15 mm.
<b>Norma ISO:</b>	Conector ENFit <sup>®</sup> fabricado de acordo com a norma ISO 80369-3 e conector ENPlus fabricado de acordo com a norma ISO 18250-3.
<b>Marca CE:</b>	Em conformidade com a Diretiva Europeia para Dispositivos Médicos 93/42/EEC. Foi emitida uma certificação CE por um Organismo Notificado credenciado: TÜV SÜD (CE0123).
<b>Classificação:</b>	Classe IIa.
<b>Fabricante legal:</b>	Cedic Srl, Via Liberazione 63/9, IT-20068 Peschiera Borromeo (MI), Itália.
<b>Sustentabilidade:</b>	Sistema de Gestão Ambiental em conformidade com a norma ISO 14001:2015.
<b>Materiais:</b>	Sonda: PVC e silicone. Todos os materiais são isentos de DEHP, BPA e látex*.
<b>País de origem:</b>	Informações adicionais a pedido. Fabricado na Itália.

\*DEHP e BPA não são adicionados intencionalmente durante o processo de fabricação. Não formulado com látex de borracha natural.

Para obter mais informações, entre em contato com seu representante da *Compat*<sup>®</sup> ou acesse [www.compat.com](http://www.compat.com)

\*Salvo indicação em contrário, todas as marcas registradas são utilizadas com permissão.

AXI00405 REV.0, 3 DE NOVEMBRO DE 2022

# Compat<sup>®</sup>