

Compat ella®

Equipo Universal Compat Ella®

O equipo universal Compat Ella® é destinado à administração de nutrição, fluidos e medicamentos enterais e é adequado para uso com a bomba de nutrição Compat Ella®.

Características Principais

O equipo universal Compat Ella® possui uma tampa de rosca universal com filtro de ar, um conector de nutrição ENPlus, uma porta de medicação de 3 vias ENFit® e uma extremidade distal ENFit® (conexão da sonda do lado do paciente). Está também incluído um suporte separado para o frasco.


Segurança Garantida: O equipo universal Compat Ella® apresenta a tecnologia patenteada Auto-Anti-Free-Flow (AAFF). Esta incorporada ao «sistema» e é sempre ativada automaticamente para **garantir a segurança do paciente**.

Conectores mais Seguros: O equipo universal Compat Ella® inclui conectores ENFit® fabricados de acordo com a norma ISO 80369-3 e um conector ENPlus fabricado de acordo com a norma ISO 18250-3. Os conectores ENFit® e ENPlus são projetados para serem incompatíveis com IV para **promover a segurança do paciente**, ajudando a evitar conexões indevidas acidentais.

Materiais Seguros: O equipo universal Compat Ella® é estéril e **isento de DEHP, BPA e Látex***.

Compatibilidade:

- Recipientes de nutrição: ENPlus, recipientes de gargalo largo de vidro e plástico, frascos de vidro com tampa coroa
- Sondas de nutrição enteral: ENFit®
- Seringas: ENFit®

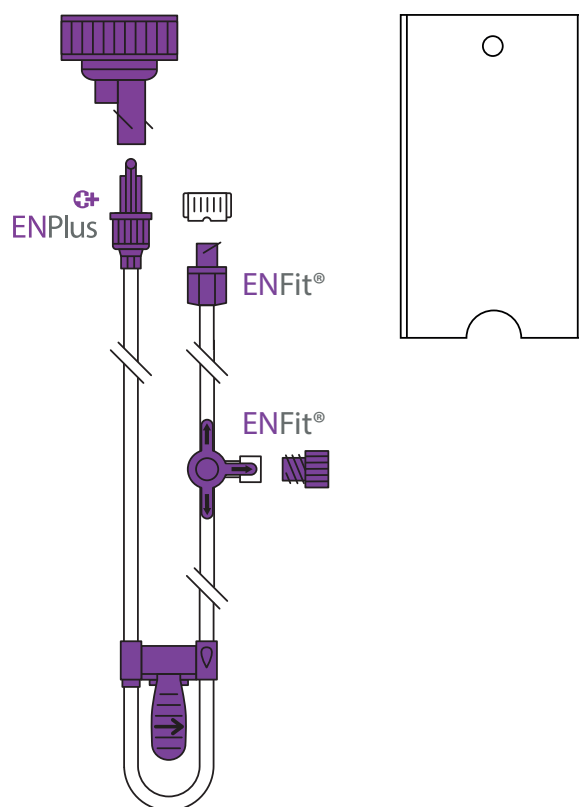


Informações para Pedido

Nome do Produto	Código do Produto	Qtd./Caixa
Equipo Universal Compat Ella®	12298206	30

Já conhece a Compat Ella®?

Equipo Universal Compat Ella®

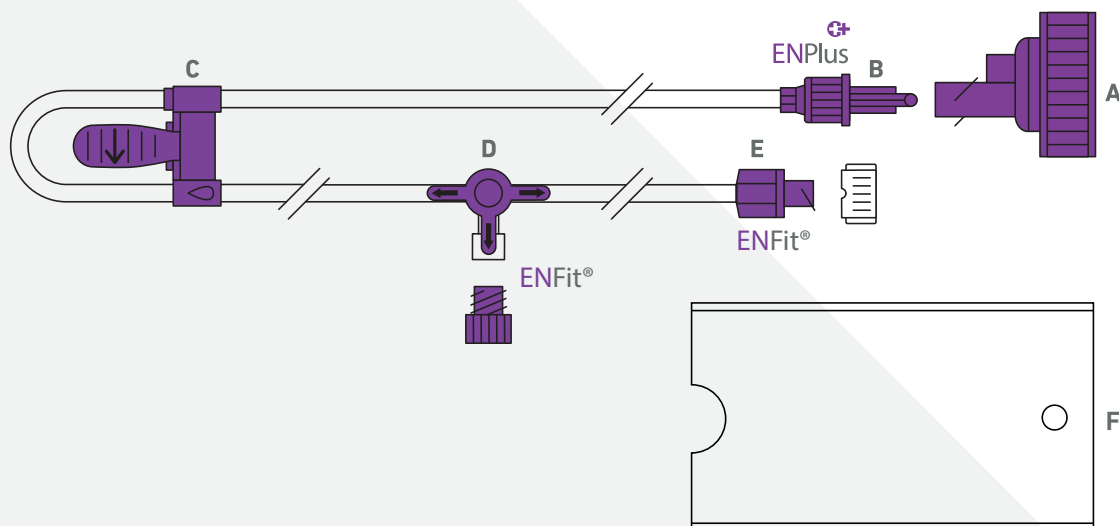

Componentes

- A** Tampa de rosca universal com filtro de ar e porta ENPlus compatível com recipientes de gargalo largo Ø40 mm de vidro e plástico (DIN 168-1) ou frascos de vidro com tampa coroa (EN 14634 e EN 14635)
- B** Conector ENPlus 'apenas enteral' (conexão de nutrição) com fechamento giratório
- C** Cassete para bomba Compat Ella® com sistema de segurança Auto-Anti-Free-Flow (AAFF) patenteado e integrado
- D** Porta de medicação de 3 vias compatível ENFit® com tampa
- E** Extremidade distal ENFit® com tampa (conexão da sonda do lado do paciente)
- F** Suporte de frasco de 500 ml LDPE (Polietileno de Baixa Densidade)

Especificações

Esterilização:	Esterilizado com Óxido de Etileno (EO).
Embalagem:	Embalado individualmente em caixas de 30 itens (39,5 × 29,5 × 14 cm).
Armazenamento:	Armazenar em temperatura ambiente. Manter afastado da luz solar e da umidade.
Prazo de validade:	3 anos a partir da data de produção. Data de validade indicada na embalagem.
Duração de utilização:	24 horas. Para uso único.
Comprimento:	Distância da conexão de nutrição à conexão da sonda do lado do paciente: 230 cm. Distância da conexão de nutrição à bomba: 50 cm.
Diâmetros:	Diâmetro interno nominal: 3,0 mm. Diâmetro externo nominal: 4,15 mm.
Norma ISO:	Conector ENFit® fabricado de acordo com a norma ISO 80369-3 e conector ENPlus fabricado de acordo com a norma ISO 18250-3.
Marca CE:	Em conformidade com a Diretiva Europeia para Dispositivos Médicos 93/42/EEC. Foi emitida uma certificação CE por um Organismo Notificado credenciado: TÜV SÜD (CE0123).
Classificação:	Classe IIa.
Fabricante legal:	Cedic Srl, Via Liberazione 63/9, IT-20068 Peschiera Borromeo (MI), Itália.
Sustentabilidade:	Sistema de Gestão Ambiental em conformidade com a norma ISO 14001:2015.
Materiais:	Sonda: PVC e silicone. Todos os materiais são isentos de DEHP, BPA e látex*.
País de origem:	Fabricado na Itália.

*DEHP e BPA não são adicionados intencionalmente durante o processo de fabricação. Não formulado com látex de borracha natural.

Para obter mais informações, entre em contato com seu representante da Compat® ou acesse www.compat.com

*Salvo indicação em contrário, todas as marcas registradas são utilizadas com permissão.

AXI00406 REV.0 04 DE JULHO DE 2023

Compat®