

Compat ella®

Compat Ella® Universal Set

Compat Ella® Universal Set är avsett för administrering av enteral näring, vätskor och/eller läkemedel och kan användas tillsammans med Compat Ella® sondmatningspump.

Egenskaper i Korthet

Compat Ella® Universal Set är utrustat med ett universalskruvlock med luftfilter, en ENPlus-näringskoppling, en ENFit® 3-vägs läkemedelsport och en ENFit® distal ände (sondkoppling på patientsidan). En separat flaskhängare ingår också.


Pålitlig Näringstillförsel: Compat Ella® Universal Set är utrustat med den patenterade säkerhetsfunktionen Auto-Anti-Free-Flow (AAFF). AAFF finns inbyggt i kassetten och aktiveras alltid automatiskt för att **garantera patientsäkerheten**.

Säkrare Kopplingar: Compat Ella® Universal Set är försett med ENFit®-kopplingar tillverkade enligt ISO 80369-3 och en ENPlus-koppling tillverkad enligt ISO 18250-3. ENFit®-och ENPlus-kopplingar är utformade för att vara IV-inkompatibla för att **främja patientsäkerheten**, genom att förhindra oavsiktliga felkopplingar.

Säkra Material: Compat Ella® Universal Set är **sterilt och fritt från DEHP, BPA och latex***.

Kompatibilitet:

- Näringsbehållare: ENPlus, vidhalsade glas- och plastbehållare, glasflaskor med kronkork
- Enterala matningssonder: ENFit®
- Sprutor: ENFit®

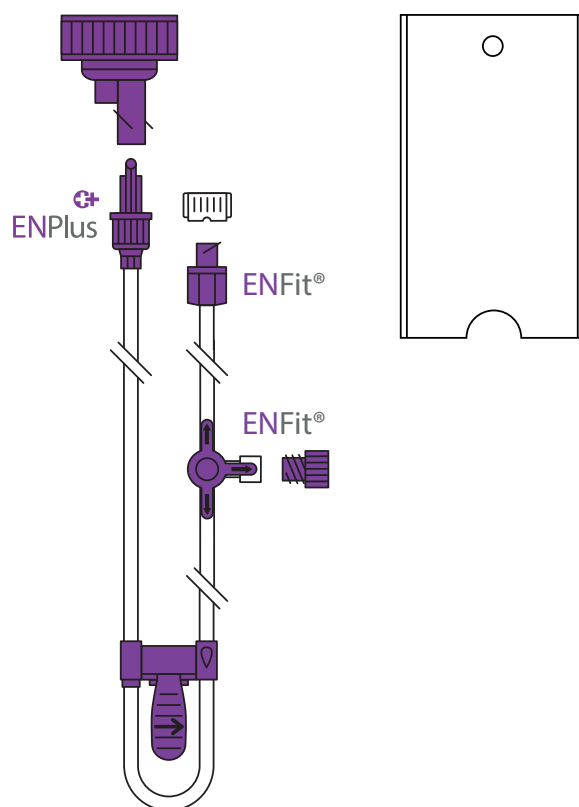


Beställningsinformation

Produktnamn	Produktkod	Kvantitet/ Förpackning
Compat Ella® Universal Set	12298206	30

Har du Träffat Compat Ella®?

Compat Ella® Universal Set

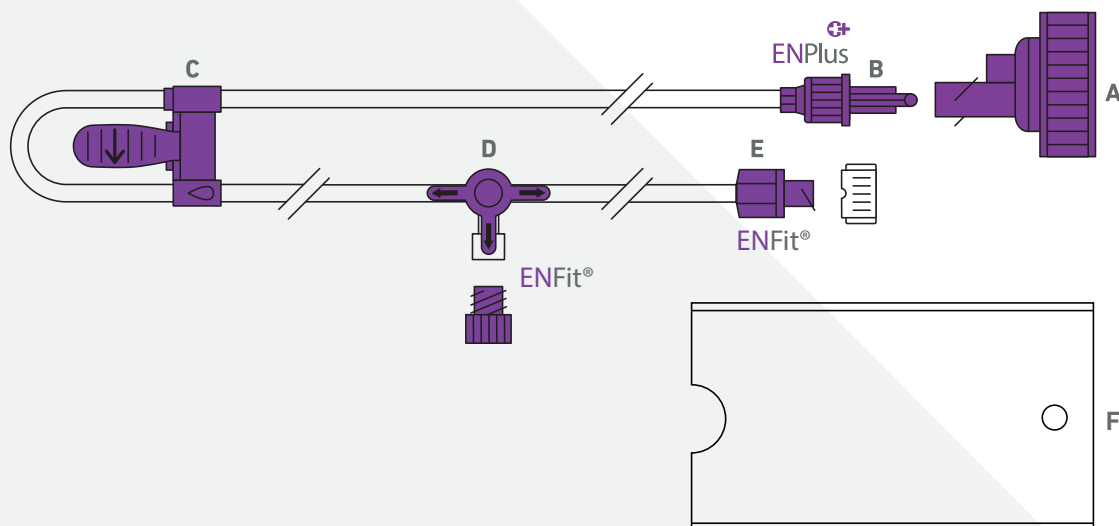

Komponenter

- A Universalskruvlock med luftfilter och ENPlus-port som är kompatibel med Ø40 mm glas- och plastbehållare med vid hals (DIN 168-1) eller glasflaskor med kronkork (EN 14634 och EN 14635)
- B ENPlus-koppling "endast enteral" (näringskoppling) med vridbart lås
- C Compat Ella®-pumpkassett med den inbyggda patenterade säkerhetsfunktionen Auto-Anti-Free-Flow (AAFF)
- D ENFit®-kompatibel 3-vägs läkemedelsport med lock
- E ENFit® distal ände med lock (patientsidans sondkoppling)
- F 500 ml flaskhållare LDPE (lågdensitetspolyeten)

Specifikationer

Steril:	Steriliserad med etylenoxid (EO).
Förpackning:	Individuellt förpackad i kartong med 30 stycken (39,5 x 29,5 x 14 cm).
Förvaring:	Rumstemperatur. Skyddas från direkt solljus och fukt.
Hållbarhetstid:	3 år från tillverkningsdatum. Utgångsdatum finns på förpackningen.
Användningstid:	24 timmar. För engångsbruk.
Längd:	Avstånd från näringskoppling till patientsidans sondkoppling: 230 cm. Avstånd från näringskoppling till pump: 50 cm.
Diameter:	Nominell innerdiameter: 3,0 mm. Nominell ytterdiameter: 4,15 mm.
ISO-standard:	ENFit® koppling tillverkad enligt ISO 80369-3 och ENPlus-koppling tillverkad enligt ISO 18250-3.
CE-märkning:	Överensstämmer med direktiv 93/42/EEG om medicintekniska produkter. CE-certifiering har utfärdats av ett ackrediterat anmält organ: TÜV SÜD (CE0123).
Klassificering:	Klass IIa.
Juridisk tillverkare:	Cedic Srl, Via Liberazione 63/9, IT-20068 Peschiera Borromeo (MI).
Hållbarhet:	Miljöledningssystemet uppfyller ISO 14001:2015.
Material:	Sond: PVC och silikon. Alla material är fria från DEHP, BPA och latex*.
Ursprungsland:	Tillverkad i Italien.

*Inget DEHP och BPA tillsätts avsiktligt under tillverkningsprocessen. Naturgummilatex tillsätts inte.

För ytterligare information kontakta din Compat® representant eller besök www.compat.com

*Alla varumärken används med tillstånd, om inte annat anges.

AXI00406 REV.0 15 JUN 2022

Compat®