

Compat[®] Flexibaggle[®]

Faltbares leeres Enteral-Reservoir 1,5 l

Das faltbare leere Enteral-Reservoir Compat[®] Flexibaggle[®] 1,5 l mit ENPlus-Port ist für die enterale Verabreichung von Nahrung und/oder Flüssigkeiten an Patienten vorgesehen. Zur Verwendung in Verbindung mit Verabreichungssets.

Merkmale auf einen Blick


Das faltbare leere Enteral-Reservoir Compat[®] Flexibaggle[®] 1,5 l mit ENPlus-Port wurde entwickelt, um die **Patientenversorgung zu verbessern**.

Anwenderfreundlich: Die integrierte Aufhängung und die große Füllöffnung an der Oberseite ermöglichen ein **einfaches Befüllen** des Beutels mit Nahrung oder Wasser und die **Faltbarkeit des Beutels spart Stauraum**, sodass er bei Bedarf schnell zur Hand ist.

Ambulante Verwendung: Der Beutel **hält einem Fall aus bis zu 1,5 m Höhe stand** und die leicht zu schließende Verschlusskappe erfordert nur eine **Vierteldrehung**, um **eine sichere Abdichtung zu gewährleisten**, sodass das Produkt auch unterwegs mit geringem Risiko des Auslaufens verwendet werden kann.

Patientensicherheit: Das Compat[®] Flexibaggle[®] 1,5 l beinhaltet einen ENPlus-Konnektor nach ISO 18250-3. Der ENPlus-Konnektor ist so konzipiert, dass er mit intravenösen Infusionssets inkompatibel ist, um **die Patientensicherheit zu erhöhen**, da ein versehentlicher Anschluss von falschen Sets unmöglich ist. Das Compat[®] Flexibaggle[®] 1,5 l besteht aus Ethylen-Vinyl-Acetat (EVA), einem weichen und lebensmittelechten Material. Es ist **steril und frei von DEHP, BPA und Latex**.*

Umweltfreundlich: Das Compat[®] Flexibaggle[®] 1,5 l ist faltbar, **reduziert so die Umweltbelastung** beim Versand.

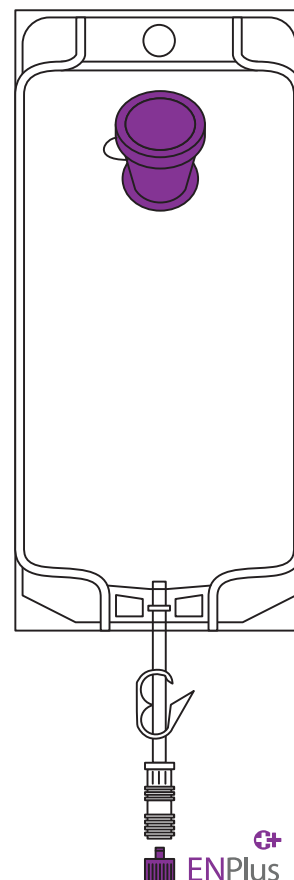


Bestellinformationen

Produktbezeichnung	Artikelnummer	Menge/Box
Compat [®] Flexibaggle [®] 1,5 l	12306162	30

Patientenversorgung. Unsere Priorität.

Faltbares leeres Enteral-Reservoir 1,5 l

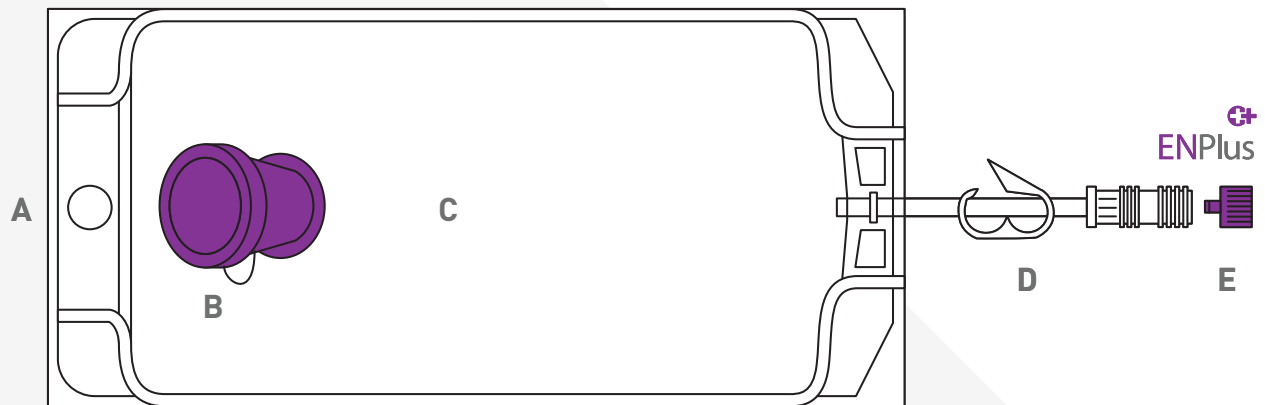

Komponenten

- A** Integrierte Aufhängung
- B** Große Einfüllöffnung oben mit sicherem Schraubverschluss
- C** 1,5-l-Behälter mit Füllstufenmarkierungen (bei 50 ml und dann alle 100 ml) und Etiketten für den Patientennamen und andere wichtige Informationen (Formulierung, Volumen, Datum und Rate)
- D** Kneifzange
- E** ENPlus-Ernährungsport „nur enteral“ mit Verschlusskappe

Technische Daten

- Weithalsport:** Nenn-Innendurchmesser: ± 36 mm.
- Beutelgröße:** Max. Nenn-Beutelgröße: $\pm 326 \times 190$ mm.
- Steril:** Sterilisiert mit Ethylenoxid (EO).
- Verpackung:** Einzeln verpackt in Kartons zu 30 Stück ($58,5 \times 38,5 \times 16$ cm).
- Lagerung:** Trocken bei Raumtemperatur und vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt lagern.
- Haltbarkeit:** Bis zu 3 Jahre ab Herstellungsdatum. Verfallsdatum auf der Verpackung.
- Dauer der Anwendung:** 24 Stunden. Zur Einmalanwendung.
- ISO-Norm:** ENPlus-Konnektor nach ISO 18250-3.
- CE-Kennzeichnung:** Entspricht der europäischen Richtlinie über Medizinprodukte 93/42/EWG. Eine CE-Zertifizierung wurde von einer akkreditierten benannten Stelle ausgestellt: TÜV SÜD (CE0123).
- Klassifizierung:** Klasse Is.
- Herstellerangaben:** Cedic Srl, Via Liberazione 63/9, IT-20068 Peschiera Borromeo (MI).
- Nachhaltigkeit:** Das Environmental Management System entspricht ISO 14001.
- Materialien:** Beutel: EVA. Schlauchsystem: PVC. Alle Materialien sind frei von DEHP, BPA und Latex.* Weitere Einzelheiten auf Anfrage.
- Herkunftsland:** Hergestellt in Ägypten.

* DEHP und BPA werden während des Herstellungsprozesses nicht absichtlich hinzugefügt. Enthält kein Naturkautschuklatex.

Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Compat®-Vertreter oder auf der Webseite unter www.compat.com
*Soweit nicht anders angegeben, werden alle Markenzeichen mit Genehmigung verwendet.

AXI00032 REV.1 04. MAI 2026