

Compat[®] Flexibaggle[®]

Contenedor Enteral Flexible de 1.5 L

El contenedor flexible de Compat[®] Flexibaggle[®] 1,5 L con conector ENPlus está destinado a la administración enteral de nutrientes o líquidos a los pacientes. Uso en combinación con sistemas de administración.

Características Generales


El contenedor flexible Compat[®] Flexibaggle[®] de 1,5 L con conector ENPlus está diseñado para **ayudar a mejorar el cuidado del paciente**.

Uso Sencillo: El colgador incorporado y la amplia abertura de llenado superior permiten **rellenar fácilmente** la bolsa con nutrientes o agua, mientras que su capacidad de plegado **ahorra espacio de almacenamiento**.

Uso Ambulatorio: La bolsa **soporta caídas desde una altura de hasta 1,5 m** y, gracias a su diseño con tapón de cierre fácil, basta con un cuarto de vuelta para **garantizar un cierre seguro**, lo que permite utilizar el producto también durante desplazamientos con un riesgo de fuga bajo.

Seguridad del Paciente: El contenedor Compat[®] Flexibaggle[®] de 1,5 L incluye un conector ENPlus fabricado de conformidad con la norma ISO 18250-3. El conector ENPlus está diseñado para ser incompatible con la administración IV, con el objetivo de **incrementar la seguridad del paciente** impidiendo errores de conexión accidentales. El contenedor Compat[®] Flexibaggle[®] de 1,5 L está fabricado en etilvinilacetato (EVA), un material suave e inocuo para los alimentos. Es **estéril y está libre de DEHP, BPA y látex***.

Respetuoso con el Medio Ambiente: El contenedor Compat[®] Flexibaggle[®] de 1,5 L es flexible **lo que reduce el impacto medioambiental** del transporte.

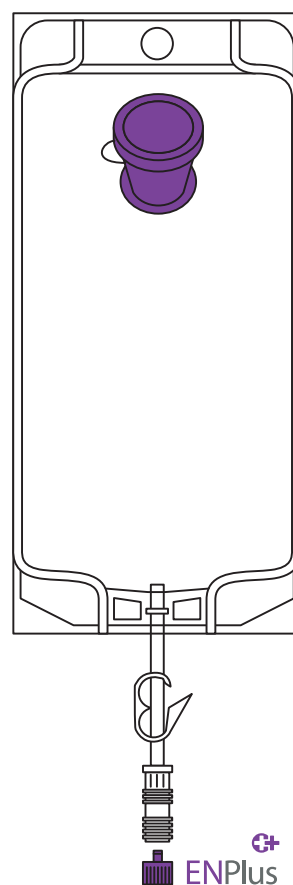


Información de Pedido

Descripción	Código	Unidad de venta
Compat [®] Flexibaggle [®] 1,5 L	12306162	30

El Cuidado del Paciente. Nuestra Prioridad.

Contenedor Enteral Flexible de 1,5 L

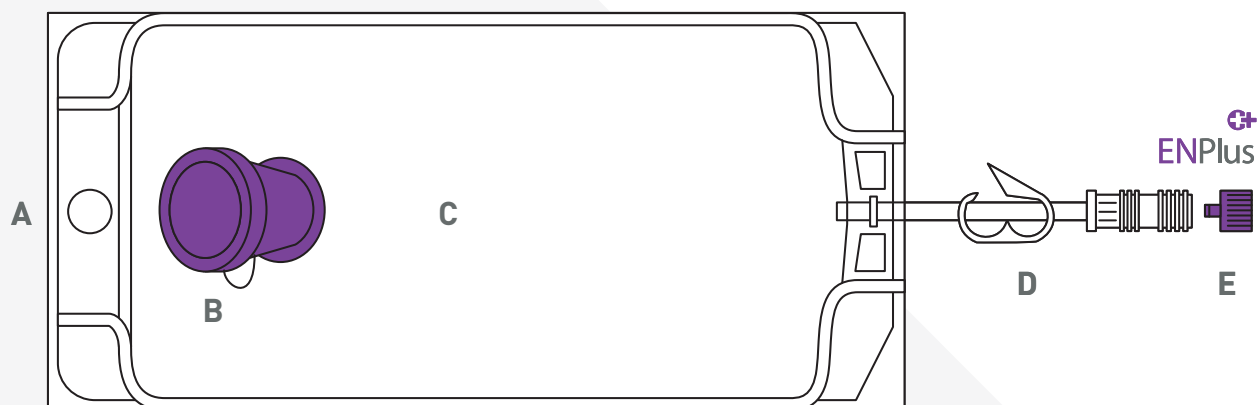

Componentes

- A** Colgador incorporado
- B** Amplia abertura de llenado superior con tapón de rosca seguro
- C** Contenedor de 1,5 l con graduaciones (a los 50 ml y cada 100 ml) y etiquetas para el nombre del paciente y otra información importante (fórmula, volumen, fecha y velocidad)
- D** Abrazadera de pinza
- E** Conector ENPlus exclusivamente para uso enteral con tapón

Especificaciones Técnicas

Abertura de boca ancha:	Diámetro interno nominal: ± 36 mm.
Tamaño de la bolsa:	Tamaño nominal máx. de la bolsa: $\pm 326 \times 190$ mm.
Estéril:	Esterilizado con óxido de etileno (EO).
Embalaje:	Embalado individualmente en cajas de 30 unidades (58,5 x 38,5 x 16 cm).
Almacenaje:	Almacenar a temperatura ambiente, alejado de la luz solar.
Período de validez:	Hasta 3 años a partir de la fecha de producción. Fecha de caducidad impresa en el embalaje.
Duración de uso:	24 horas. Un solo uso.
Norma ISO:	Conector ENFit® fabricado de conformidad con la norma ISO 18250-3.
Marca CE:	Cumple la Directiva Europea de Productos Sanitarios 93/42/CEE. Certificación CE emitida por un Organismo Notificado acreditado: TÜV SÜD (CE0123).
Clasificación:	Clase Is.
Fabricante legal:	Cedic Srl, Via Liberazione 63/9, IT-20068 Peschiera Borromeo (MI).
Sostenibilidad:	El sistema de gestión ambiental cumple con la norma ISO 14001.
Materiales:	Bolsa: EVA. conexiones: PVC. Todos los materiales están libres de DEHP, BPA y látex*. Detalles adicionales bajo solicitud.
País de origen:	Fabricado en Egipto.

*No se añaden DEHP y BPA intencionadamente durante el proceso de fabricación. No está formulado con látex de caucho natural.

Para obtener más información, consulte a su delegado Compat® o visite www.compat.com

*Salvo que se indique lo contrario, todas las marcas comerciales se utilizan con la debida autorización.

AXI00032 REV.1 04 MAYO 2026

Compat®