

Compat[®] Flexibaggle[®]

Contenitore enterale vuoto pieghevole 1,5 l

Il contenitore vuoto pieghevole Compat[®] Flexibaggle[®] da 1,5 l con connettore ENPlus è progettato per la somministrazione ai pazienti di sostanze nutritive e/o fluidi per via enterale. Da usare in combinazione con i set di somministrazione.

● *Panoramica delle caratteristiche*


Il contenitore vuoto pieghevole Compat[®] Flexibaggle[®] da 1,5 l con connettore ENPlus è pensato per **contribuire a migliorare la cura del paziente**.

Facilità di utilizzo: Grazie al supporto integrato e all'ampia apertura per il riempimento dall'alto è possibile **riempire facilmente** la sacca con acqua o sostanze nutritive. Inoltre, la sua ripiegabilità permette di averlo sempre a portata di mano e di **ridurre quindi lo spazio occupato nel magazzino**.

Uso ambulatoriale: La sacca **resiste a cadute fino a 1,5 m** e il tappo di facile chiusura richiede solo un quarto di giro per **assicurare una tenuta sicura**, consentendo l'utilizzo del contenitore in qualsiasi spostamento con un ridotto rischio di perdite.

Sicurezza del paziente: Compat[®] Flexibaggle[®] da 1,5 l dispone di un connettore ENPlus realizzato in conformità allo standard ISO 18250-3. Il connettore ENPlus è progettato per non essere compatibile con i set per infusione endovenosa al fine di **promuovere la sicurezza del paziente** aiutando a evitare involontari collegamenti sbagliati. Compat[®] Flexibaggle[®] da 1,5 l è realizzato in etilene-vinil acetato (EVA), un materiale morbido e compatibile con gli alimenti. È inoltre **sterile e privo di DEHP, BPA e lattice ***.

Ecologico: Compat[®] Flexibaggle[®] da 1,5 l è pieghevole, il che **riduce l'impatto ambientale** legato alla spedizione.

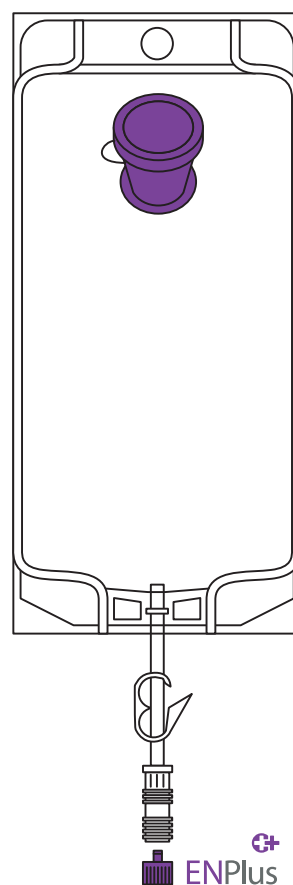


● *Informazioni per gli ordini*

Nome prodotto	Codice prodotto	N. pezzi/conf.
Compat [®] Flexibaggle [®] 1,5 l	12306162	30

La cura del paziente. La nostra priorità.

Contenitore enterale vuoto pieghevole 1,5 l

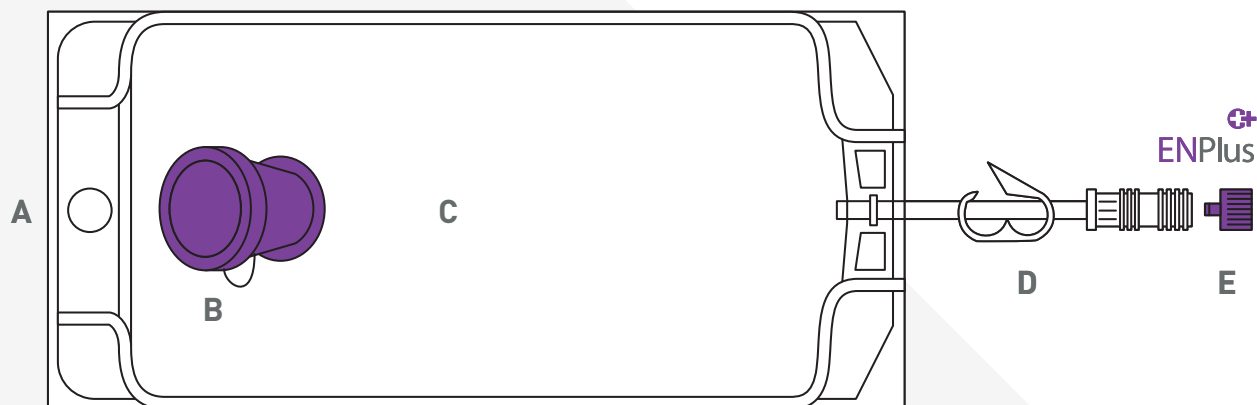

Componenti

- A** Supporto integrato
- B** Apertura ampia per riempimento dall'alto con tappo sicuro
- C** Contenitore da 1,5 l con graduazioni (a 50 ml e poi ogni 100 ml) ed etichette per il nome del paziente e altre informazioni importanti (formula, volume, data e velocità del flusso)
- D** Clamp
- E** Connettore ENPlus per nutrizione "esclusivamente enterale" provvisto di tappo

Specifiche

- Imboccatura larga:** diametro interno nominale di ± 36 mm.
- Dimensioni della sacca:** dimensione massima nominale della sacca: $\pm 326 \times 190$ mm.
- Sterile:** sterilizzato con ossido di etilene (EO).
- Confezionamento:** confezionato singolarmente in scatole da 30 pezzi ($58,5 \times 38,5 \times 16$ cm).
- Conservazione:** conservare all'asciutto, a temperatura ambiente e al riparo dalla luce solare.
- Durata:** fino a 3 anni dalla data di produzione. Data di scadenza indicata sulla confezione.
- Durata di impiego:** 24 ore. Monouso.
- Standard ISO:** connettore ENPlus conforme allo standard ISO 18250-3.
- Marchio CE:** conforme alla direttiva europea 93/42/CEE concernente i dispositivi medici. Certificazione CE rilasciata da un organismo notificato accreditato: TÜV SÜD (CE0123).
- Classificazione:** classe Is.
- Fabbricante legale:** Cedic Srl, Via Liberazione 63/9, IT-20068 Peschiera Borromeo (MI).
- Sostenibilità:** sistema di gestione ambientale conforme a ISO 14001.
- Materiali:** sacca in EVA. Tubi in PVC. Tutti i materiali utilizzati sono privi di DEHP, BPA e lattice*. Ulteriori dettagli disponibili su richiesta.
- Paese di origine:** prodotto in Egitto.

*Non vengono intenzionalmente aggiunti DEHP e BPA durante il processo di fabbricazione. Non formulato con lattice di gomma naturale.

Per richiedere maggiori informazioni, contattare il rappresentante Compat® di fiducia o visitare il sito www.compat.com

® Se non diversamente specificato, tutti i marchi commerciali sono stati utilizzati previa autorizzazione.

AXI00032 REV.1 04 MAGGIO 2026

Compat®