

Compat® Flexibaggle®

Vikbar Tom Enteral Behållare 1,5 L

Compat® Flexibaggle® 1,5 L vikbar tom behållare med ENPlus-port är avsedd för administrering av enteral näring och/eller vätskor till patienter. Används tillsammans med aggregat.

Egenskaper i Korthet


Compat® Flexibaggle® 1,5 L vikbar tom behållare med ENPlus-port har utformats för att **förbättra patientvården**.

Lätt att Använda: Den inbyggda hängaren och stora toppfyllningsöppningen gör det **enkelt att fylla** behållaren med näring eller vatten och vikbarheten **sparar förvaringsutrymme** vilket gör att den lätt kan finnas till hands vid behov.

Ambulatorisk Användning: Behållaren **motstår fall upp till 1,5 meter** och det lättstängda lockets utformning kräver endast ett kvarts varv för att **säkerställa tätning**, vilket gör att produkten också kan användas i vardagen utan risk för läckage.

Patientsäkerhet: Compat® Flexibaggle® 1,5 L är försedd med en ENPlus-koppling tillverkad enligt ISO 18250-3. ENPlus-kopplingarna är IV-inkompatibla för att **främja patientsäkerheten**, genom att förhindra oavsiktliga felkopplingar. Compat® Flexibaggle® 1,5 L är tillverkad av etylenvinylacetat (EVA), ett mjukt material som är kompatibelt med livsmedel. Det är **sterilt och fritt från DEHP, BPA och latex***.

Miljövänlig: Compat® Flexibaggle® 1,5 L är vikbar, vilket minskar miljöpåverkan vid transport.

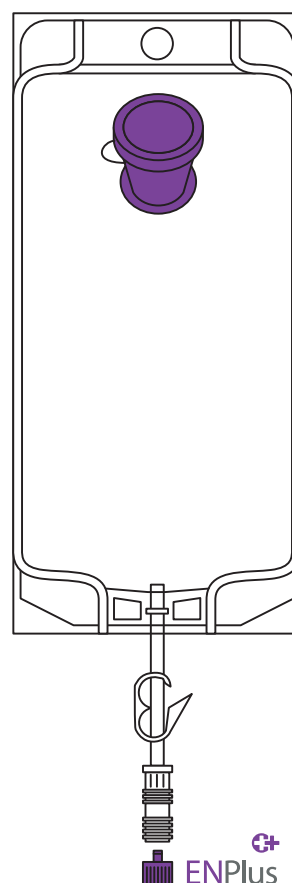


Beställningsinformation

Produktnamn	Produktkod	Kvantitet/ Förpackning
Compat® Flexibaggle® 1,5 L	12306162	30

Patientvård. Vår Prioritet.

Vikbar Tom Enteral Behållare 1,5 L

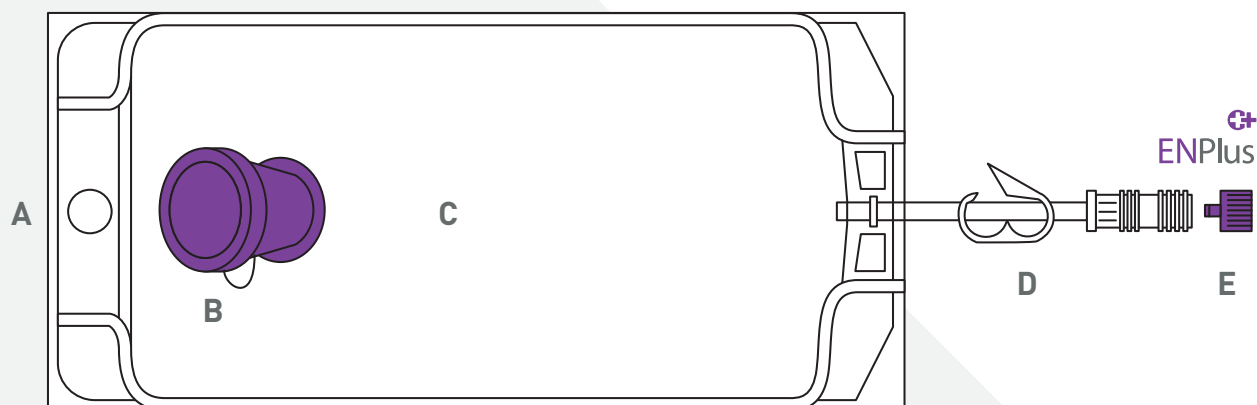

Komponenter

- A Inbyggd hängare
- B Stor toppfyllningsöppning med tätt skruvlock
- C 1,5 L-behållare med graderingar (vid 50 ml och därefter varje 100 ml), och märkningar för patientnamn och annan viktig information (formula, volym, datum och frekvens)
- D Klämma
- E ENPlus "endast enteral" matningsport med lock

Specifikationer

Port med bred öppning:	Nominell innerdiameter: ± 36 mm.
Storlek behållare:	Behållarens maximala nominella storlek: $\pm 326 \times 190$ mm.
Steril:	Steriliserad med etylenoxid (EO).
Förpackning:	Individuellt förpackad i kartong med 30 stycken (58,5 x 38,5 x 16 cm).
Förvaring:	Förvaras torrt i rumstemperatur och skyddas från direkt solljus.
Hållbarhetstid:	Upp till 3 år från tillverkningsdatum. Utgångsdatum finns på förpackningen.
Användningstid:	24 timmar. För engångsbruk.
ISO-standard:	ENPlus-kopplingen är tillverkad i enlighet med ISO 18250-3.
CE-märkning:	Överensstämmer med direktiv 93/42/EEG om medicintekniska produkter. CE-certifiering har utfärdats av ett ackrediterat anmält organ: TÜV SÜD (CE0123).
Klassificering:	Klass Is.
Juridisk tillverkare:	Cedic Srl, Via Liberazione 63/9, IT-20068 Peschiera Borromeo (MI).
Hållbarhet:	Miljöledningssystemet uppfyller ISO 14001:2015.
Material:	Behållare: EVA. Sond: PVC. Alla material är fria från DEHP, BPA och latex*. Ytterligare information ges på begäran.
Ursprungsland:	Tillverkad i Italien.

*Inget DEHP och BPA tillsätts avsiktligt under tillverkningsprocessen. Naturgummilatex tillsätts inte.

För ytterligare information kontakta din Compat®-representant eller besök www.compat.com

*Alla varumärken används med tillstånd, om inte annat anges.

AXI00032 REV.0 22 SEPTEMBER 2022

Compat®