

Compat® Flexibaggle®

Vikbar Tom Enteral Behållare 500 ml

Compat® Flexibaggle® 500 ml vikbar tom behållare med ENPlus-port är avsedd för administrering av enteral näring och/eller vätskor till patienter. Används tillsammans med aggregat.

Egenskaper i Korthet


The Compat® Flexibaggle® 500 ml vikbar tom behållare med ENPlus-port har utformats för att förbättra patientvården.

Lätt att Använda: Att behållaren är självstående och har en bred öppning gör den väldigt lätt att hantera, och minskar risken för spill. Vikbarheten sparar förvaringsutrymme vilket gör att den lätt kan finnas till hands vid behov.

Ambulatorisk användning: Varje port till Compat® Flexibaggle® 500 ml är utrustad med ett tätt skruvlock som förhindrar läckage, vilket gör den lämplig för ambulatorisk användning, till exempel tillsammans med Compat Ella® Ryggsäck.

Patientsäkerhet: Compat® Flexibaggle® 500 ml är försedd med en ENPlus-koppling tillverkad enligt ISO 18250-3. ENPlus-kopplingarna är utformade för att vara IV-inkompatibla för att främja patientsäkerheten, genom att förhindra oavsiktliga felkopplingar. Compat® Flexibaggle® 500 ml är tillverkad av polyeten, ett material som är kompatibelt med livsmedel. Den är också steril och fri från DEHP, BPA och latex*.

Miljövänlig: Compat® Flexibaggle® 500 ml är vikbar, vilket minskar miljöpåverkan vid transport.

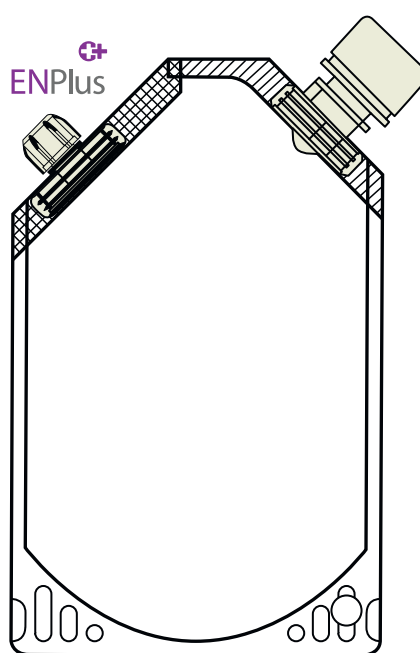


Beställningsinformation

Produktnamn	Produktkod	Kvantitet/ Förpackning
Compat® Flexibaggle® 500 ml	12440917	30

Patientvård. Vår Prioritet.

Vikbar Tom Enteral Behållare 500 ml

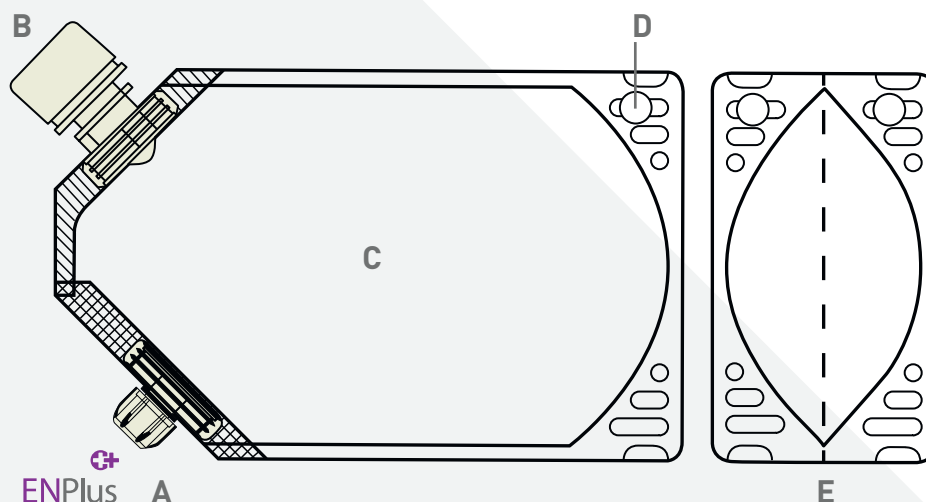

Komponenter

- A ENPlus "endast enteral" matningsport med vridbart lås och lock
- B Fyllningsport med bred öppning och skruvlock
- C Flexibaggle® 500 ml behållare med graderingar (vid 250 ml och 500 ml) och märkningar för patientnamn och annan viktig information (formula, volym, datum och frekvens)
- D Fästpunkt för påklämma
- E Behållarens vikbara självstående bas sedd underifrån

Specifikationer

Port med bred öppning:	Nominell innerdiameter: $\pm 21,5$ mm.
Storlek behållare:	Behållarens maximala nominella storlek: $\pm 130 \times 210$ mm.
Steril:	Steriliserad med etylenoxid (EO).
Förpackning:	Individuellt förpackad i kartong med 30 stycken (29,5 x 25 x 17 cm).
Förvaring:	Rumstemperatur. Skyddas från direkt solljus och fukt.
Hållbarhetstid:	3 år från tillverkningsdatum. Utgångsdatum finns på förpackningen.
Användningstid:	24 timmar. För engångsbruk.
ISO-standard:	ENPlus-kopplingen är tillverkad i enlighet med ISO 18250-3.
CE-märkning:	Överensstämmer med direktiv 93/42/EEG om medicintekniska produkter. CE-certifiering har utfärdats av ett ackrediterat anmält organ: TÜV SÜD (CE0123).
Klassificering:	Klass Is.
Juridisk tillverkare:	Cedic Srl, Via Liberazione 63/9, IT-20068 Peschiera Borromeo (MI).
Hållbarhet:	Miljöledningssystemet uppfyller ISO 14001:2015.
Material:	Behållare: PE (Polyeten). Fri från DEHP, BPA och latex*. Ytterligare information ges på begäran.
Ursprungsland:	Tillverkad i Italien.

*Inget DEHP och BPA tillsätts avsiktligt under tillverkningsprocessen. Naturgummilatex tillsätts inte.

För ytterligare information kontakta din Compat®-representant eller besök www.compat.com

®/la varumärken används med tillstånd, om inte annat anges.

AXI00033 REV.0 22 SEPTEMBER 2022

Compat®