

Compat[®] Gravity

Compat[®] Gravity Combiset 1,5 l

Das Compat[®] Gravity Combiset 1,5 l ist für die enterale Verabreichung von Nahrung, Flüssigkeiten oder Arzneimitteln bestimmt und ist für eine Schwerkraftapplikation geeignet.

Funktionen auf einen Blick

Das Compat[®] Gravity Combiset 1,5 l umfasst einen integrierten 1,5 l Flexibaggle[®] Behälter, eine Tropfkammer, einen ENFit[®] Y-Medikamentenport und ein ENFit[®] distales Ende.


Patientensicherheit: Das Compat[®] Gravity Combiset 1,5 l umfasst ENFit[®] Konnektoren nach ISO 80369-3. Die ENFit[®] Konnektoren sind mit intravenösen Infusionssets nicht kompatibel, um die Patientensicherheit zu erhöhen, und dabei zu helfen, versehentliche Fehlanlüsse zu vermeiden.

Praktisch: Der integrierte 1,5-l-Behälter bietet ein praktisches offenes System mit einer eingebauten Aufhängung und einem Schraubverschluss. Die breite obere Füllöffnung ermöglicht das Befüllen des Beutels mit Nahrung oder Wasser, ohne das Ernährungsprogramm zu unterbrechen oder den Behälter aus der Aufhängung zu entnehmen.

Sichere Materialien: Der Flexibaggle[®] 1,5-l-Behälter besteht aus Ethylen-Vinylacetat (EVA), einem weichen und lebensmittelfreundlichen Material. Das Compat[®] Gravity Combiset 1,5 l ist steril, DEHP-, BPA- und Latex-frei*.

Kompatibilität:

- Enterale Ernährungssonden: ENFit[®]
- Spritzen: ENFit[®]

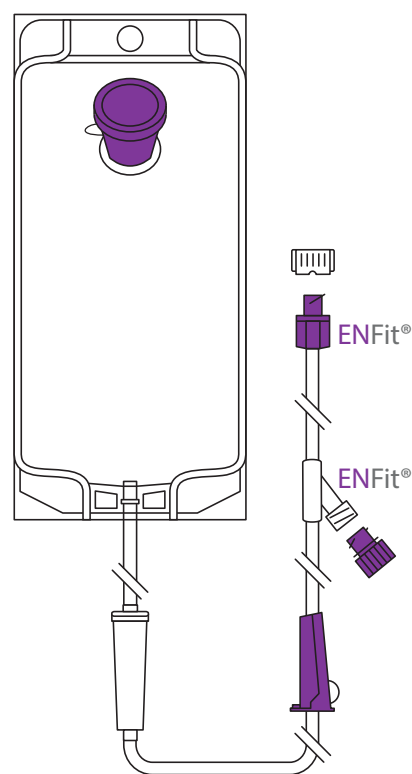


Bestellinformationen

Produktbezeichnung	Artikelnummer	Menge/Karton
Compat [®] Gravity Combiset 1,5 l	12298204	30

Patientenversorgung. Unsere Priorität.

Compat® Gravity Combiset 1,5 l

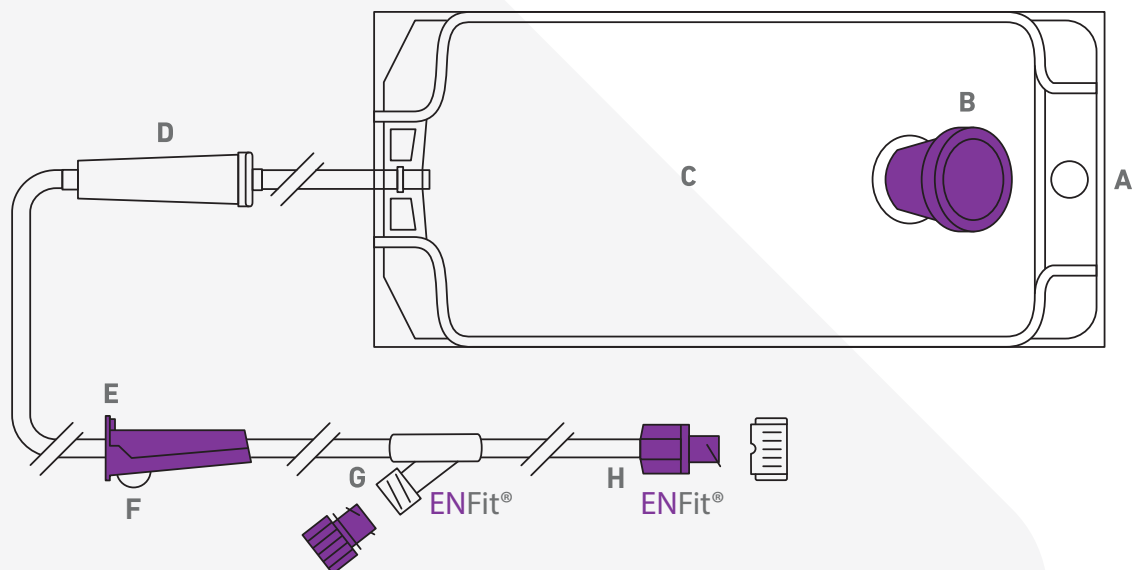

Komponenten

- A Eingebaute Aufhängung
- B Breite obere Füllöffnung mit Schraubverschluss
- C Flexibaggle® 1,5-l-Behälter aus EVA mit Graduierungen (bei 50 und 100 ml) und Markierungen für Patientenname und weitere wichtige Informationen (Formel, Flussrate und Datum)
- D Tropfkammer
- E Integrierte Aufhängung, um das distale Ende des Überleitsets vor Schmutz zu schützen
- F Rollklemme zur manuellen Ausschalten oder Einstellen der Flussrate
- G ENFit® Y-Medikamentenport mit Verschlusskappe
- H ENFit® Distales Ende mit Verschlusskappe (patientenseitiger Sondenanschluss)

Technische Daten

Steril:	Mit Ethylenoxid (EO) sterilisiert.
Verpackung:	Einzelverpackt in Kartons zu je 30 Stück (58,5 x 38,5 x 19 cm).
Lagerung:	Bei Raumtemperatur lagern. Vor direkter Sonneneinstrahlung und Luftfeuchtigkeit schützen.
Haltbarkeit:	3 Jahre ab Herstellungsdatum. Verfallsdatum auf der Verpackung.
Dauer der Anwendung:	24 Stunden. Zum Einmalgebrauch.
Sondenlänge:	Abstand zwischen Beutel und patientenseitigem Sondenanschluss: 180 cm.
Durchmesser der Sonde:	Nenn-Innendurchmesser: 4,0 mm. Nenn-Außendurchmesser: 5,4 mm.
ISO-Norm:	ENFit® Konnektor nach ISO 80369-3.
CE-Kennzeichnung:	Entspricht den Anforderungen der Europäischen Richtlinie 93/42/EWG über Medizinprodukte. Eine CE-Zertifizierung wurde von einer akkreditierten benannten Stelle ausgestellt: TÜV SÜD (CE 0123).
Klassifizierung:	Klasse Is.
Rechtmäßiger Hersteller:	Cedic Srl, Via Liberazione 63/9, IT-20068 Peschiera Borromeo (MI).
Nachhaltigkeit:	Das Umweltmanagementsystem entspricht ISO 14001:2015.
Materialien:	Schlauchsystem: PVC. Alle Materialien sind DEHP-, BPA- und latex-frei*. Weitere Einzelheiten auf Anfrage.
Herkunftsland:	Hergestellt in Italien.

*DEHP und BPA werden während des Herstellungsprozesses nicht absichtlich zugesetzt. Enthält kein Naturkautschuklatex.
Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Compat® Vertriebsvertreter oder auf der Webseite unter www.compat.com
*Sofern nicht anders angegeben, werden alle Markenzeichen mit Zustimmung verwendet.

AXI00034 REV.0 17. JUNI 2021

Compat®