

Compat[®] Gravity

Compat[®] Gravity Combiset 1,5 L

Compat[®] Gravity Combiset 1,5 L är avsett för administrering av enteral näring, vätskor eller läkemedel, och är lämpligt för gravitationsmatning.

Egenskaper i Korthet

Compat[®] Gravity Combiset 1,5 L har en integrerad 1,5 L Flexibaggle[®]-behållare, en droppkammare, en ENFit[®] Y-läkemedelsport och en ENFit[®] distal ände.


Patientsäkerhet: Compat[®] Gravity Combiset 1,5 L är försett med ENFit[®]-kopplingar tillverkade enligt ISO 80369-3. ENFit[®]-kopplingarna är IV-inkompatibla för att [främja patientsäkerheten](#), genom att förhindra oavsiktliga felkopplingar.

Fördelar: Den integrerade 1,5 L behållaren erbjuder ett smidigt öppet system med inbyggd hängare och skruvlock. Den stora toppfyllningsöppningen gör det möjligt att fylla på behållaren med näring eller vatten utan att matningsprogrammet behöver stoppas, eller att behållaren behöver avlägsnas från hängaren.

Säkra Material: Flexibaggle[®] 1,5 L behållare är tillverkad av etylenvinylacetat (EVA), ett mjukt material som är kompatibelt med livsmedel. Compat[®] Gravity Combiset 1,5 L är [sterilt och fritt från DEHP, BPA och latex](#)*.

Kompatibilitet:

- Enterala matningssonder: ENFit[®]
- Sprutor: ENFit[®]

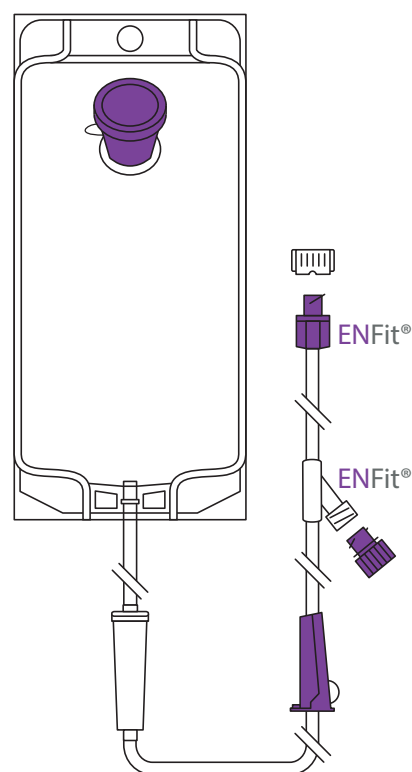


Beställningsinformation

Produktnamn	Produktkod	Kvantitet/ Förpackning
Compat [®] Gravity Combiset 1,5 L	12298204	30

Patientvård. Vår Prioritet.

Compat® Gravity Combiset 1,5 L

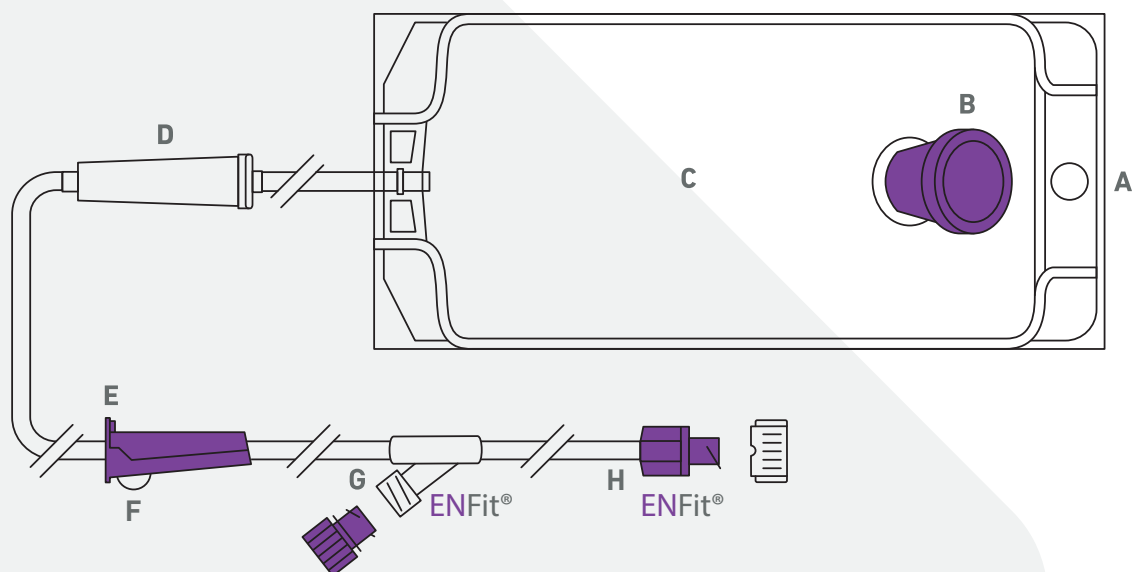

Komponenter

- A Inbyggd hängare
- B Stor toppfyllningsöppning med skruvlock
- C Flexibaggle® 1,5 L behållare tillverkad i etylenvinylacetat med graderingar (vid 50 ml och varje 100 ml) och märkningar för patientnamn och annan viktig information (formula, volym, datum och frekvens)
- D Droppkammare
- E Inbyggd hängare för att hålla aggregatets distala ände fri från smuts
- F Rullklämma för att manuellt stänga av eller justera flödes hastigheten
- G ENFit® Y-läkemedelsport med lock
- H ENFit® distal ände med lock (sondkoppling på patientsidan)

Specifikationer

Steril:	Steriliserad med etylenoxid (EO).
Förpackning:	Individuellt förpackad i kartong med 30 stycken (58,5 x 38,5 x 19 cm).
Förvaring:	Rumstemperatur. Skyddas från direkt solljus och fukt.
Hållbarhetstid:	3 år från tillverkningsdatum. Utgångsdatum finns på förpackningen.
Användningstid:	24 timmar. För engångsbruk.
Sondlängd:	Avstånd från behållare till sondkoppling på patientsidan: 180 cm.
Sonddiameter:	Nominell innerdiameter: 4,0 mm. Nominell ytterdiameter: 5,4 mm.
ISO-standard:	ENFit®-kopplingar är tillverkade i enlighet med ISO 80369-3.
CE-märkning:	Överensstämmer med direktiv 93/42/EEG om medicintekniska produkter. CE-certifiering har utfärdats av ett ackrediterat anmält organ: TÜV SÜD (CE0123).
Klassificering:	Klass Is.
Juridisk tillverkare:	Cedic Srl, Via Liberazione 63/9, IT-20068 Peschiera Borromeo (MI).
Hållbarhet:	Miljöledningssystemet uppfyller ISO 14001:2015.
Material:	Sond: PVC. Alla material är fria från DEHP, BPA och latex*. Ytterligare information ges på begäran.
Ursprungsland:	Tillverkad i Italien.

*Inget DEHP och BPA tillsätts avsiktligt under tillverkningsprocessen. Naturgummilatex tillsätts inte.

För ytterligare information kontakta din Compat®-representant eller besöka www.compat.com

*Alla varumärken används med tillstånd, om inte annat anges.

AXI00034 REV.0 22 SEPTEMBER 2022

Compat®