

Compat[®] Gravity

Compat[®] Gravity Spike Set

Compat[®] Gravity Spike Set är avsett för administrering av enteral näring, vätskor eller läkemedel, och är lämpligt för gravitationsmatning.

Egenskaper i Korthet


Compat[®] Gravity Spike Set är utrustat med en ENPlus näringskoppling, en droppkammare, en rullklämma, en ENFit[®] Y-läkemedelsport och en ENFit[®] distal ände.

Patientsäkerhet: Compat[®] Gravity Spike Set har ENFit[®]-kopplingar tillverkade enligt ISO 80369-3 och ENPlus-kopplingar tillverkade enligt ISO 18250-3. ENFit[®]- och ENPlus-kopplingarna är IV-inkompatibla för att **främja patientsäkerheten**, genom att förhindra oavsiktliga felkopplingar.

Säkra Material: Compat[®] Gravity Spike Set är **sterilt och fritt från DEHP, BPA och latex***.

Kompatibilitet:

- Näringsbehållare: ENPlus
- Enterala matningssonder: ENFit[®]
- Sprutor: ENFit[®]

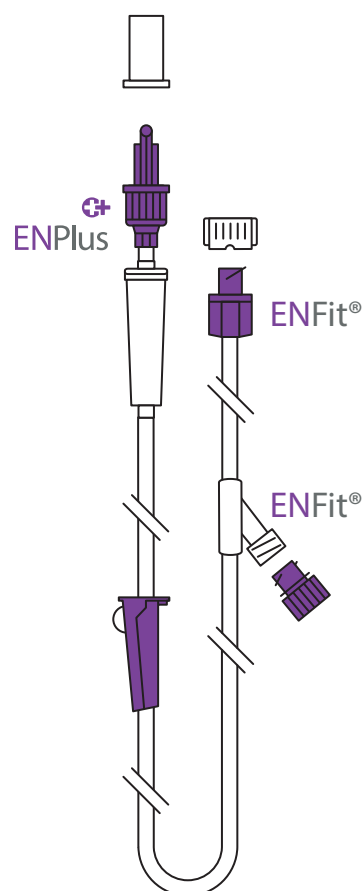


Beställningsinformation

Produktnamn	Produktkod	Kvantitet/ Förpackning
Compat [®] Gravity Spike Set	12298205	30

Patientvård. Vår Prioritet.

Compat® Gravity Spike Set

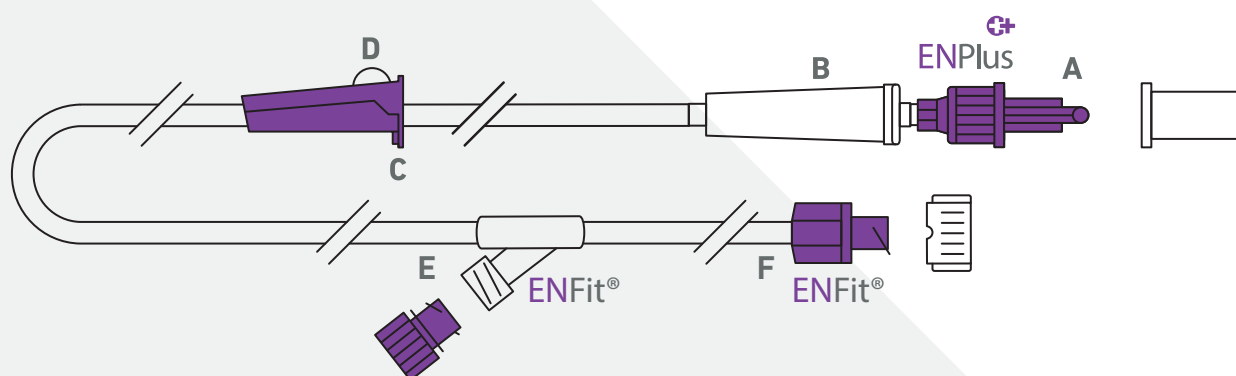

Komponenter

- A ENPlus "endast enteral" proximal ände (näringsskoppling) med vridbart lås och lock
- B Droppkammare
- C Inbyggd hängare för att hålla aggregatets distala ände fri från smuts
- D Rullklämma för att stänga av eller justera flödes hastigheten
- E ENFit® Y-läkemedelsport med lock
- F ENFit® distal ände med lock (sondkoppling på patientsidan)

Specifikationer

Steril:	Steriliserad med etylenoxid (EO).
Förpackning:	Individuellt förpackad i kartong med 30 stycken (29,5 x 26 x 22 cm).
Förvaring:	Rumstemperatur. Skyddas från direkt solljus och fukt.
Hållbarhetstid:	3 år från tillverkningsdatum. Utgångsdatum finns på förpackningen.
Användningstid:	24 timmar. För engångsbruk.
Sondlängd:	Avstånd från näringsskoppling till sondkoppling på patientsidan: 180 cm.
Sonddiameter:	Nominell innerdiameter: 4,0 mm. Nominell ytterdiameter: 5,4 mm.
ISO-standard:	ENFit®-koppling tillverkad enligt ISO 80369-3 och ENPlus-koppling tillverkad enligt ISO 18250-3.
CE-märkning:	Överensstämmer med direktiv 93/42/EEG om medicintekniska produkter. CE-certifiering har utfärdats av ett ackrediterat anmält organ: TÜV SÜD (CE0123).
Klassificering:	Klass Is.
Juridisk tillverkare:	Cedic Srl, Via Liberazione 63/9, IT-20068 Peschiera Borromeo (MI).
Hållbarhet:	Miljöledningssystemet uppfyller ISO 14001:2015.
Material:	Sond: PVC. Alla material är fria från DEHP, BPA och latex*. Ytterligare information ges på begäran.
Ursprungsland:	Tillverkad i Italien.

*Inget DEHP och BPA tillsätts avsiktligt under tillverkningsprocessen. Naturgummilates tillsätts inte.

För ytterligare information kontakta din Compat®-representant eller besök www.compat.com

*Alla varumärken används med tillstånd, om inte annat anges.

AXI00035 REV.0 22 SEPTEMBER 2022

Compat®