

Compat[®] Gravity

Compat[®] Gravity Universal Set

Das Compat[®] Gravity Universal Set ist für die enterale Verabreichung von Nahrung, Flüssigkeiten oder Arzneimitteln bestimmt und ist für eine Schwerkraftapplikation geeignet.

Funktionen auf einen Blick


Das Compat[®] Gravity Universal Set umfasst einen ENPlus Ernährungskonnektor, einen Universal-Schraubverschluss mit Luftfilter, eine Tropfkammer, eine Rollklemme, einen ENFit[®] Y-Medikamentenport und ein ENFit[®] distales Ende. Ein separater Flaschenaufhänger ist ebenfalls enthalten.

Patientensicherheit: Das Compat[®] Gravity Universal Set umfasst ENFit[®] Konnektoren nach ISO 80369-3 und ENPlus-Konnektoren nach ISO 18250-3. ENFit[®] und ENPlus-Konnektoren sind mit intravenösen Infusionssets nicht kompatibel, um **die Patientensicherheit zu erhöhen**, und dabei zu helfen, versehentliche Fehlanlüsse zu vermeiden.

Sichere Materialien: Das Compat[®] Gravity Universal Set ist steril, DEHP-, BPA- und Latex-frei*.

Kompatibilität:

- Nahrungsbehälter: ENPlus, Glas- und Kunststoff-Weithalsbehälter, Glasflaschen mit Kronkorken
- Enterale Ernährungssonden: ENFit[®]
- Spritzen: ENFit[®]

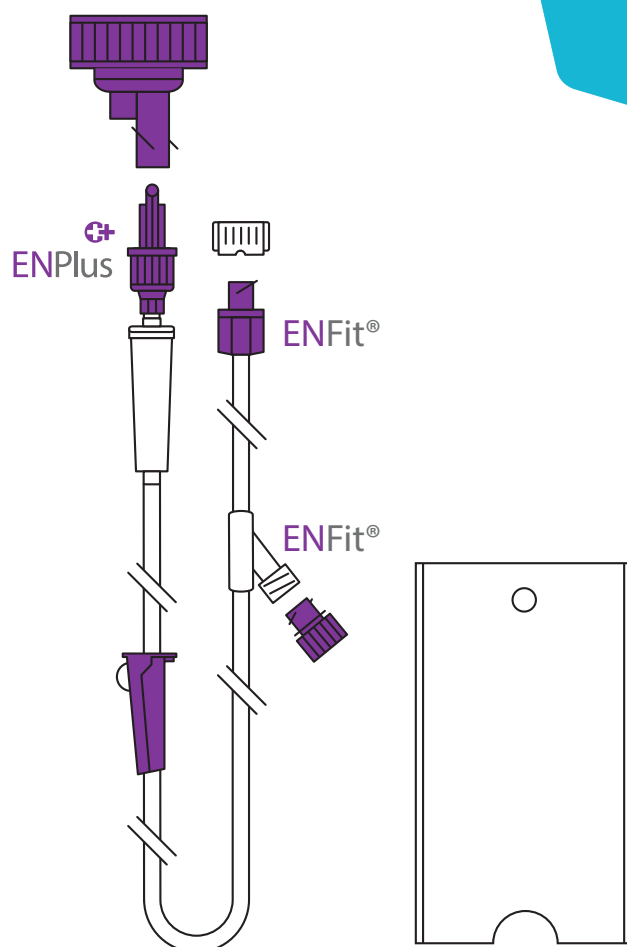


Bestellinformationen

Produktbezeichnung	Artikelnummer	Menge/Karton
Compat [®] Gravity Universal Set	12298230	30

Patientenversorgung. Unsere Priorität.

Compat® Gravity Universal Set

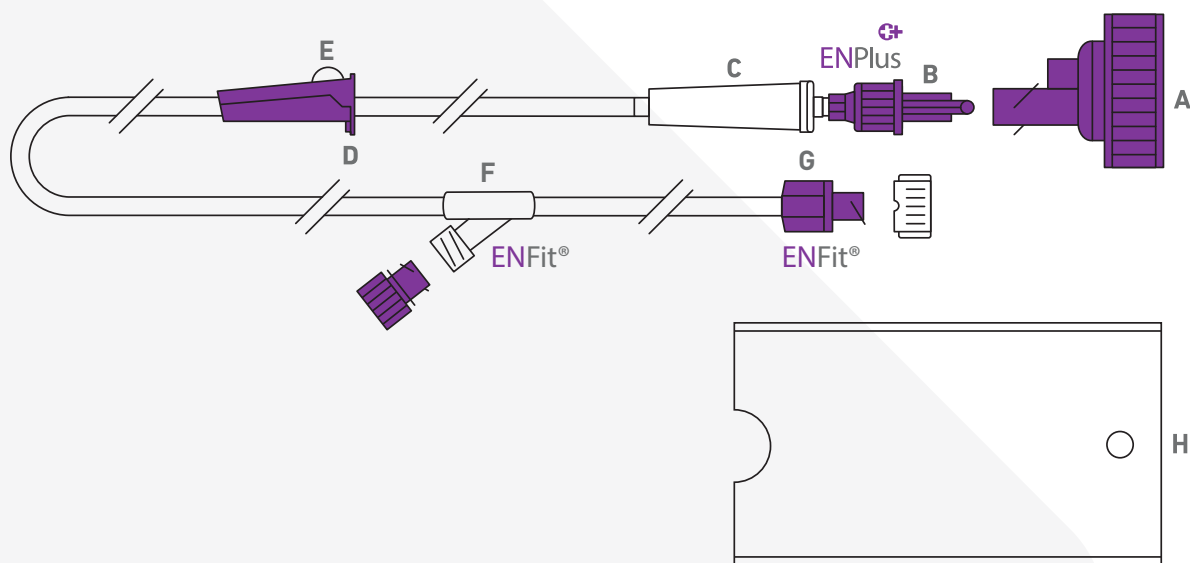

Komponenten

- A** Universal-Schraubverschluss mit Luftfilter und ENPlus-Konnektor passend für Glas- und Kunststoff-Weit-halsbehälter Ø 40 mm (DIN 168-1) oder Glasflaschen mit Kronkorken (EN 14634 und EN 14635)
- B** ENPlus ‚nur enteraler‘ Konnektor mit proximalem Ende (Ernährungskonnektor) mit Drehverschluss
- C** Tropfkammer
- D** Integrierte Aufhängung, um das distale Ende des Überleitsets vor Schmutz zu schützen
- E** Rollklemme zum Abklemmen oder Einstellen der Flussrate
- F** ENFit® Y-Medikamentenport mit Verschlusskappe
- G** ENFit® Distales Ende mit Verschlusskappe (patientenseitiger Sondenanschluss)
- H** 500 ml Flaschenhalter aus LDPE (Polyethylen niedriger Dichte)

Technische Daten

Steril:	Mit Ethylenoxid (EO) sterilisiert.
Verpackung:	Einzeln verpackt in Kartons zu je 30 Stück (39 x 39 x 13 cm).
Lagerung:	Bei Raumtemperatur lagern. Vor direkter Sonneneinstrahlung und Luftfeuchtigkeit schützen.
Haltbarkeit:	3 Jahre ab Herstellungsdatum. Verfallsdatum auf der Verpackung.
Dauer der Anwendung:	24 Stunden. Zum Einmalgebrauch.
Sondenlänge:	Abstand vom Ernährungskonnektor zum patientenseitigen Sondenanschluss: 180 cm.
Durchmesser der Sonde:	Nenn-Innendurchmesser: 4,0 mm. Nenn-Außendurchmesser: 5,4 mm.
ISO-Norm:	ENFit® Konnektor nach ISO 80369-3 und ENPlus-Konnektor nach ISO 18250-3.
CE-Kennzeichnung:	Entspricht den Anforderungen der Europäischen Richtlinie 93/42/EWG über Medizinprodukte. Eine CE-Zertifizierung wurde von einer akkreditierten benannten Stelle ausgestellt: TÜV SÜD (CE 0123).
Klassifizierung:	Klasse Is.
Rechtmäßiger Hersteller:	Cedic Srl, Via Liberazione 63/9, IT-20068 Peschiera Borromeo (MI).
Nachhaltigkeit:	Das Umweltmanagementsystem entspricht ISO 14001:2015.
Materialien:	Schlauchsystem: PVC. Alle Materialien sind DEHP-, BPA- und Latex-frei*. Weitere Einzelheiten auf Anfrage.
Herkunftsland:	Hergestellt in Italien.

*DEHP und BPA werden während des Herstellungsprozesses nicht absichtlich zugesetzt. Enthält kein Naturkautschuklatex. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Compat® Vertriebsvertreter oder auf der Webseite unter www.compat.com
*Sofern nicht anders angegeben, werden alle Markenzeichen mit Zustimmung verwendet.

AXI00036 REV.0 17. JUNI 2021

Compat®