

Compat[®] Gravity

Compat[®] Gravity Universal Set

Compat[®] är avsett för administrering av enteral näring, vätskor eller läkemedel, och är lämpligt för gravitationsmatning.

Egenskaper i Korthet


Compat[®] Gravity Universal Set har en ENPlus näringsskoppling, ett universalskruvlock med luftfilter, en droppkammare, en rullklämma, en ENFit[®] Y-läkemedelsport och en ENFit[®] distal ände. En separat flaskhängare ingår.

Patientsäkerhet: Compat[®] Gravity Universal Set har ENFit[®]-kopplingar tillverkade enligt ISO 80369-3 och ENPlus-kopplingar tillverkade enligt ISO 18250-3. ENFit[®]- och ENPlus-kopplingarna är IV-inkompatibla för att **främja patientsäkerheten**, genom att förhindra oavsiktliga felkopplingar.

Säkra Material: Compat[®] Gravity Universal Set är **sterilt** och fritt från DEHP, BPA och latex*.

Kompatibilitet:

- Näringsbehållare: ENPlus, glas- och plastbehållare med vid hals, glasflaskor med kronkork
- Enterala matningssonder: ENFit[®]
- Sprutor: ENFit[®]

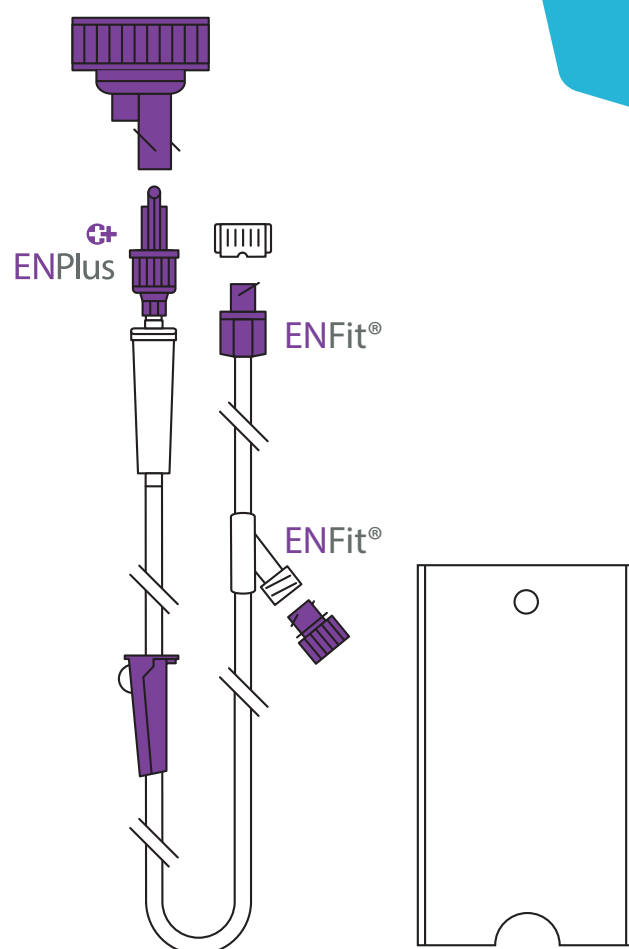


Beställningsinformation

Produktnamn	Produktkod	Kvantitet/ Förpackning
Compat [®] Gravity Universal Set	12298230	30

Patientvård. Vår Prioritet.

Compat® Gravity Universal Set

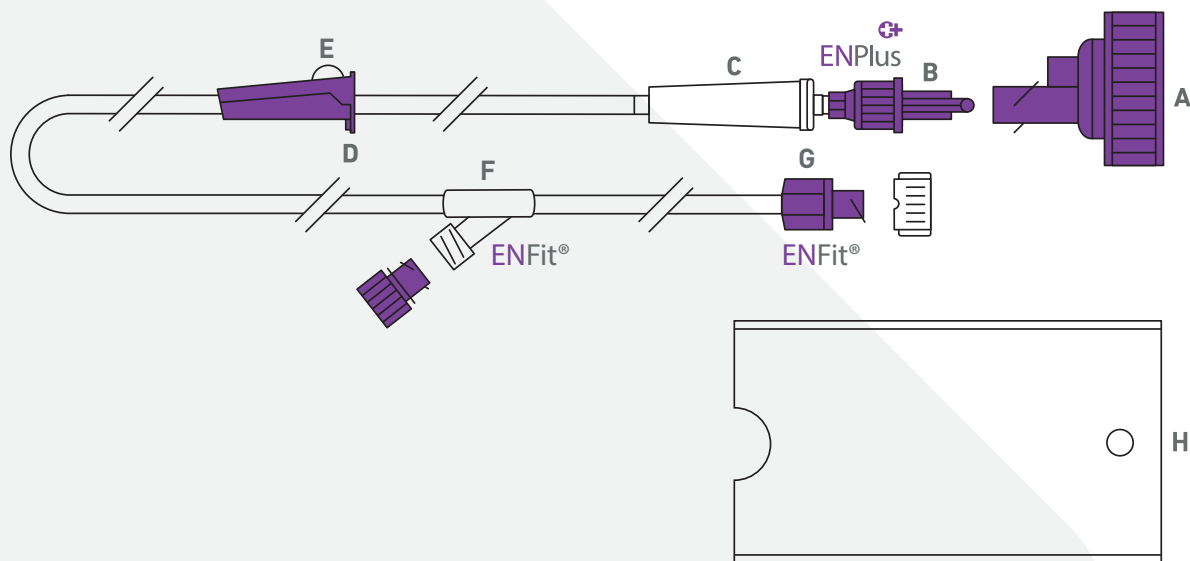

Komponenter

- A Universalskruvlock med luftfilter och ENPlus-port som är kompatibel med Ø40 mm glas- och plastbehållare med vid hals (DIN 168-1), eller glasflaskor med kronkork (EN 14634 och EN 14635)
- B ENPlus "endast enteral" proximal ände (näringsskoppling) med vridbart lås
- C Droppkammare
- D Inbyggd hängare för att hålla aggregatets distala ände fri från smuts
- E Rullklämma för att stänga av eller justera flödes hastigheten
- F ENFit® Y-läkemedelsport med lock
- G ENFit® distal ände med lock (sondkoppling på patientsidan)
- H 500 ml flaskhållare LDPE (låg densitetspolyeten)

Specifikationer

Steril:	Steriliserad med etylenoxid (EO).
Förpackning:	Individuellt förpackad i kartong med 30 stycken (39 x 39 x 13 cm).
Förvaring:	Rumstemperatur. Skyddas från direkt solljus och fukt.
Hållbarhetstid:	3 år från tillverkningsdatum. Utgångsdatum finns på förpackningen.
Användningstid:	24 timmar. För engångsbruk.
Sondlängd:	Avstånd från näringsskoppling till sondkoppling på patientsidan: 180 cm.
Sonddiameter:	Nominell innerdiameter: 4,0 mm. Nominell ytterdiameter: 5,4 mm.
ISO-standard:	ENFit®-koppling tillverkad enligt ISO 80369-3 och ENPlus-koppling tillverkad enligt ISO 18250-3.
CE-märkning:	Överensstämmer med direktiv 93/42/EEG om medicintekniska produkter. CE-certifiering har utfärdats av ett ackrediterat anmält organ: TÜV SÜD (CE0123).
Klassificering:	Klass Is.
Juridisk tillverkare:	Cedic Srl, Via Liberazione 63/9, IT-20068 Peschiera Borromeo (MI).
Hållbarhet:	Miljöledningssystemet uppfyller ISO 14001:2015.
Material:	Sond: PVC. Alla material är fria från DEHP, BPA och latex*. Ytterligare information ges på begäran.
Ursprungsland:	Tillverkad i Italien.

*Inget DEHP och BPA tillsätts avsiktligt under tillverkningsprocessen. Naturgummilatex tillsätts inte.

För ytterligare information kontakta din Compat®-representant eller besök www.compat.com

*Alla varumärken används med tillstånd, om inte annat anges.

AXI00036 REV.0 22 SEPTEMBER 2022

Compat®