

Compat® Modum

Accessorio per l'Aspirazione e la Misurazione dei Residui Gastrici a Circuito Chiuso

Compat® Modum è un accessorio progettato per l'aspirazione a circuito chiuso dei residui gastrici e l'eventuale reintroduzione degli stessi nello stomaco del paziente, se utilizzato insieme a tubi, siringhe e sacche di raccolta appropriati. Adatto anche per la nutrizione enterale e la somministrazione di medicinali.

Panoramica delle Caratteristiche

Compat® Modum è un accessorio che si posiziona tra la sonda per nutrizione e il set di somministrazione per **facilitare l'aspirazione dei liquidi gastrici e la misurazione del VGR***.


Facilità di Utilizzo:

- Compat® Modum consente l'aspirazione a **circuito chiuso** dei residui gastrici all'interno di una sacca di raccolta del drenaggio, **riducendo così l'esposizione ai liquidi gastrici e al loro odore, nonché il rischio di contaminazione**.
- L'accessorio dispone di due rubinetti a 3 vie che consentono di **selezionare la direzione del flusso**, per passare facilmente dallo svuotamento gastrico alla nutrizione enterale o alla somministrazione di medicinali.
- È **compatibile** con la maggior parte delle sonde per nutrizione enterale, dei dispositivi di somministrazione di medicinali e dei dispositivi di drenaggio/aspirazione**.

Materiali Sicuri: Compat® Modum è **sterile e privo di DEHP, BPA e lattice*****.

Compatibilità:

- Set di somministrazione: ENFit®
- Sonde per nutrizione enterale: ENFit® ed ENLock
- Siringhe: ENFit®, ENLock e Luer
- Dispositivi di drenaggio/aspirazione: connettore a imbuto**

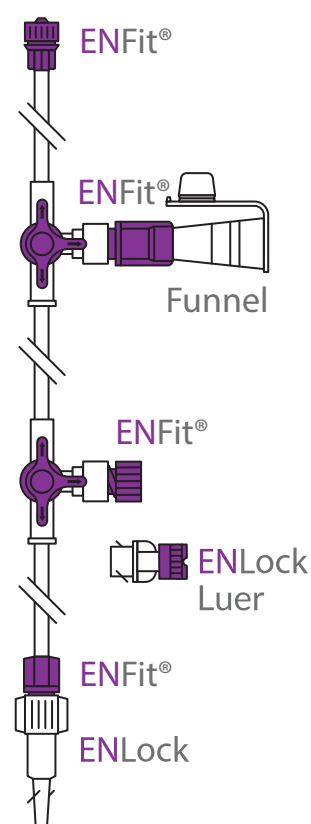


Informazioni per Gli Ordini

Nome prodotto	Codice prodotto	N. pezzi/conf.
Compat® Modum	12340186	50

La Cura del Paziente. La Nostra Priorità.

Accessorio per l'Aspirazione e la Misurazione dei Residui Gastrici a Circuito Chiuso

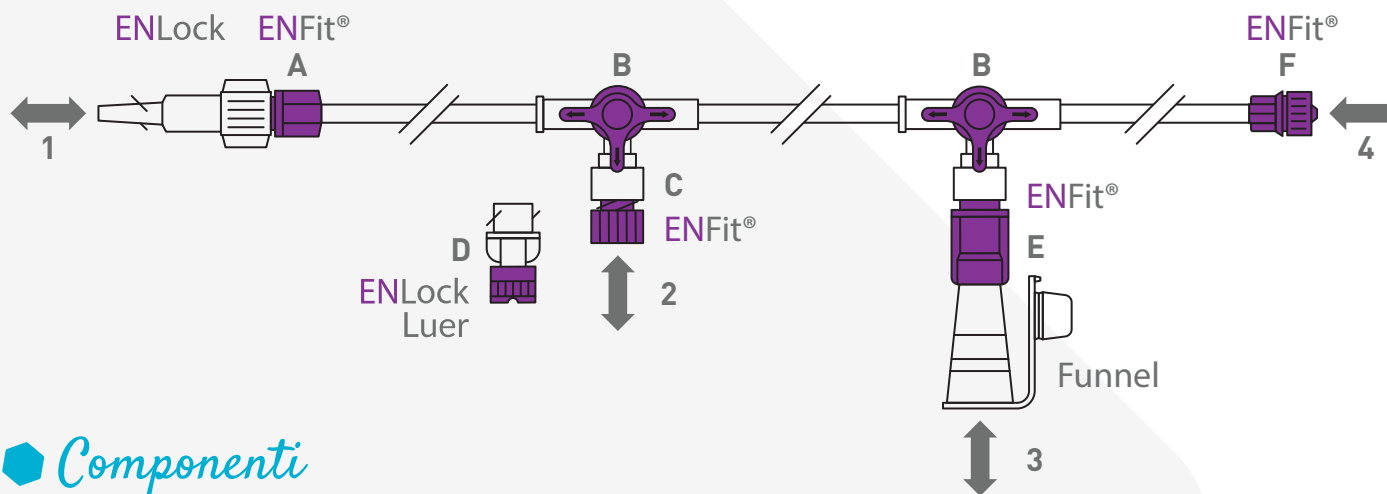

Componenti

- A** Estremità distale con connettore ENFit® femmina dotato di adattatore ENLock rimovibile
- B** Rubinetti a 3 vie ENFit® per selezionare la direzione del flusso
- C** Porta maschio ENFit®, per siringa di drenaggio/somministrazione di medicinali, provvista di tappo
- D** Adattatore ENFit® con tappo compatibile con dispositivi di somministrazione di medicinali/siringhe di drenaggio Luer, Oral ed ENLock
- E** Connettore a imbuto con tappo compatibile con la maggior parte dei dispositivi di drenaggio/aspirazione**
- F** Connettore prossimale ENFit® maschio per collegamento al set di somministrazione

Direzioni Possibili del Flusso

- 1** Verso/da sonda per nutrizione (collegamento lato paziente)
- 2** Verso/da siringa di drenaggio / Da dispositivo di somministrazione di medicinali
- 3** Verso/da dispositivi di drenaggio/aspirazione
- 4** Da set di somministrazione (collegamento lato nutrizione)

Specifiche

Sterile:	Sterilizzato con ossido di etilene (EO).
Lunghezza:	12 cm.
Confezionamento:	Confezionato singolarmente in scatole da 50 pezzi (295 × 260 × 190 mm).
Conservazione:	Conservare all'asciutto a temperatura ambiente e al riparo dalla luce solare.
Durata:	Fino a 3 anni dalla data di produzione. Data di scadenza indicata sulla confezione.
Durata di impiego:	Fino a 7 giorni. Monouso.
Standard ISO:	Connettore ENFit® conforme allo standard ISO 80369-3.
Marchio CE:	Conforme al regolamento europeo sui dispositivi medici 2017/745 (MDR). Certificazione CE rilasciata da un organismo notificato accreditato: TÜV SÜD (CE0123).
Classificazione:	Classe IIa.
Fabbricante legale:	Cedic Srl, Via Liberazione 63/9, IT-20068 Peschiera Borromeo (MI).
Sostenibilità:	Sistema di gestione ambientale conforme a ISO 14001.
Materiali:	Tubi in PVC. Tutti i materiali utilizzati sono privi di DEHP, BPA e lattice***.
Paese di origine:	Prodotto in Italia.

*VGR: volume gastrico residuo.

**Non sono escluse alcune incompatibilità.

***Non vengono intenzionalmente aggiunti DEHP e BPA durante il processo di fabbricazione. Non formulato con lattice di gomma naturale.

Questo documento non sostituisce le istruzioni per l'uso originali che devono essere lette prima dell'uso. Per richiedere maggiori informazioni, contattare il rappresentante Compat® di fiducia o visitare il sito www.compat.com

® Se non diversamente specificato, tutti i marchi commerciali sono stati utilizzati previa autorizzazione.

AXI00037 REV.1 18 MARZO 2026

Compat®