

Compat[®] Modum

Acessório para a Aspiração e Medição de Resíduos Gástricos em Sistema Fechado

Compat[®] Modum é destinado ao uso como acessório para permitir a aspiração de resíduos gástricos em sistema fechado e a possível reintrodução do fluxo para o estômago do paciente, quando usado em conjunto com sondas, seringas e bolsas de coleta apropriadas. Também se destina ao uso para nutrição enteral e administração de medicação.

Características Principais

Compat[®] Modum é um acessório posicionado entre a sonda de nutrição e o conjunto de administração para **facilitar a aspiração do fluido gástrico e a medição do VRG***.


Facilidade de Uso:

- Compat[®] Modum permite a aspiração de resíduos gástricos em **sistema fechado** para uma bolsa de drenagem, **reduzindo a exposição aos fluidos gástricos e seu cheiro e diminuindo o risco de contaminação**.
- Possui dois conectores de 3 vias que permitem **selecionar o percurso do fluxo** para passar facilmente de esvaziamento gástrico a nutrição enteral ou administração de medicação.
- É **compatível** com a maioria das sondas de nutrição enteral, dosadores de medicação e dispositivos de drenagem/aspiração**.

Materiais Seguros: Compat[®] Modum é **estéril e isento de DEHP, BPA e Látex*****.

Compatibilidade:

- Conjuntos de administração: ENFit[®]
- Sondas de nutrição enteral: ENFit[®] e ENLock
- Seringas: ENFit[®], ENLock e Luer
- Dispositivos de drenagem/aspiração: com conector cônico**

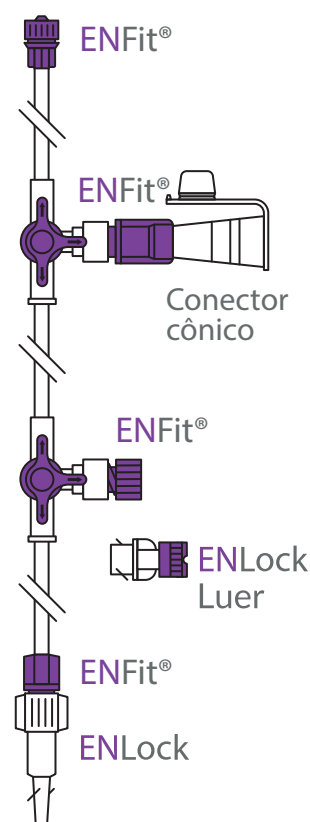


Informações para Pedido

Nome do Produto	Código do Produto	Qtd./Caixa
Compat [®] Modum	12340186	50

Cuidados com o Paciente. Nossa Prioridade.

Acessório para a Aspiração e Medição de Resíduos Gástricos em Sistema Fechado

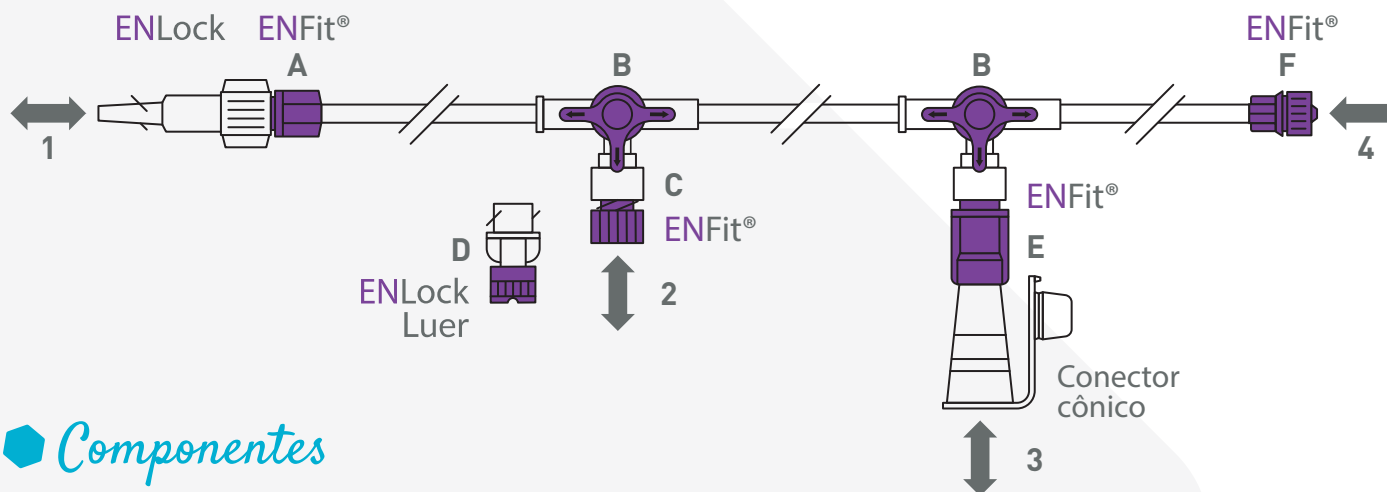

Componentes

- A Extremidade distal ENFit® fêmea com adaptador ENLock removível
- B Conectores de 3 vias ENFit® para escolher o percurso do fluxo
- C Porta de medicação/porta de seringa de drenagem ENFit® macho com tampa
- D Adaptador ENFit® com tampa compatível com dosadores de medicação/seringas de drenagem Luer, Oral e ENLock
- E Conector cônico com tampa projetado para ser compatível com a maioria dos dispositivos de drenagem/aspiração**
- F Conector proximal ENFit® macho para conexão ao conjunto de administração

Percursos do Fluxo

- 1 Para ou da sonda de nutrição (conexão do lado do paciente)
- 2 Para ou da seringa de drenagem/Do dosador de medicação
- 3 Para ou dos dispositivos de drenagem/aspiração
- 4 Do conjunto de administração (conexão do lado da nutrição)

Especificações

Esterilização:	Esterilizado com Óxido de Etileno (EO).
Comprimento:	12 cm.
Embalagem:	Embalado individualmente em caixas de 50 itens (295 x 260 x 190mm).
Armazenamento:	Armazenar em local seco e temperatura ambiente e ao abrigo da luz solar.
Prazo de validade:	Até 3 anos a partir da data de produção. Data de validade indicada na embalagem.
Duração de utilização:	Até 7 dias. Para uso único.
Norma ISO:	Conector ENFit® fabricado de acordo com a norma ISO 80369-3.
Marca CE:	Em conformidade com o Regulamento Europeu 2017/745 sobre dispositivos médicos. Foi emitida uma certificação CE por um Organismo Notificado credenciado: TÜV SÜD (CE0123).
Classificação:	Classe IIa.
Fabricante legal:	Cedic Srl, Via Liberazione 63/9, IT-20068 Peschiera Borromeo (MI), Itália.
Sustentabilidade:	Sistema de gestão ambiental em conformidade com a norma ISO 14001.
Materiais:	Sonda: PVC. Todos os materiais são isentos de DEHP, BPA e látex***.
País de origem:	Fabricado na Itália.

*VRG: Volume Residual Gástrico.

**Podem existir algumas incompatibilidades.

***DEHP e BPA não são adicionados intencionalmente durante o processo de fabricação. Não formulado com látex de borracha natural.

Esse documento não substitui as Instruções de Uso originais que devem ser lidas antes do uso. Para obter mais informações, entre em contato com seu representante da Compat® ou acesse www.compat.com

*Salvo indicação em contrário, todas as marcas registradas são utilizadas com permissão.

AXI00037 REV.1 18 DE MARÇO DE 2026

Compat®