

Compat® Modum

Slutet System för Aspirering av Gastriska Retentioner och Tillbehör för Mätning

Compat® Modum är avsett att användas som tillbehör för att möjliggöra aspirering av gastriska retentioner och återintroduktion i patientens mage i ett slutet system, när det används tillsammans med lämpliga sonder, sprutor och uppsamlingsbehållare. Också avsett för användning vid enteral näringstillförsel och tillförsel av läkemedel.

Egenskaper i Korthet

Compat® Modum är ett tillbehör som placeras mellan matningssonden och aggregatet för att **underlätta aspirering av magvätska och mätning av GRV***.


Lätt att Använda:

- Compat® Modum möjliggör **aspirering av** gastriska retentioner i en uppsamlingsbehållare, **vilket minskar exponering för magvätskor och deras lukt, och minskar risken för kontaminering.**
- Det har 3-vägskopplingar som gör det möjligt att **välja flödesväg**, för att enkelt byta från gastrisk tömning till enteral näringstillförsel eller tillförsel av läkemedel.
- Det är **kompatibelt** med de flesta enterala matningssonder, läkemedelsdispensrar och magsäcksdränage**.

Säkra Material: Compat® Modum är **steril och fri från DEHP, BPA och latex*****.

Kompatibilitet:

- Aggregat: ENFit®
- Enterala matningssonder: ENFit® och ENLock
- Sprutor: ENFit®, ENLock och Luer
- Dräneringsenheter: Konfattning**

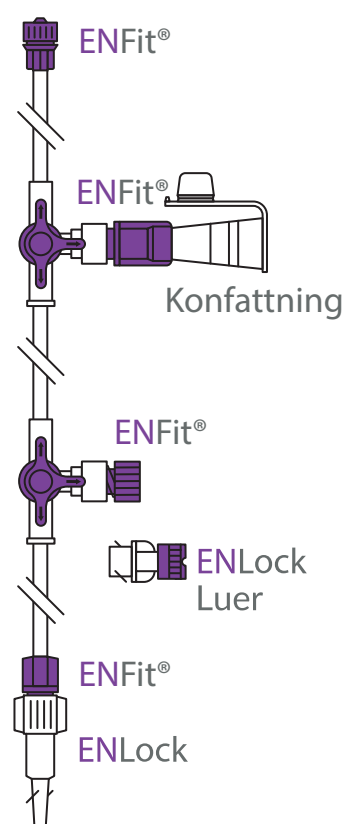


Beställningsinformation

Produktnamn	Produktkod	Kvantitet/ Förpackning
Compat® Modum	12340186	50

Patientvård. Vår Prioritet.

Slutet System för Aspirering av Gastriska Retentioner och Tillbehör för Mätning

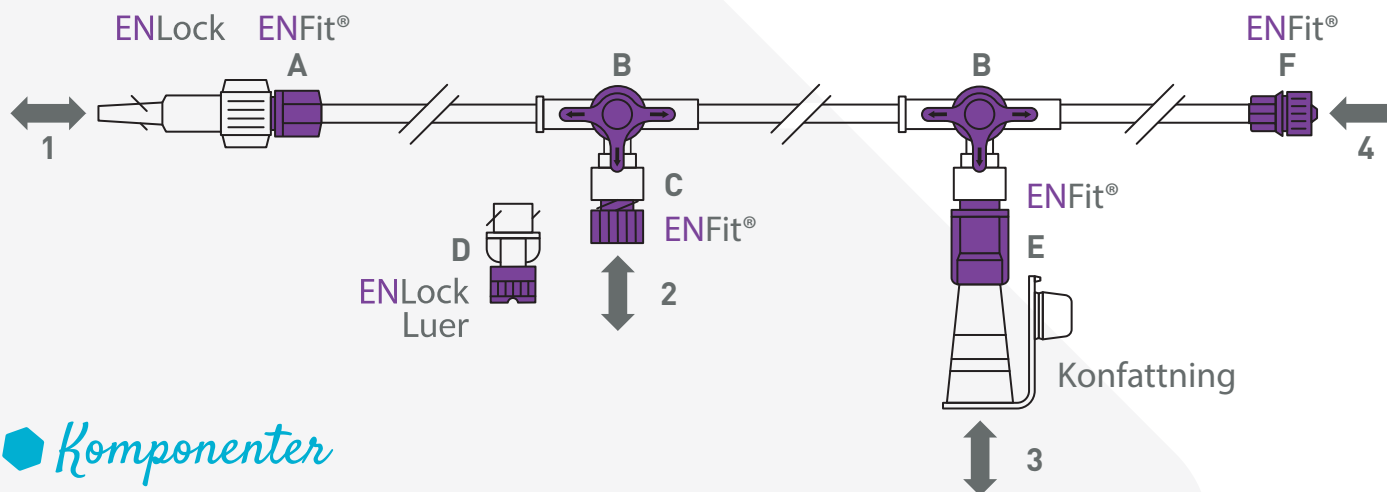

Komponenter

- A ENFit® distal honände med avtagbar ENLock-adapter
- B ENFit® 3-vägskopplingar för att välja flödesväg
- C ENFit®-hankoppling med lock som portar för dräneringssprutor eller läkemedel
- D ENFit®-adapter med lock som är kompatibel med Luer, Oral och ENLock läkemedelsdispensrar och dräneringssprutor
- E Koppling med konfättning och lock kompatibel med de flesta dräneringsenheter**
- F ENFit® proximal hankoppling för anslutning till aggregat

Flödesvägar

- 1 Till eller från matningssonden (koppling på patientsidan)
- 2 Till eller från dräneringsspruta/Från läkemedelsdispenser
- 3 Till eller från dräneringsenheter
- 4 Från aggregat (koppling på näringssidan)

Specifikationer

Steril:	Steriliserad med etylenoxid (EO).
Längd:	12 cm.
Förpackning:	Individuellt förpackad i kartong med 50 stycken (295x260x190 mm).
Förvaring:	Förvaras torrt i rumstemperatur och skyddas från direkt solljus.
Hållbarhetstid:	Upp till 3 år från tillverkningsdatum. Utgångsdatum finns på förpackningen.
Användningstid:	Upp till 7 dagar. För engångsbruk.
ISO-standard:	ENFit®-kopplingar är tillverkade i enlighet med ISO 80369-3.
CE-märkning:	Överensstämmer med förordning 2017/745 om medicintekniska produkter. CE-certifiering har utfärdats av ett ackrediterat anmält organ: TÜV SÜD (CE0123).
Klassificering:	Klass IIa.
Juridisk tillverkare:	Cedic Srl, Via Liberazione 63/9, IT-20068 Peschiera Borromeo (MI).
Hållbarhet:	Miljöledningssystemet uppfyller ISO 14001.
Material:	Sond: PVC. Alla material är fria från DEHP, BPA och latex***.
Ursprungsland:	Tillverkad i Italien.

*GRV: Gastrisk Residualvolym.

**Viss inkompatibilitet kan förekomma.

***Inget DEHP och BPA tillsätts avsiktligt under tillverkningsprocessen. Naturgummilates tillsätts inte.

Detta dokument ersätter inte bruksanvisningen som måste läsas före användning. För ytterligare information kontakta din Compat®-representant eller besök www.compat.com

*Alla varumärken används med tillstånd, om inte annat anges.

AXI00037 REV.1 18 MARS 2026

Compat®