

Compat® StayPut

Jejunal Matningssond med Dubbla Lumen och Integrerat Magsäcksdränage

Compat® StayPut 9/18FR är en "sond-i-sond" jejunal matningssond med dubbla lumen och ENFit®-koppling, samt integrerat magsäcksdränage. Den är avsedd att användas för administration av enteral nutrition, vätskor och/eller läkemedel samt är även avsedd för simultan magsäcksdränage.


Egenskaper i Korthet

Läkares Preferens: Compat® StayPut 9/18FR är utformad för placeringstekniker med direkt visualisering (dvs. endoskopi eller interventionell radiologi) och **faciliterad endoskopisk manipulation**.

Hjälp vid Placering: Den 18FR dräneringssonden har markeringar för placeringsdjup var femte centimeter för bedömning av placeringsdjup och kontroll av sondmigration. Båda sonderna är röntgentäta och har en mycket röntgentät spets som gör det **lättare att bekräfta korrekt placering**. En förmonterad genomflödesledare för 9 FR-sonden ingår som **stöd vid placering**. Ledaren är smord vilket kan **minska risken för att sonden rubbas** när ledaren avlägsnas.

Patientsäkerhet: Den jejunala matningssonden är kompatibel med alla aggregat och sprutor med ENFit®-kopplingar. ENFit®-kopplingar är utformade för att vara IV-inkompatibla för att främja **patientsäkerhet**, genom att förhindra oavsiktliga felkopplingar.

Koppling med konfattning på den gastriska sugsonden är kompatibel med de flesta sugenheter*.

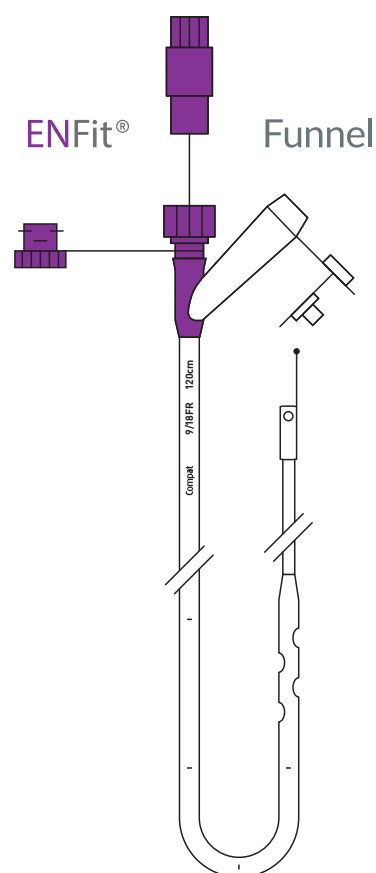


Beställningsinformation

Produktnamn	Produktkod	Storlek/Längd	Mandräng	Steril	Kvantitet/ Förpackning
Compat® StayPut 9/18FR 165/120 cm	12380234	Jejunal Matningssond: 9FR 165 cm	Ja	Ja	1
		Gastrisk Sugsond: 18FR 120 cm			

Patientvård. Vår Prioritet.


Jejunal Matningssond med Dubbla Lumen och Integrerat Magsäcksdränage

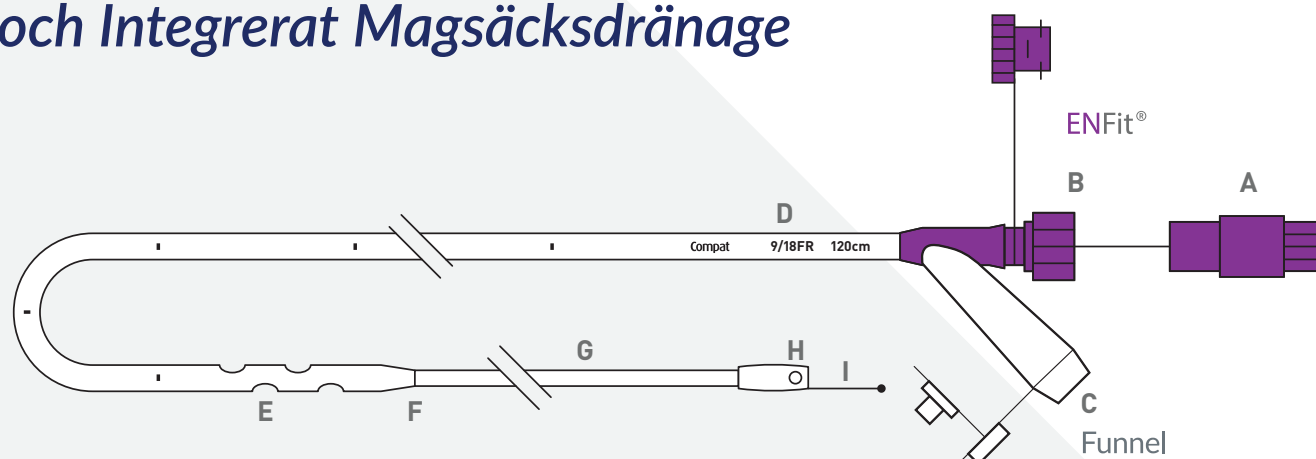

Komponenter

Gastrisk sond	A	ENFit® försmord och öppen genomflödesledare
	B	ENFit® näringskoppling med vridlås och lock
Jejunal sond	C	Koppling med konfattning och lock kompatibel med de flesta dräneringsenheter*
	D	18FR/120 cm röntgentätt magsäcksdränage med markeringar för placeringsdjup var femte centimeter
	E	Fyra dräneringshål i sondens sidovägg i enlighet med Compat Soft® (två på varje sida)
	F	Mycket röntgentät spets
	G	9FR/165 cm röntgentät jejunal matningssond
	H	Mycket röntgentät spets med två laterala utgångar för näring och öppen distal ände för placering med hjälp av en ledare (ledaren ingår inte)
	I	Antennspets för att underlätta endoskopisk manipulation

Specifikationer

Sondens mått:	Gastric 18FR/120 cm Ø6,0/4,8 mm		Jejunal 9FR/165 cm Ø3,0/2,2 mm
Steril:	Steriliserad med etylenoxid (EO).		
Förpackning:	Individuellt förpackad i kartong med 1 styck (2,3 × 19 × 25 cm).		
Förvaring:	Förvaras torrt i rumstemperatur och skyddas från direkt solljus.		
Hållbarhetstid:	Upp till 3 år från tillverkningsdatum. Utgångsdatum finns på förpackningen.		
Användningstid:	Upp till 29 dagar. För engångsbruk.		
ISO-standard:	ENFit®-kopplingar är tillverkade i enlighet med ISO 80369-3.		
CE-märkning:	Överensstämmer med direktiv 93/42/EEG om medicintekniska produkter. CE-certifiering har utfärdats av ett ackrediterat anmält organ: TÜV SÜD (CE0123).		
Klassificering:	Klass IIa.		
Juridisk tillverkare:	Cedic Srl, Via Liberazione 63/9, IT-20068 Peschiera Borromeo (MI).		
Hållbarhet:	Miljöledningssystemet uppfyller ISO 14001:2015.		
Material:	Sond: Polyuretan. ENFit®-koppling: Kopolyester. Koppling med konfattning: Polyuretan. Fri från DEHP, BPA och latex**.		
Ursprungsland:	Tillverkad i Italien.		

*Viss inkompatibilitet kan förekomma.
**Inget DEHP och BPA tillsätts avsiktligt under tillverkningsprocessen. Naturgummi-latex tillsätts inte.
För ytterligare information kontakta din Compat®-representant eller besök www.compat.com
*Alla varumärken används med tillstånd, om inte annat anges.