

Compat[®] Adapter

Compat[®] ENFit[®] Übergangsset Adapter

Der Compat[®] ENFit[®] Übergangsset Adapter dient zum Anschluss von ENFit[®] Verabreichungssets an herkömmliche Ernährungssonden und Spritzen.

Merkmale auf einen Blick

Der Compat[®] ENFit[®] Übergangsset Adapter enthält einen ENLock/Stufenadapter (Adapter A) und einen Adapter mit oralem oder Luer-Ansatz (Adapter B). Er wurde entwickelt, um die Kompatibilität zwischen ENFit[®] Verabreichungssets und den meisten Sonden und Spritzen für die enterale Ernährung zu gewährleisten.

Für Lebensmittel geeignete Materialien: Der Compat[®] ENFit[®] Übergangsset Adapter ist frei von DEHP, BPA und Latex*.

Kompatibilität:


Adapter A: ENLock/Stufenadapter

- Verabreichungssets: ENFit[®]
- Enterale Ernährungssonden: ENLock, Trichter**

Adapter B: Adapter mit oralem oder Luer-Ansatz

- Spritzen: Luer, Oral, ENLock
- Enterale Ernährungssonden: ENFit[®]
- Anschluss für Medikamente: ENFit[®]

Adapter A:

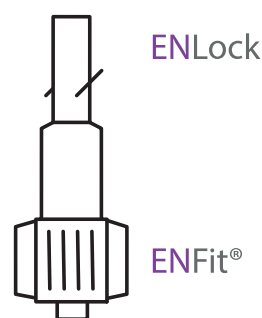

Adapter B:




Bestellinformationen

Produktname	Artikelnummer	Menge/Packung
Compat [®] ENFit [®] Übergangsset Adapter	12334450	10 Stk.


Patientenversorgung ist unsere Priorität.

Compat® ENFit® Übergangsset Adapter

Adapter A:

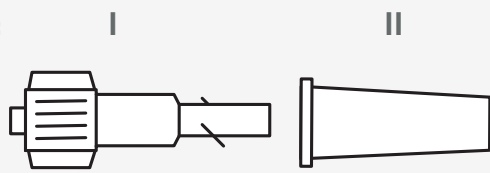

Adapter B:

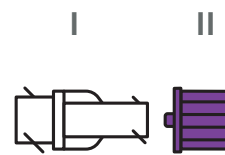

Komponenten

Adapter A:

- I ENLock/Stufenadapter
- II Abnehmbare Kappe

Adapter B:

- I Adapter mit oralem oder Luer-Ansatz
- II Abnehmbare Kappe

Spezifikationen

Steril:	Nicht steriles Produkt.
Verpackung:	Einzel verpackt in Kartons zu je 10 Stück (11,5 x 9,5 x 9 cm).
Lagerung:	Bei Raumtemperatur lagern. Vor Sonnenlicht und Feuchtigkeit schützen.
Haltbarkeit:	3 Jahre ab Herstellungsdatum. Verfallsdatum auf der Verpackung.
Gebrauchsdauer:	24 Stunden. Einmalgebrauch.
CE-Kennzeichnung:	Entspricht der europäischen Verordnung 2017/745 über Medizinprodukte.
Klassifizierung:	Klasse I.
Legal-Hersteller:	Cedic S.r.l., Via Liberazione 63/9, IT-20068 Peschiera Borromeo (MI).
Nachhaltigkeit:	Das Umweltmanagementsystem entspricht der Norm ISO 14001:2015.
Materialien:	Alle Materialien sind frei von DEHP, BPA und Latex*. Weitere Details auf Anfrage.
Ursprungsland:	Hergestellt in Italien.

*DEHP und BPA werden während des Produktionsprozesses nicht absichtlich hinzugefügt. Enthält keinen Naturkautschuklatex.

*Einige Inkompatibilitäten sind möglich.

Dieses Dokument ist kein Ersatz für die Original-Gebrauchsanweisung, die vor dem Gebrauch gelesen werden muss. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren Compat®-Vertreter oder besuchen Sie www.compat.com.

*Soweit nicht anders angegeben, werden alle Markenzeichen mit Genehmigung verwendet.

AXI01533 REV.0 5. NOVEMBER 2024

Compat®