

Compat[®] Adapter

Adattatore Compat[®] Kit di Transizione ENFit[®]

L'adattatore Compat[®] Kit di Transizione ENFit[®] consente di collegare i set di somministrazione ENFit[®] a modelli di sonde per nutrizione e di siringhe meno recenti.

Panoramica delle Caratteristiche

L'adattatore Compat[®] Kit di Transizione ENFit[®] comprende un adattatore ENLock/ multiconico (adattatore A) e un adattatore Luer/Oral (adattatore B). È stato progettato per consentire la compatibilità tra i set di somministrazione ENFit[®] e la maggior parte delle sonde e delle siringhe per nutrizione enterale.

Materiali Sicuri: Il Kit di Transizione ENFit[®] è privo di DEHP, BPA e lattice*.

Compatibilità:


Adattatore A: ENLock/multiconico

- Set di somministrazione: ENFit[®]
- Sonde per nutrizione enterale: ENLock, imbuto**

Adattatore B: Luer/Oral

- Siringhe: Luer, Oral, ENLock
- Sonde per nutrizione enterale: ENFit[®]
- Porta per la somministrazione di medicinali: ENFit[®]

Adattatore A:

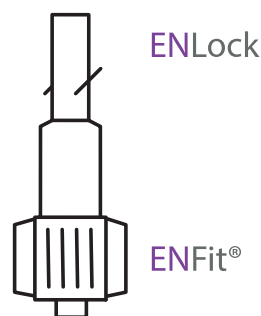

Adattatore B:




Informazioni per gli Ordini

Nome prodotto	Codice prodotto	N.pezzi/conf.
Adattatore Compat [®] Kit di Transizione ENFit [®]	12334450	10

La Cura del Paziente. La Nostra Priorità.

Adattatore Compat® Kit di Transizione ENFit®

Adattatore A: I

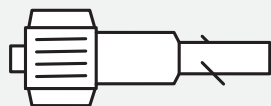

II



Adattatore B: I



II



Componenti

Adattatore A:

- I Adattatore ENLock/multiconico
- II Tappo rimovibile

Adattatore B:

- I Adattatore Luer/Oral
- II Tappo rimovibile

Specifiche

Sterile:	Non sterile.
Confezionamento:	Confezionato singolarmente in scatole da 10 pezzi (11,5 × 9,5 × 9 cm).
Conservazione:	Conservare a temperatura ambiente. Tenere al riparo dalla luce solare e dall'umidità.
Durata:	3 anni dalla data di produzione. Data di scadenza indicata sulla confezione.
Durata di impiego:	24 ore. Monouso.
Marchio CE:	Conforme al Regolamento Europeo sui Dispositivi Medici 2017/745.
Classificazione:	Classe I.
Fabbricante legale:	Cedic Srl, Via Liberazione 63/9, IT-20068 Peschiera Borromeo (MI).
Sostenibilità:	Sistema di gestione ambientale conforme a ISO 14001:2015.
Materiali:	Tutti i materiali utilizzati sono privi di DEHP, BPA e lattice*. Ulteriori dettagli disponibili su richiesta.
Paese di origine:	Prodotto in Italia.

*Non vengono intenzionalmente aggiunti DEHP e BPA durante il processo di fabbricazione. Non formulato con lattice di gomma naturale.

**Non sono escluse alcune incompatibilità.

Questo documento non sostituisce le istruzioni per l'uso originali che devono essere lette prima dell'uso.
Per richiedere maggiori informazioni, contattare il rappresentante Compat® di fiducia o visitare il sito www.compat.com
*Se non diversamente specificato, tutti i marchi commerciali sono stati utilizzati previa autorizzazione.

AXI01533 REV.0 01 MAGGIO 2023