

# Compat<sup>®</sup> Adapter

## Adaptador Compat<sup>®</sup> Kit de Transição ENFit<sup>®</sup>

O Adaptador Compat<sup>®</sup> Kit de Transição ENFit<sup>®</sup> se destina a permitir a conexão de conjuntos de administração ENFit<sup>®</sup> a sondas de nutrição e seringas existentes.

### Características Principais

O Adaptador Compat<sup>®</sup> Kit de Transição ENFit<sup>®</sup> inclui um Adaptador escalonado/ENLock (adaptador A) e um Adaptador Oral/Luer (adaptador B). É projetado para **permitir a compatibilidade entre os conjuntos de administração ENFit<sup>®</sup> e a maioria das sondas de nutrição enteral e seringas.**

**Materiais Seguros para Alimentos:** O Adaptador Compat<sup>®</sup> Kit de Transição ENFit<sup>®</sup> é isento de DEHP, BPA e Látex\*.

#### Compatibilidade:


**Adaptador A:** Adaptador escalonado/ENLock

- Conjuntos de administração: ENFit<sup>®</sup>
- Sondas de nutrição enteral: ENLock, com conector cônico\*\*

**Adaptador B:** Adaptador Oral/Luer

- Seringas: Luer, Oral, ENLock
- Sondas de nutrição enteral: ENFit<sup>®</sup>
- Porta de medicação: ENFit<sup>®</sup>

#### Adaptador A:

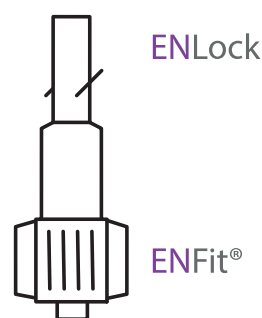

#### Adaptador B:




### Informações para Pedido

Nome do Produto	Código do Produto	Qtd./Caixa
Adaptador Compat <sup>®</sup> Kit de Transição ENFit <sup>®</sup>	12334450	10 itens

*Cuidados com o Paciente. Nossa Prioridade.*

# Adaptador Compat® Kit de Transição ENFit®

Adaptador A: I

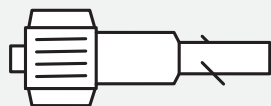

II



Adaptador B: I



II

## Componentes

### Adaptador A:

- I Adaptador escalonado/ENLock
- II Tampa removível

### Adaptador B:

- I Adaptador Oral/Luer
- II Tampa removível

## Especificações

Esterilização:	Produto não estéril.
Embalagem:	Embalado individualmente em caixas de 10 itens (11,5 × 9,5 × 9 cm).
Armazenamento:	Armazenar em temperatura ambiente. Manter afastado da luz solar e da umidade.
Prazo de validade:	3 anos a partir da data de produção. Data de validade indicada na embalagem.
Duração de utilização:	24 horas. Para uso único.
Marca CE:	Em conformidade com o Regulamento Europeu de Dispositivos Médicos 2017/745.
Classificação:	Classe I.
Fabricante legal:	Cedic Srl, Via Liberazione 63/9, IT-20068 Peschiera Borromeo (MI), Itália.
Sustentabilidade:	Sistema de gestão ambiental em conformidade com a norma ISO 14001:2015.
Materiais:	Todos os materiais são isentos de DEHP, BPA e látex*. Informações adicionais a pedido.
País de origem:	Fabricado na Itália.

\*DEHP e BPA não são adicionados intencionalmente durante o processo de fabricação. Não formulado com látex de borracha natural.

\*\*Podem existir algumas incompatibilidades.

Esse documento não substitui as Instruções de Uso originais que devem ser lidas antes do uso. Para obter mais informações, entre em contato com seu representante da Compat® ou acesse [www.compat.com](http://www.compat.com)

\*Salvo indicação em contrário, todas as marcas registradas são utilizadas com autorização.

AXI01533 REV.0 12 ABRIL 2023

# Compat®