

Compat[®] Gastrotube

Umfassendes Sortiment an Gastrostomie-Ernährungs sonden mit Silikonballon

Die Gastrostomie-Ernährungs sonden mit Silikonballon Compat[®] Gastrotube sind für eine Verwendung bei Patienten bestimmt, die eine intermittierende oder kontinuierliche enterale Verabreichung von Nahrung, Flüssigkeiten oder Medikamenten über einen gut platzierten Stomatrakt benötigen. Die Sonden können auch zur gastralen Dekompression verwendet werden.

Funktionen auf einen Blick


Die Sonden Compat[®] Gastrotube sind in unterschiedlichen Größen (12/14/16/18/20/22/24 FR) und Ballonvolumen (5, 10 und 15 cc) erhältlich, um den meisten klinischen Anforderungen zu entsprechen.

Patientenkomfort:

- Haltbarer Silikonballon, um eine maximale Nutzungsdauer zu gewährleisten und die Sonden seltener auszutauschen.
- Besteht aus weichem, transparentem und biokompatiblen Silikon, und besitzt eine versenkbare Spitze, die die Magenwand schont.
- Rückhalteplatte aus Silikon mit Lüftungslöchern und angehobenen Füßen ermöglicht eine gute Luftzirkulation um die Stomastelle, was Hautreizungen reduzieren kann.

Praktisch: Die Sonden Compat[®] Gastrotube haben einen integrierten ENFit[®] Medikamentenport, um die Verabreichung von Arzneimitteln zu vereinfachen, und sind in steriler Blisterfolie einzeln verpackt.

Patientensicherheit: Die Sonden Compat[®] Gastrotube besitzen ENFit[®] Konnektoren, die mit intravenösen Infusionssets nicht kompatibel sind, um die Patientensicherheit zu erhöhen, und dabei zu helfen, versehentliche Fehlanlüsse zu vermeiden. Alle Sonden sind DEHP-, Latex- und BPA-frei*.

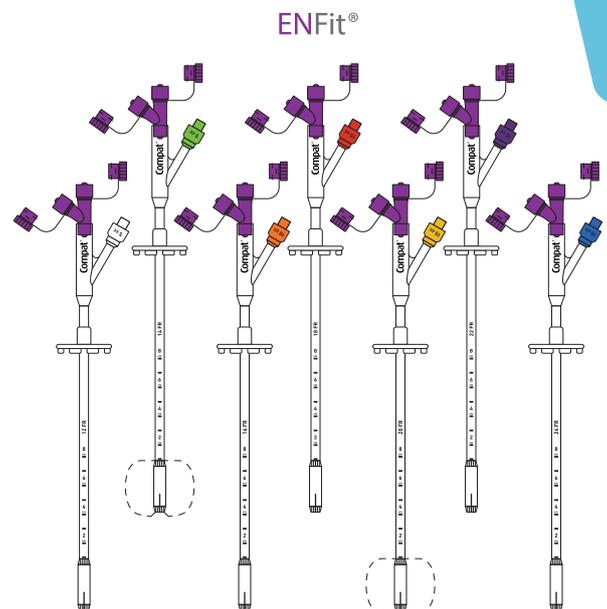


Bestellinformationen

Produktbezeichnung	Artikelnummer	Ventilfarbe	Ballon Größe	Nenn Außenabmessungen	Menge	Größe	Länge
Compat [®] Gastrotube 12 FR	12480167		5 cc	Ø 4,0	1	12 FR	± 255 mm
Compat [®] Gastrotube 14 FR	12287616		5 cc	Ø 4,7	1	14 FR	± 255 mm
Compat [®] Gastrotube 16 FR	12287746		10 cc	Ø 5,3	1	16 FR	± 255 mm
Compat [®] Gastrotube 18 FR	12287607		15 cc	Ø 6,0	1	18 FR	± 255 mm
Compat [®] Gastrotube 20 FR	12287606		15 cc	Ø 6,7	1	20 FR	± 255 mm
Compat [®] Gastrotube 22 FR	12287605		15 cc	Ø 7,3	1	22 FR	± 255 mm
Compat [®] Gastrotube 24 FR	12287604		15 cc	Ø 8,0	1	24 FR	± 255 mm

Patientenversorgung. Unsere Priorität.

Umfassendes Sortiment an Gastrostomie-Ernährungs- sonden mit Silikonballon

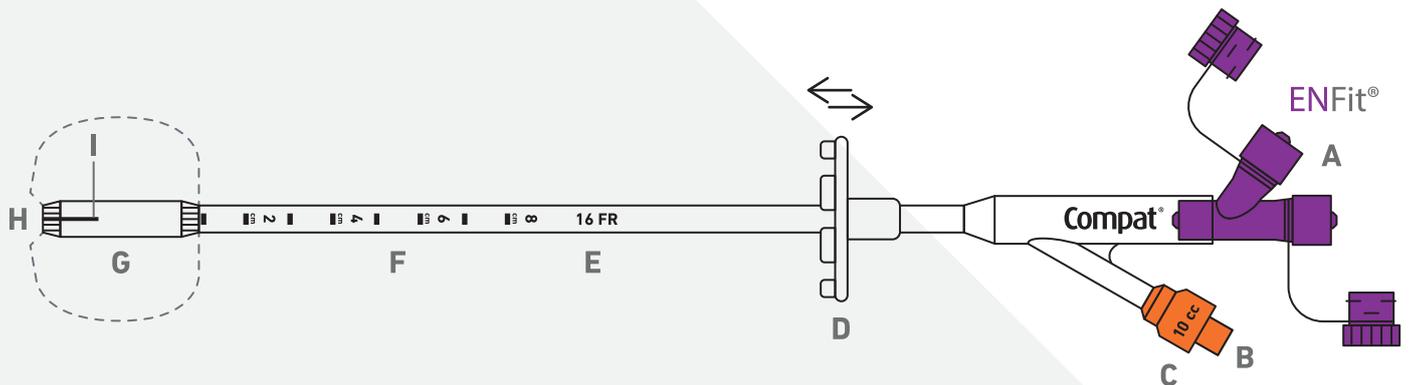

Komponenten

- A ENFit® drehverriegelbarer Ernährungsport mit integrierten Medikamentenport und Verschlusskappen
- B Inflationsventil mit Luer-Konnektor
- C Größenidentifikation durch Farbcode und aufgedruckte Markierung für Ballon-Inflationsvolumen
- D 37 mm breite verstellbare Rückhalteplatte aus Silikon mit Lüftungslöchern und angehobenem Füßen
- E Aufgedruckte Größe in French (FR) am Schaft
- F Weiche, transparente und biokompatible Silikonsonde mit Markierungen der Platzierungstiefe in Zentimeterabständen
- G Hochresistenter Silikonballon
- H Offenes und konisch zulaufendes distales Ende (versenkbares distales Ende bei Inflation)
- I Röntgenkontrastfähiger Streifen für Bestätigung von Platzierung und Position

Technische Daten

- Steril:** Mit Ethylenoxid (EO) sterilisiert.
- Verpackung:** Einzel verpackt in Kartons zu je 1 Stück (370 × 100 × 40 mm).
- Lagerung:** In der Originalverpackung, bei Raumtemperatur und in einer trockenen Umgebung lagern. Vor direkter Sonneneinstrahlung und Wärmestrahlung schützen.
- Haltbarkeit:** 5 Jahre ab Herstellungsdatum. Verfallsdatum auf der Verpackung.
- Dauer der Anwendung:** Für Langzeitanwendung geeignet. Für den Einmalgebrauch.
- Sondenlänge:** Gesamte Nennlänge: ± 255 mm.
- Durchmesser der Sonde:** Nenn-Außendurchmesser: von 12 FR (± 4,0 mm) bis 24 FR (± 8,0 mm).
- ISO-Norm:** ENFit® Konnektor nach ISO 80369-3.
- CE-Kennzeichnung:** Entspricht den Anforderungen der Europäischen Richtlinie 93/42/EWG über Medizinprodukte. Eine CE-Zertifizierung wurde von einer akkreditierten benannten Stelle ausgestellt: TÜV SÜD/CE 0123.
- Klassifizierung:** Klasse IIb.
- Rechtmäßiger Hersteller:** Degania Silicone Ltd.
- Materialien:** Schlauchsystem: Silikonkautschuk. Alle Materialien sind DEHP-, BPA- und Latex-frei*.

*DEHP und BPA werden während des Herstellungsprozesses nicht absichtlich zugesetzt. Enthält kein Naturkautschuklatex.

Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Compat® Vertriebsvertreter oder auf der Webseite unter www.compat.com

*Sofern nicht anders angegeben, werden alle Markenzeichen mit Zustimmung verwendet.

Dieses Dokument ersetzt nicht die Original-Gebrauchsanweisung, die vor dem Gebrauch gelesen werden muss.

AXI00028 REV.1 22. NOVEMBER 2022

Compat®