

Compat[®] Gastrotube

Gamma Completa di Sonde per Gastrostomia a Palloncino in Silicene

Le sonde per gastrostomia a palloncino in silicene Compat[®] Gastrotube sono progettate per pazienti che necessitano di somministrazione per via enterale, intermittente o continua, di sostanze nutritive, fluidi o medicinali attraverso un tratto di stoma ben definito. Le sonde possono essere utilizzate anche per la decompressione gastrica.

● Panoramica delle Caratteristiche


Le sonde Compat[®] Gastrotube sono disponibili in varie dimensioni (12/14/16/18/20/22/24 FR) e volumi di palloncino (5, 10 e 15 cc) per soddisfare quasi tutte le esigenze cliniche.

Comfort del Paziente:

- Palloncino in silicene ad alta resistenza per favorire la massima durata di impiego e ridotte sostituzioni della sonda.
- Struttura in silicene morbido, trasparente e biocompatibile, con una punta ricoperta delicata sulla parete dello stomaco.
- Disco di fissaggio in silicene con fori di aerazione e piedini rialzati che permette la circolazione dell'aria intorno alla sede dello stoma, riducendo le irritazioni cutanee.

Praticità: Le sonde Compat[®] Gastrotube sono dotate di una porta ENFit[®] integrata per semplificare la somministrazione di medicinali e sono confezionate singolarmente in blister sterili.

Sicurezza del Paziente: Le sonde Compat[®] Gastrotube sono provviste di connettori ENFit[®] studiati per non essere compatibili con i set per infusione endovenosa al fine di promuovere la sicurezza del paziente aiutando a evitare involontari collegamenti sbagliati. Tutte le sonde sono prive di DEHP, lattice e BPA*.

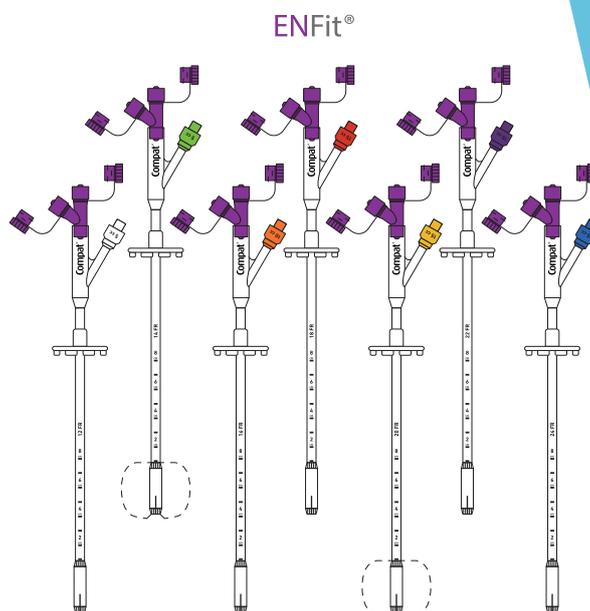


● Informazioni per gli Ordini

Nome Prodotto	Codice Prodotto	Colore della Valvola	Dimensione del Palloncino	Diametro Esterno Nominale	Qtà	Calibro	Lunghezza
Compat [®] Gastrotube 12 FR	12480167		5 cc	Ø 4,0	1	12 FR	± 255 mm
Compat [®] Gastrotube 14 FR	12287616		5 cc	Ø 4,7	1	14 FR	± 255 mm
Compat [®] Gastrotube 16 FR	12287746		10 cc	Ø 5,3	1	16 FR	± 255 mm
Compat [®] Gastrotube 18 FR	12287607		15 cc	Ø 6,0	1	18 FR	± 255 mm
Compat [®] Gastrotube 20 FR	12287606		15 cc	Ø 6,7	1	20 FR	± 255 mm
Compat [®] Gastrotube 22 FR	12287605		15 cc	Ø 7,3	1	22 FR	± 255 mm
Compat [®] Gastrotube 24 FR	12287604		15 cc	Ø 8,0	1	24 FR	± 255 mm

La Cura del Paziente. La Nostra Priorità.

Gamma Completa di Sonde per Gastrostomia a Palloncino in Silicone

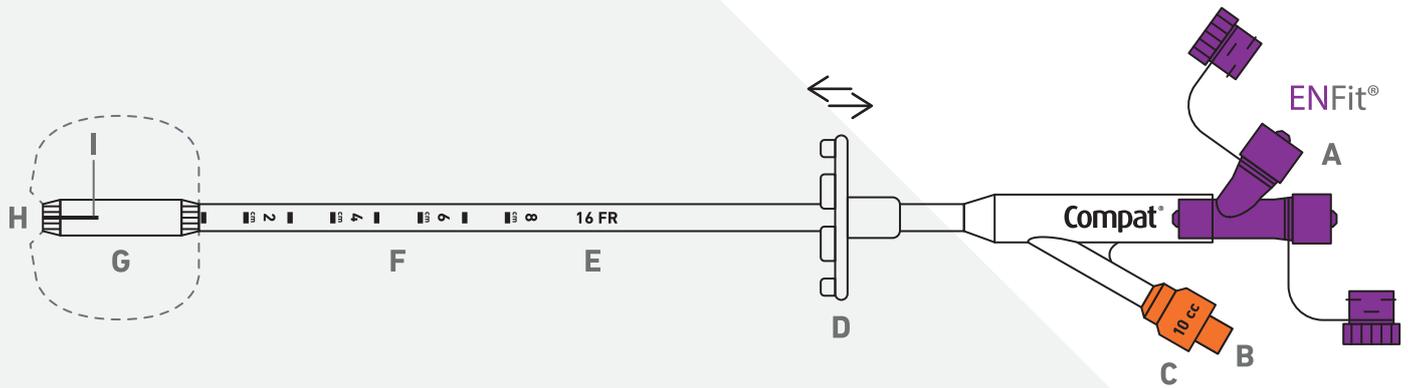

Componenti

- A Porta per nutrizione ENFit® con chiusura a rotazione provvista di porta per la somministrazione di medicinali e tappi
- B Valvola di gonfiaggio con connettore Luer
- C Identificazione delle dimensioni tramite il colore e l'indicazione del volume di gonfiaggio del palloncino stampata
- D Disco di fissaggio in silicone regolabile della larghezza di 37 mm con fori di aerazione e piedini rialzati
- E Calibro in French (FR) stampato sul tubo
- F Sonda in silicone morbido, trasparente e biocompatibile con contrassegni che indicano la profondità di posizionamento distanziati di un centimetro gli uni dagli altri
- G Palloncino in silicone ad alta resistenza
- H Estremità distale aperta e affusolata (estremità distale ricoperta quando gonfiata)
- I Striscia radio-opaca per posizionamento e conferma della posizione

Specifiche

- Sterile:** Sterilizzate con ossido di etilene (EO).
- Confezionamento:** Confezionate singolarmente in scatole da un pezzo (370 × 100 × 40 mm).
- Conservazione:** Conservare nella confezione originale, a temperatura ambiente e in un ambiente asciutto. Tenere al riparo dalla luce solare e da radiazioni termiche.
- Durata:** 5 anni dalla data di produzione. Data di scadenza indicata sulla confezione.
- Durata di impiego:** Indicate per uso a lungo termine. Monouso.
- Lunghezza della sonda:** Lunghezza nominale totale: ± 255 mm.
- Diametro della sonda:** Diametro esterno nominale: da 12 FR (± 4,0 mm) a 24 FR (± 8,0 mm).
- Standard ISO:** Connettore ENFit® realizzato in conformità allo standard ISO 80369-3.
- Marchio CE:** Conformi alla direttiva europea 93/42/CEE concernente i dispositivi medici. Certificazione CE rilasciata da un organismo notificato accreditato: TÜV SÜD/CE0123.
- Classificazione:** Classe IIb.
- Fabbricante legale:** Degania Silicone Ltd.
- Materiali:** Tubi in gomma siliconica. Tutti i materiali utilizzati sono privi di DEHP, BPA e lattice*.

*Non vengono intenzionalmente aggiunti DEHP e BPA durante il processo di fabbricazione. Non formulato con lattice di gomma naturale.

Per richiedere maggiori informazioni, contattare il rappresentante Compat® di fiducia o visitare il sito www.compat.com

* Se non diversamente specificato, tutti i marchi commerciali sono stati utilizzati previa autorizzazione. Questo documento non sostituisce le Istruzioni per l'uso originali che devono essere lette prima dell'uso.

AXI00028 REV.1 22 NOVEMBRE 2022

Compat®