

# Compat<sup>®</sup> Soft

## Gamme Complète de Sondes de Nutrition Nasogastriques Souples en Polyuréthane

Les sondes de nutrition nasogastriques Compat<sup>®</sup> Soft sont destinées aux patients pédiatriques et adultes qui ont besoin d'une administration entérale intermittente ou continue de nutriments, de liquides ou de médicaments dans le tube digestif, par la voie naso-entérique naturelle.


### Aperçu des Caractéristiques

Les sondes de nutrition Compat<sup>®</sup> Soft sont conçues pour contribuer à **améliorer le confort du patient**.

**Confort du Patient :** Les sondes Compat<sup>®</sup> Soft peuvent être utilisées jusqu'à 42 jours. Elles sont en polyuréthane, un **matériau respectueux du patient qui se ramollit à la température du corps**. L'extrémité distale arrondie permet une insertion non traumatique de la sonde et le connecteur ENFit<sup>®</sup> simple contribue à **promouvoir le confort du patient**.

**Aide à l'Insertion :** Des repères sont indiqués tous les 5 cm sur la sonde pour mesurer la profondeur d'insertion et vérifier la position de la sonde. Un mandrin préassemblé facilite la pose de la sonde (optionnel). Ce mandrin est lubrifié, ce qui peut contribuer à **réduire le risque de déplacement** de la sonde lors du retrait du mandrin. L'injection de fluides radio-opaques et l'aspiration du contenu gastrique sans retrait du mandrin sont également possibles.

**Sécurité du Patient :** Les sondes Compat<sup>®</sup> Soft comportent un connecteur ENFit<sup>®</sup> conçu pour être incompatibles IV afin de **contribuer à garantir la sécurité du patient** en évitant les erreurs de connexion. Toutes les sondes sont stériles et exemptes de DEHP, de latex et de BPA\*.

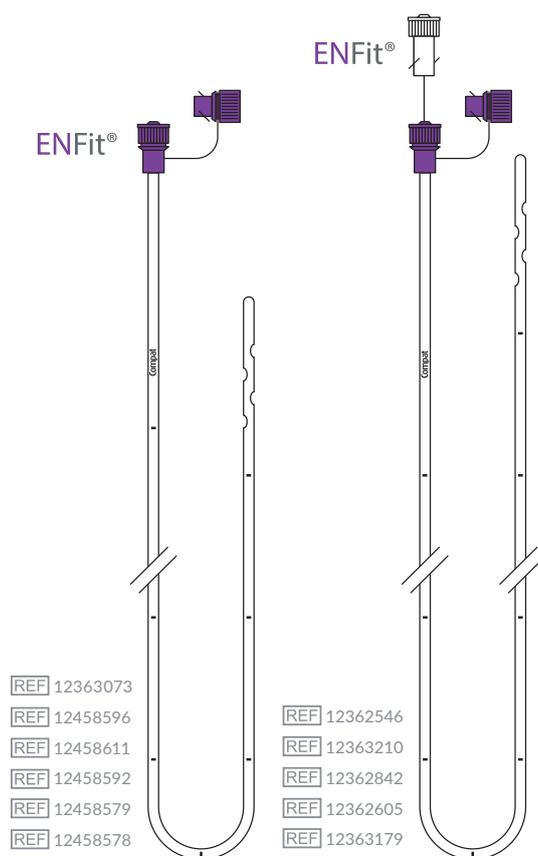


### Informations de Commande

Description	Numéro d'article	Taille	Longueur	Stérile	Mandrin
Compat <sup>®</sup> Soft Junior 5FR 50 cm	12363073	5FR	50 cm	Oui	Non
Compat <sup>®</sup> Soft Junior 6FR 90 cm	12458596	6FR	90 cm		Oui (S)
Compat <sup>®</sup> Soft Junior 6FR 90 cm S	12362546				Non
Compat <sup>®</sup> Soft 8FR 120 cm	12458611	8FR	120 cm		Oui (S)
Compat <sup>®</sup> Soft 8FR 120 cm S	12363210				Non
Compat <sup>®</sup> Soft 10FR 120 cm	12458592	10FR	120 cm		Oui (S)
Compat <sup>®</sup> Soft 10FR 120 cm S	12362842				Non
Compat <sup>®</sup> Soft 12FR 120 cm	12458579	12FR	120 cm		Oui (S)
Compat <sup>®</sup> Soft 12FR 120 cm S	12362605				Non
Compat <sup>®</sup> Soft 14FR 120 cm	12458578	14FR	120 cm		Oui (S)
Compat <sup>®</sup> Soft 14FR 120 cm S	12363179				Non

Les Soins aux Patients. Notre Priorité.

# Gamme Complète de Sondes de Nutrition Nasogastriques Souples en Polyuréthane

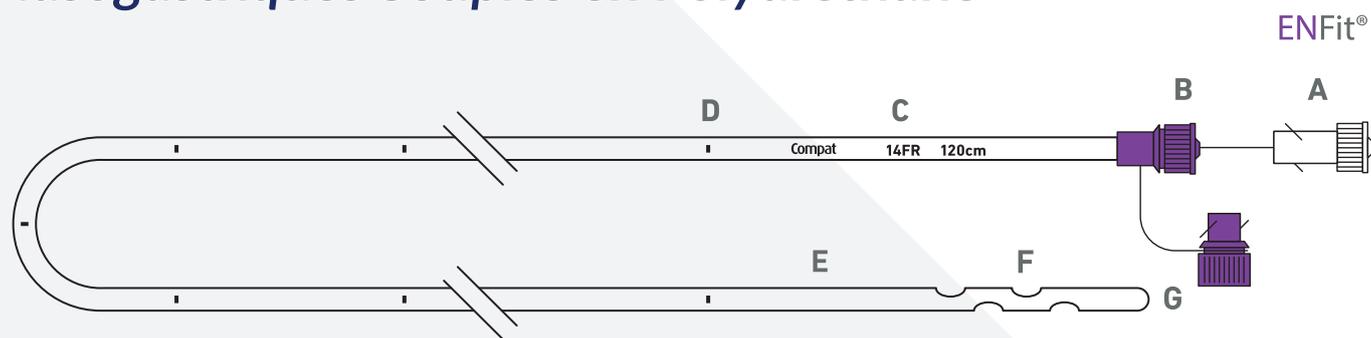

## Composants

- A Mandrin préassemblé en circuit ouvert (optionnel)
- B Connecteur ENFit® à fermeture à vis avec bouchon
- C Identification du produit, dimension en charrière (FR : French) et longueur imprimées sur le tube
- D Repères d'insertion tous les 5 cm
- E Tube en polyuréthane radio-opaque souple
- F Orifices latéraux décalés
- G Extrémité distale arrondie

## Spécifications

- Stérile :** Stérilisé à l'oxyde d'éthylène (ETO).
- Emballage :** Emballé individuellement en carton de 10 pièces (220 x 90 x 240 mm).
- Stockage :** Stocker à température ambiante. Tenir à l'abri de la lumière du soleil et de l'humidité.
- Durée de conservation :** 3 ans à partir de la date de production. Date d'expiration indiquée sur l'emballage.
- Durée d'utilisation :** Jusqu'à 42 jours. A usage unique.
- Longueur :** 50, 90 et 120 cm.
- Diamètre :** de 5FR à 14FR.
- Norme ISO :** Connecteur ENFit® conforme à la norme ISO 80369-3.
- Marquage CE :** Conforme à la directive européenne relative aux dispositifs médicaux 93/42/CEE. Une certification CE a été délivrée par un organisme notifié accrédité: TÜV SÜD (CE0123).
- Classification :** Classe IIb.
- Fabricant légal :** Cedic Srl, Via Liberazione 63/9, IT-20068 Peschiera Borromeo (MI).
- Développement durable :** Système de gestion de l'environnement conforme à la norme ISO 14001:2015.
- Matériaux :** Sonde: polyuréthane. Connecteur ENFit®: copolyester. Tous les matériaux sont exempts de DEHP, de BPA et de latex\*. Informations supplémentaires sur demande.
- Pays d'origine :** Fabriqué en Italie.

\*Le DEHP et le BPA ne sont pas ajoutés intentionnellement au cours du processus de fabrication. Non formulé avec du latex de caoutchouc naturel.

Pour plus d'informations, veuillez contacter votre délégué médical Compat® ou visitez [www.compat.com](http://www.compat.com).

\*Sauf mention contraire, toutes les marques commerciales sont utilisées avec permission.

AXI00024 RÉV.1 05 AVRIL 2022

# Compat® Soft