

Compat[®] Soft

Portfólio completo de Sondas de Alimentação Nasogástrica de Poliuretano Macio

As Sondas de Alimentação Nasogástrica Compat[®] Soft com conectores ENFit[®] são destinadas para uso em pacientes pediátricos ou adultos que requerem administração enteral intermitente ou contínua de nutrição, fluidos ou medicação no trato alimentar através da via nasoentérica natural.


Características Principais

As sondas Compat[®] Soft foram projetadas para ajudar **melhorar o conforto do paciente**.

Conforto do paciente: As sondas de alimentação Compat[®] Soft podem ser usadas até 42 dias e são feitas de poliuretano, um **material amigo do paciente** que amolece à temperatura corporal. O design arredondado da extremidade distal da sonda permite uma inserção da sonda não traumática e o conector ENFit[®] único ajuda a **promover o conforto do paciente**.

Auxílio no Posicionamento: As sondas têm marcadores de profundidade de posicionamento a cada 5 cm, para avaliação da profundidade de posicionamento e verificação da migração do tubo. Um mandril pré-montado está incluído para **ajudar no posicionamento** (opcional). O mandril é lubrificado, o que pode ajudar a diminuir o risco de deslocamento da sonda na remoção do mandril. Permite **injetar fluidos radiopacos ou aspirar conteúdo gástrico sem remover o mandril**.

Segurança do paciente: As sondas de alimentação nasogástrica Compat[®] Soft com conectores ENFit[®] são projetadas para serem incompatíveis com IV para ajudar a **promover a segurança do paciente** e evitar conexões indevidas acidentais. Todas as sondas são **estéreis e isentas de DEHP, BPA e Látex¹**.

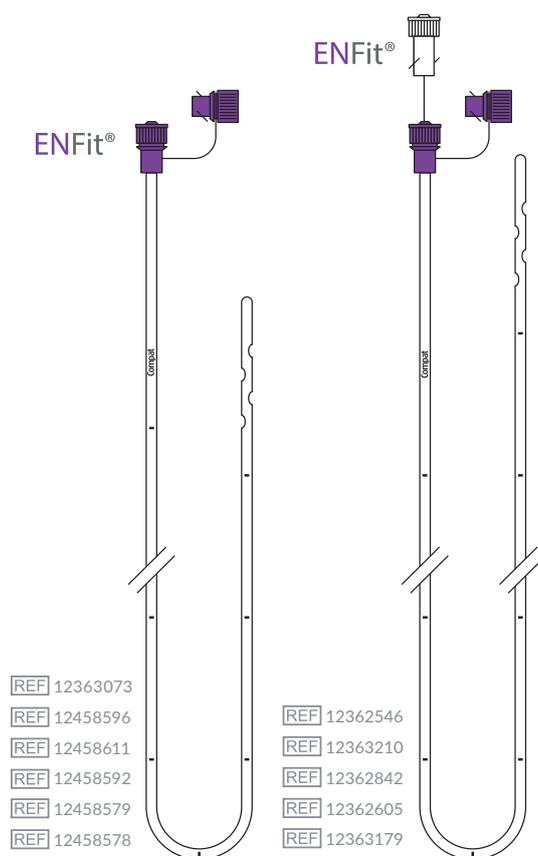


Informações para pedido

Nome do Produto	Código do Produto	Tamanho	Comprimento	Estéril	Mandril
Compat [®] Soft Junior 5FR 50 cm	12363073	5FR	50 cm	Sim	Não
Compat [®] Soft Junior 6FR 90 cm	12458596	6FR	90 cm		Sim
Compat [®] Soft Junior 6FR 90 cm S	12362546		Não		
Compat [®] Soft 8FR 120 cm	12458611	8FR	120 cm		Sim
Compat [®] Soft 8FR 120 cm S	12363210				Não
Compat [®] Soft 10FR 120 cm	12458592	10FR	120 cm		Sim
Compat [®] Soft 10FR 120 cm S	12362842				Não
Compat [®] Soft 12FR 120 cm	12458579	12FR	120 cm		Sim
Compat [®] Soft 12FR 120 cm S	12362605				Não
Compat [®] Soft 14FR 120 cm	12458578	14FR	120 cm		Sim
Compat [®] Soft 14FR 120 cm S	12363179				Não

Segurança do paciente. Nossa prioridade.

Portfólio completo de Sondas de Alimentação Nasogástrica de Poliuretano Macio

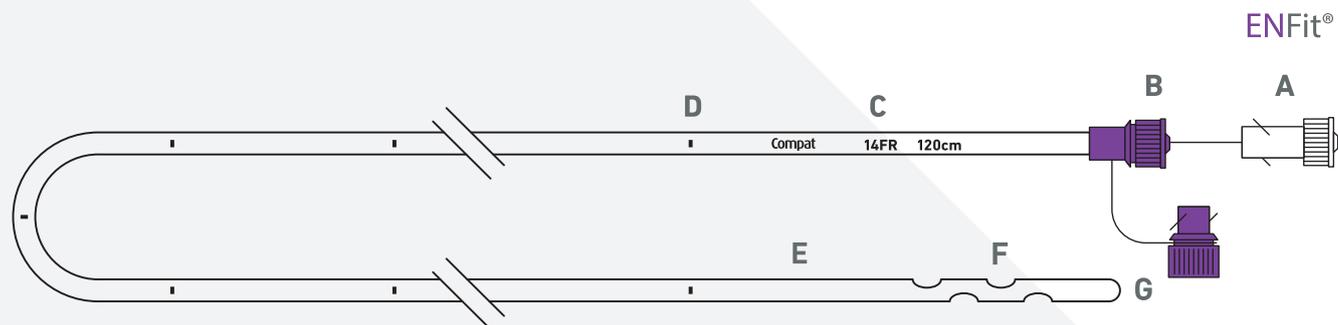

Componentes

- A Mandril pré-lubrificado e aberto "flow-through" ENFit® (opcional)
- B Conector ENFit® com tampa rosqueável
- C Identificação do produto, diâmetro externo (FR) e comprimento impressos no tubo
- D Marcadores de profundidade de posicionamento a cada 5 cm
- E Sonda de poliuretano radiopaco macio
- F Furos laterais da sonda
- G Extremidade distal arredondada

Especificações

- Esterilização:** Esterilizadas com Óxido de Etileno (EO).
- Embalagem:** Embaladas individualmente em caixas de 10 itens (220 x 90 x 240 mm).
- Armazenamento:** Armazenar em local seco e temperatura ambiente e ao abrigo da luz solar.
- Prazo de validade:** 3 anos a partir da data de produção. Data de validade indicada na embalagem.
- Duração de utilização:** Até 42 dias. Para uso único.
- Comprimento das sondas:** 50, 90 e 120 cm.
- Diâmetros das sondas:** De 5FR até 14FR.
- Norma ISO:** Conector ENFit® fabricado de acordo com a norma ISO 80369-3.
- Marca CE:** Em conformidade com a Diretiva Europeia para Dispositivos Médicos 93/42/EEC. Foi emitida uma certificação CE por um Organismo Notificado credenciado: TÜV SÜD (CE0123).
- Classificação:** Classe IIb.
- Fabricante legal:** Cedic Srl, Via Liberazione 63/9, IT-20068 Peschiera Borromeo (MI), Itália.
- Sustentabilidade:** Sistema de gestão ambiental em conformidade com a norma ISO 14001:2015.
- Materiais:** Sondas: poliuretano. Conector ENFit®: copoliéster. Todos os materiais são isentos de DEHP, BPA e látex¹. Informações adicionais a pedido.
- País de origem:** Fabricadas na Itália.

1. DEHP e BPA não são adicionados intencionalmente durante o processo de fabricação. Não formulado com látex de borracha natural.

Para obter mais informações, entre em contato com seu representante da Compat® ou acesse www.compat.com

*Salvo indicação em contrário, todas as marcas registradas são utilizadas com permissão.

AXI00024 REV.0, 1 DE JULHO DE 2022