

Compat[®] Soft

Brett Sortiment av Mjuka Nasogastriska Matningssonder i Polyuretan

Compat[®] Soft nasogastriska matningssonder med ENFit[®]-kopplingar är avsedda att användas på barn eller vuxna som behöver intermittent eller kontinuerlig enteral administrering av näring, vätskor eller läkemedel till matsmältningskanalen via naturlig nasoenterisk väg.

Egenskaper i Korthet


Compat[®] Soft-sonder har utformats för att **förbättra patientkomforten**.

Patientkomfort: Compat[®] Soft-sonder kan användas i upp till 42 dagar och är tillverkade av polyuretan, ett **patientvänligt material** som mjuknar vid kroppstemperatur. Sondens rundade distala ände möjliggör icke-traumatisk sondinföring, och ENFit[®]-kopplingen främjar patientkomforten.

Hjälp vid Placering: Sonderna har markeringar för placeringsdjup var femte centimeter för bedömning av placeringsdjup och kontroll av sondmigration. En förmonterad ledare ingår för att **hjälpa till vid placeringen** (valfritt). Ledaren är smord vilket kan minska risken för att sonden rubbas när ledaren avlägsnas. Det gör det möjligt att **injicera röntgentäta vätskor eller aspirera innehåll** utan att ledaren avlägsnas.

Patientsäkerhet: Compat[®] Soft nasogastriska matningssonder är utrustade med ENFit[®]-kopplingar som är IV-inkompatibla för att **främja patientsäkerheten**, och förhindra oavsiktliga felkopplingar. Alla sonder är **sterila** och fria från DEHP, BPA och latex¹.


Beställningsinformation

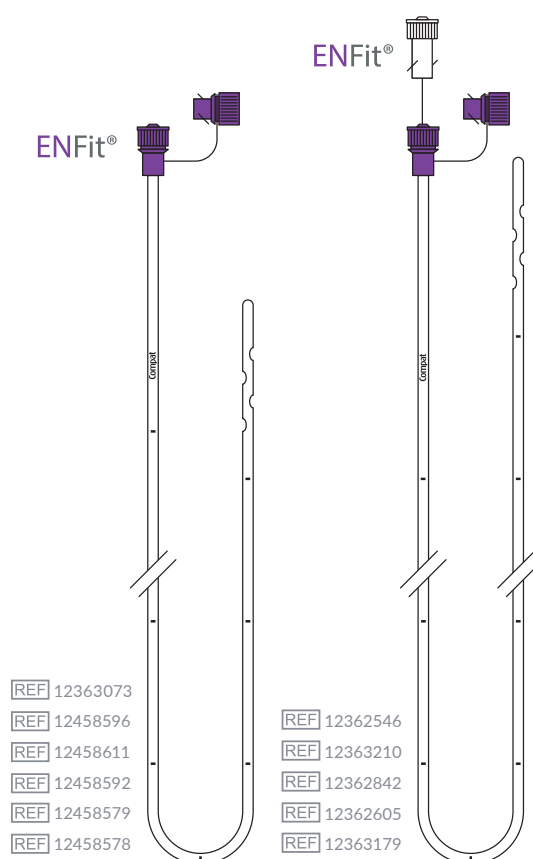

Produktnamn	Produktkod	Storlek	Längd	Steril	Ledare
Compat [®] Soft Junior 5FR 50 cm	12363073	5FR	50 cm	Yes	Nej
Compat [®] Soft Junior 6FR 90 cm	12458596	6FR	90 cm		Ja
Compat [®] Soft Junior 6FR 90 cm S	12362546	6FR	90 cm		Nej
Compat [®] Soft 8FR 120 cm	12458611	8FR	120 cm		Ja
Compat [®] Soft 8FR 120 cm S	12363210	8FR	120 cm		Nej
Compat [®] Soft 10FR 120 cm	12458592	10FR	120 cm		Ja
Compat [®] Soft 10FR 120 cm S	12362842	10FR	120 cm		Nej
Compat [®] Soft 12FR 120 cm	12458579	12FR	120 cm		Ja
Compat [®] Soft 12FR 120 cm S	12362605	12FR	120 cm		Nej
Compat [®] Soft 14FR 120 cm	12458578	14FR	120 cm		Ja
Compat [®] Soft 14FR 120 cm S	12363179	14FR	120 cm		Ja

Patientsäkerhet. Vår Prioritet.

Brett Sortiment av Mjuka Nasogastriska Matningssonder i Polyuretan

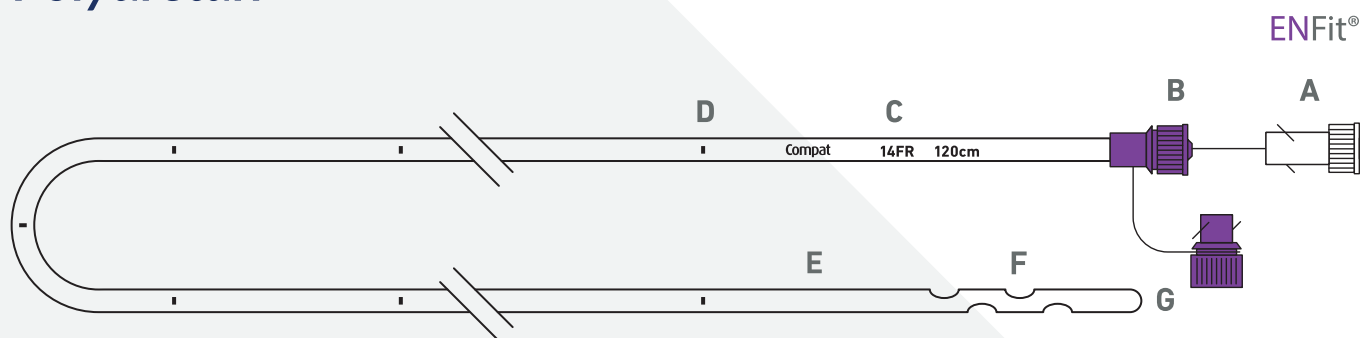

Komponenter

- A ENFit® försmord och öppen genomflödesledare (valfri)
- B ENFit®-koppling med vridlås och lock
- C Produktidentifiering, tryckt storlek (FR) och längd på skaftet
- D Markeringar för placeringsdjup var femte centimeter
- E Mjuka röntgentäta sonder i polyuretan
- F Hål i sondens sidovägg
- G Rundad distal ände

Specifikationer

Steril:	Steriliserad med etylenoxid (ETO).
Förpackning:	Individuellt förpackad i kartong med 10 stycken (220 × 90 × 240 mm).
Förvaring:	Förvaras torrt i rumstemperatur och skyddas från direkt solljus.
Hållbarhetstid:	3 år från tillverkningsdatum. Utgångsdatum finns på förpackningen.
Användningstid:	Upp till 42 dagar. För engångsbruk.
Sondlängd:	50, 90 och 120 cm.
Sonddiameter:	From 5FR to 14FR.
ISO-standard:	ENFit®-kopplingar är tillverkade i enlighet med ISO 80369-3.
CE-märkning:	Överensstämmer med direktiv 93/42/EEG om medicintekniska produkter. CE-certifiering har utfärdats av ett ackrediterat anmält organ: TÜV SÜD (CE0123).
Klassificering:	Klass IIb.
Juridisk tillverkare:	Cedic Srl, Via Liberazione 63/9, IT-20068 Peschiera Borromeo (MI).
Hållbarhet:	Miljöledningssystemet uppfyller ISO 14001:2015.
Material:	Sond: polyuretan. ENFit®-koppling: kopolyester. Alla material är fria från DEHP, BPA och latex ¹ . Ytterligare information ges på begäran.
Ursprungsland:	Tillverkad i Italien.

1. Inget DEHP och BPA tillsätts avsiktligt under tillverkningsprocessen. Naturgummilates tillsätts inte.

För ytterligare information kontakta din Compat®-representant eller besök www.compat.com

*Alla varumärken används med tillstånd, om inte annat anges.

AXI00047 REV.1 11 MARS 2024