

# Compat<sup>®</sup> Soft

## Komplettes Sortiment an Weichen Nasogastralen Ernährungssonden aus Polyurethan

Die weichen nasogastralen Compat<sup>®</sup>-Ernährungssonden mit ENFit<sup>®</sup>-Konnektoren sind für die Verwendung bei pädiatrischen oder erwachsenen Patienten vorgesehen, die eine intermittierende oder kontinuierliche enterale Verabreichung von Nahrung, Flüssigkeiten oder Medikamenten in den Ernährungstrakt über den natürlichen nasoenterischen Weg benötigen.

### Merkmale auf einen Blick


Die weichen Compat<sup>®</sup>-Sonden wurden entwickelt, um den **Patientenkomfort zu verbessern**.

**Patientenkomfort:** Die weichen Compat<sup>®</sup>-Ernährungssonden können bis zu 42 Tage lang verwendet werden und bestehen aus Polyurethan, einem **patientenfreundlichen Material**, das bei Körpertemperatur weich wird. Das abgerundete distale Ende der Sonde ermöglicht ein atraumatisches Einführen der Sonde und der einzelne ENFit<sup>®</sup>-Konnektor trägt zu **mehr Patientenkomfort** bei.

**Platzierungshilfe:** Die Sonden sind alle 5 cm mit Platzierungstiefenmarkierungen versehen, um die Platzierungstiefe und die Sondenwanderung zu überprüfen. Ein vormontierter Mandrin ist im Lieferumfang als **Platzierungshilfe** (optional) enthalten. Der vorgeschmierte Mandrin kann helfen, das Risiko einer Fehlplatzierung beim Entfernen der Sonde zu verringern. Er ermöglicht die **Injektion von röntgendichten Flüssigkeiten oder die Absaugung von Mageninhalt ohne Mandrinentfernung**.

**Patientensicherheit:** Die weichen nasogastralen Compat<sup>®</sup>-Ernährungssonden mit ENFit<sup>®</sup>-Konnektoren sind so konzipiert, dass sie mit intravenösen Infusionssets inkompatibel sind, um die **Patientensicherheit zu erhöhen** und den versehentlichen Anschluss von falschen Sets zu verhindern. Alle Sonden sind steril und frei von DEHP, BPA und Latex.<sup>1</sup>


### Bestellinformationen

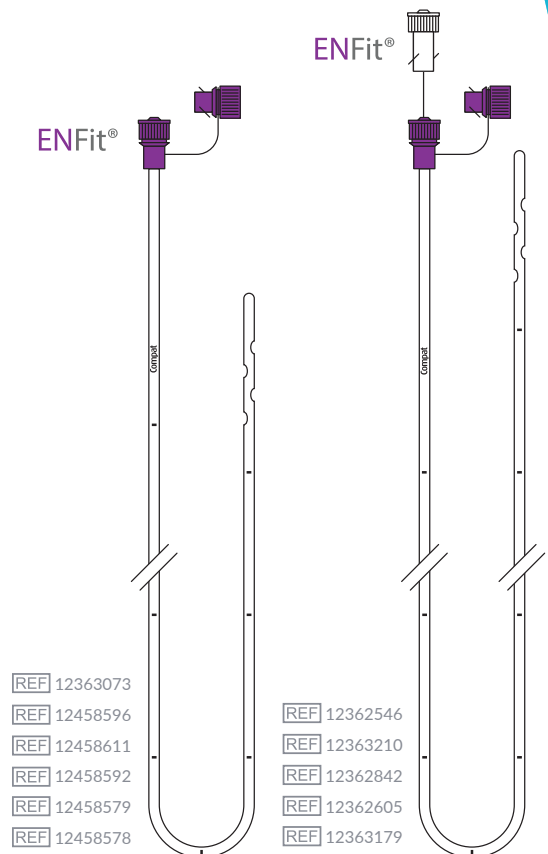

Produktbezeichnung	Produktcode	Größe	Länge	Steril	Mandrin
Compat <sup>®</sup> Soft Junior 5 FR 50 cm	12363073	5 FR	50 cm	Ja	Nein
Compat <sup>®</sup> Soft Junior 6 FR 90 cm	12458596	6 FR	90 cm		Ja
Compat <sup>®</sup> Soft Junior 6 FR 90 cm S	12362546				Nein
Compat <sup>®</sup> Soft 8 FR 120 cm	12458611	8 FR	120 cm		Ja
Compat <sup>®</sup> Soft 8 FR 120 cm S	12363210				Nein
Compat <sup>®</sup> Soft 10 FR 120 cm	12458592	10 FR	120 cm		Ja
Compat <sup>®</sup> Soft 10 FR 120 cm S	12362842				Nein
Compat <sup>®</sup> Soft 12 FR 120 cm	12458579	12 FR	120 cm		Ja
Compat <sup>®</sup> Soft 12 FR 120 cm S	12362605				Nein
Compat <sup>®</sup> Soft 14 FR 120 cm	12458578	14 FR	120 cm		Ja
Compat <sup>®</sup> Soft 14 FR 120 cm S	12363179				Nein

Patientensicherheit. Unsere Priorität.

# Komplettes Sortiment an Weichen Nasogastralen Ernährungssonden aus Polyurethan

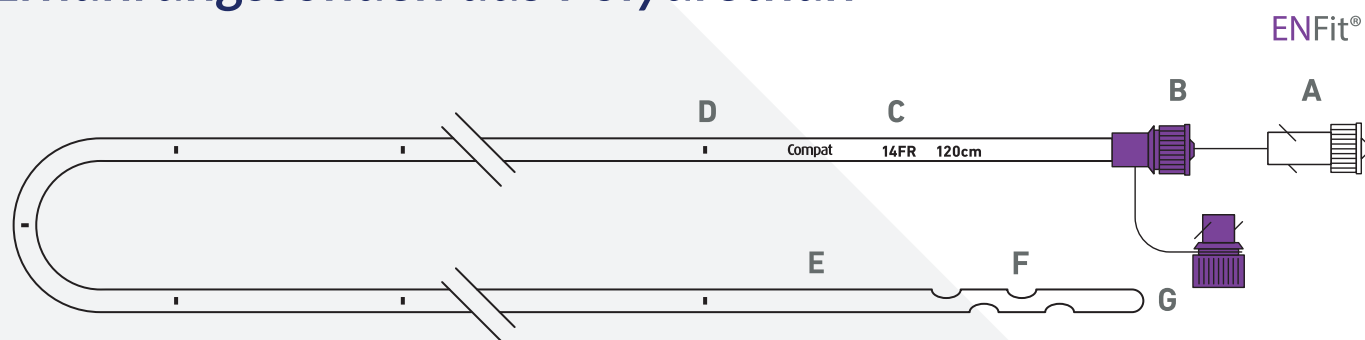

## Komponenten

- A ENFit®-Mandrin vorgeschmiert mit offenem Durchfluss (optional)
- B ENFit®-Konnektor mit Drehverschluss und Verschlusskappe
- C Produktkennzeichnung, French-Größe (FR) und Länge auf dem Schaft aufgedruckt
- D Platzierungstiefenmarkierungen alle 5 cm
- E Weicher röntgendichter Polyurethan-Schlauch
- F Seitenlöcher in der Sondenwand
- G Abgerundetes distales Ende

## Technische Daten

- Sterilität:** Sterilisiert mit Ethylenoxid (ETO).
- Verpackung:** Einzel verpackt in Kartons zu 10 Stück (220 x 90 x 240 mm).
- Lagerung:** Trocken bei Raumtemperatur und vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt lagern.
- Haltbarkeit:** 3 Jahre ab Herstellungsdatum. Verfallsdatum auf der Verpackung.
- Dauer der Anwendung:** Bis zu 42 Tage. Zur Einmalanwendung.
- Sondenzlänge:** 50, 90 und 120 cm.
- Sondendurchmesser:** Von 5 FR bis 14 FR.
- ISO-Norm:** ENFit®-Konnektor nach ISO 80369-3.
- CE-Kennzeichnung:** Entspricht der europäischen Richtlinie über Medizinprodukte 93/42/EWG. Eine CE-Zertifizierung wurde von einer akkreditierten benannten Stelle ausgestellt: TÜV SÜD (CE0123).
- Klassifizierung:** Klasse IIb.
- Herstellerangaben:** Cedic Srl, Via Liberazione 63/9, IT-20068 Peschiera Borromeo (MI).
- Nachhaltigkeit:** Das Environmental Management System entspricht ISO 14001:2015.
- Materialien:** Schlauchsystem: Polyurethan. ENFit®-Konnektor: Copolyester. Alle Materialien sind frei von DEHP, BPA und Latex.<sup>1</sup> Weitere Einzelheiten auf Anfrage.
- Herkunftsland:** Hergestellt in Italien.

1. DEHP und BPA werden während des Herstellungsprozesses nicht absichtlich hinzugefügt. Enthält kein Naturkautschuklatex.

Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Compat®-Vertreter oder auf der Webseite unter [www.compat.com](http://www.compat.com)

<sup>®</sup>Soweit nicht anders angegeben, werden alle Markenzeichen mit Genehmigung verwendet.

AXI00024 REV.1 05. APRIL 2022