

Compat[®] Soft

Gama Completa de Sondas Nasogástricas para Nutrición de Poliuretano Suave

Las sondas nasogástricas para nutrición Compat[®] Soft con conectores ENFit[®] están diseñadas para su uso en pacientes tanto pediátricos como adultos que requieren una administración enteral intermitente o continua de nutrientes, fluidos o medicación al tracto digestivo a través de la vía nasoenteral.

Características Generales


Las sondas Compat[®] Soft se han concebido para ayudar a **mejorar el bienestar del paciente**.

Comodidad del Paciente: Las sondas de nutrición Compat[®] Soft pueden utilizarse hasta 42 días y están fabricadas en poliuretano, un **material agradable para el paciente** que se mantiene blando al entrar en contacto con la temperatura corporal. El diseño redondeado del extremo distal de la sonda hace posible una inserción no traumática, mientras que el conector ENFit[®] de **entrada única favorece la comodidad del paciente**.

Asistencia en la Colocación: Las sondas cuentan con marcas de colocación cada 5 cm que permiten evaluar la profundidad de colocación y verificar el desplazamiento de la sonda. Se incluye un **fiador preensamblado** que ofrece **asistencia en la colocación** (opcional). El fiador está lubricado, lo que puede contribuir a reducir el riesgo de desplazamiento al extraerlo. Permite la **inyección de fluidos radiopacos** o la **aspiración del contenido gástrico** sin retirar el fiador.

Seguridad del Paciente: Las sondas nasogástricas Compat[®] Soft con conectores ENFit[®] están diseñadas para ser incompatibles con la administración IV, con el objetivo de **incrementar la seguridad del paciente** e impedir errores de conexión accidentales. Todas las sondas son **estériles** y están libres de DEHP, BPA y látex.¹


Información de Pedido

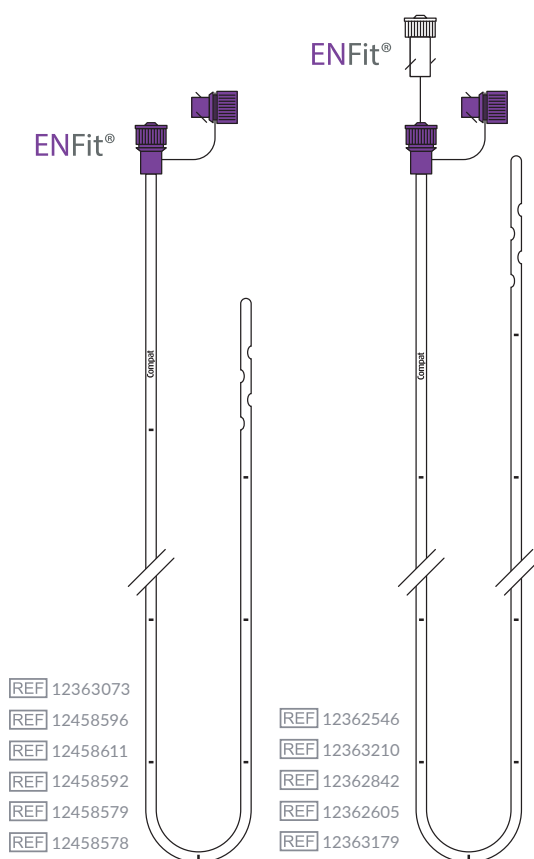

Descripción	Código	Calibre	Longitud	Estéril	Fiador
Compat [®] Soft Junior 5 Fr y 50 cm	12363073	5 Fr	50 cm	Sí	No
Compat [®] Soft Junior 6 Fr y 90 cm	12458596	6 Fr	90 cm		Sí
Compat [®] Soft Junior 6 Fr y 90 cm S	12362546				No
Compat [®] Soft 8 Fr y 120 cm	12458611	8 Fr	120 cm		Sí
Compat [®] Soft 8 Fr y 120 cm S	12363210				No
Compat [®] Soft 10 Fr y 120 cm	12458592	10 Fr	120 cm		Sí
Compat [®] Soft 10 Fr y 120 cm S	12362842				No
Compat [®] Soft 12 Fr y 120 cm	12458579	12 Fr	120 cm		Sí
Compat [®] Soft 12 Fr y 120 cm S	12362605				No
Compat [®] Soft 14 Fr y 120 cm	12458578	14 Fr	120 cm		Sí
Compat [®] Soft 14 Fr y 120 cm S	12363179				No

El Cuidado del Paciente. Nuestra Prioridad.

Gama Completa de Sondas Nasogástricas para Nutrición de Poliuretano Suave

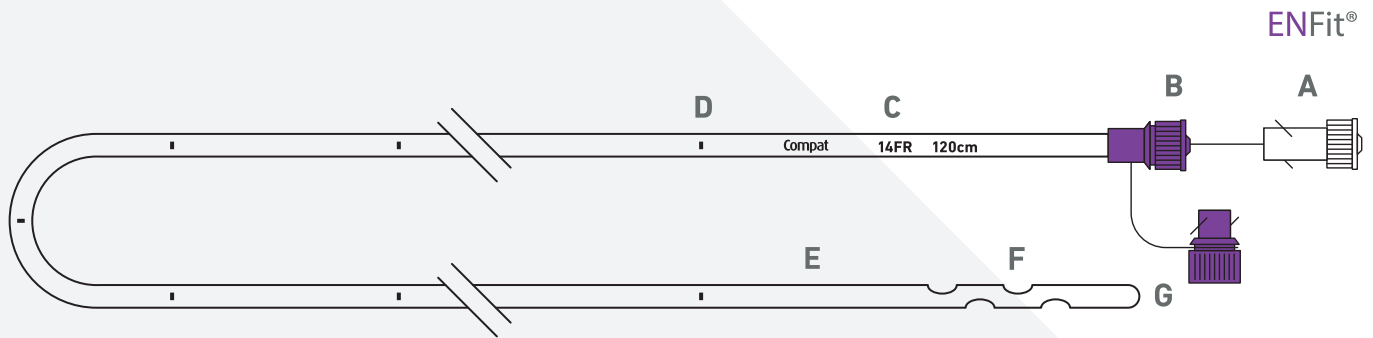

Componentes

- A Fiador prelubricado con conector ENFit® abierto (opcional)
- B Conector ENFit® con cierre a rosca con tapón
- C Identificación del producto, calibre según la escala francesa (Fr) y longitud impresos en el eje
- D Marcas de colocación cada 5 cm
- E Sonda de poliuretano suave radiopaca
- F Orificios laterales
- G Extremo distal redondeado

Especificaciones Técnicas

- Estériles:** Esterilizadas con óxido de etileno (EO).
- Embalaje:** Embaladas en blísteres individuales en cajas de 10 unidades (220 x 90 x 240 mm).
- Almacenaje:** almacenar a temperatura ambiente, alejadas de la luz solar.
- Período de validez:** 3 años a partir de la fecha de producción. Fecha de caducidad impresa en el embalaje.
- Duración de uso:** hasta 42 días. Un solo uso.
- Longitud de la sonda:** 50, 90 y 120 cm.
- Diámetros de la sonda:** Desde 5 Fr hasta 14 Fr.
- Norma ISO:** Conector ENFit® fabricado de acuerdo con la norma ISO 80369-3.
- Marca CE:** Cumple la Directiva Europea de Productos Sanitarios 93/42/CEE. Certificación CE emitida por un Organismo Notificado acreditado: TÜV SÜD (CE0123).
- Clasificación:** Clase IIb.
- Fabricante legal:** Cedic Srl, Via Liberazione 63/9, IT-20068 Peschiera Borromeo (MI).
- Sostenibilidad:** El sistema de gestión ambiental cumple con la norma ISO 14001:2015.
- Materiales:** conexiones: poliuretano. Conector ENFit®: copoliéster. Todos los materiales están libres de DEHP, BPA y látex¹. Detalles adicionales bajo solicitud.
- País de origen:** Fabricado en Italia.

1. No se añaden DEHP y BPA intencionadamente durante el proceso de fabricación. No están formuladas con látex de caucho natural.

Para obtener más información, consulte a su delegado Compat® o visite www.compat.com
*Salvo que se indique lo contrario, todas las marcas comerciales se utilizan con la debida autorización.

AXI00024 REV.1 05 DE ABRIL DE 2022