

Compat[®] Soft

Gamma Completa di Sonde Nasogastriche per Nutrizione in Poliuretano Morbido

Le sonde nasogastriche per nutrizione Compat[®] Soft dotate di connettori ENFit[®] sono progettate per pazienti pediatrici e adulti che necessitano di somministrazione enterale, intermittente o continua, di sostanze nutritive, fluidi o medicinali per via nasoenterica naturale.

● Panoramica delle Caratteristiche


Le sonde Compat[®] Soft sono progettate per aiutare ad aumentare il comfort del paziente.

Comfort del Paziente: Le sonde per nutrizione Compat[®] Soft hanno una durata di impiego massima di 42 giorni e sono realizzate in poliuretano, **un materiale rispettoso del paziente**, che si ammorbidisce con la temperatura corporea. La configurazione arrotondata dell'estremità distale della sonda ne consente un inserimento non traumatico e la presenza di un solo connettore ENFit[®] **contribuisce al comfort del paziente**.

Ausili per il Posizionamento: Le sonde sono dotate di contrassegni di profondità del posizionamento distanziati di 5 cm gli uni dagli altri, atti a valutare la profondità di inserimento e a controllare l'eventuale spostamento della sonda. È compreso un mandrino premontato per **facilitare il posizionamento** (opzionale). Il mandrino è lubrificato al fine di ridurre, durante la sua rimozione, il rischio di spostamento della sonda. È possibile procedere all'**iniezione di fluidi radio-opachi** o all'**aspirazione del contenuto gastrico senza rimuovere il mandrino**.

Sicurezza del Paziente: Le sonde nasogastriche per nutrizione Compat[®] Soft con connettori ENFit[®] sono progettate per non essere compatibili con i set per infusione endovenosa al fine di **promuovere la sicurezza del paziente** aiutando a evitare involontari collegamenti sbagliati. Tutte le sonde sono sterili e prive di DEHP, BPA e lattice¹.


● Informazioni per Gli Ordini

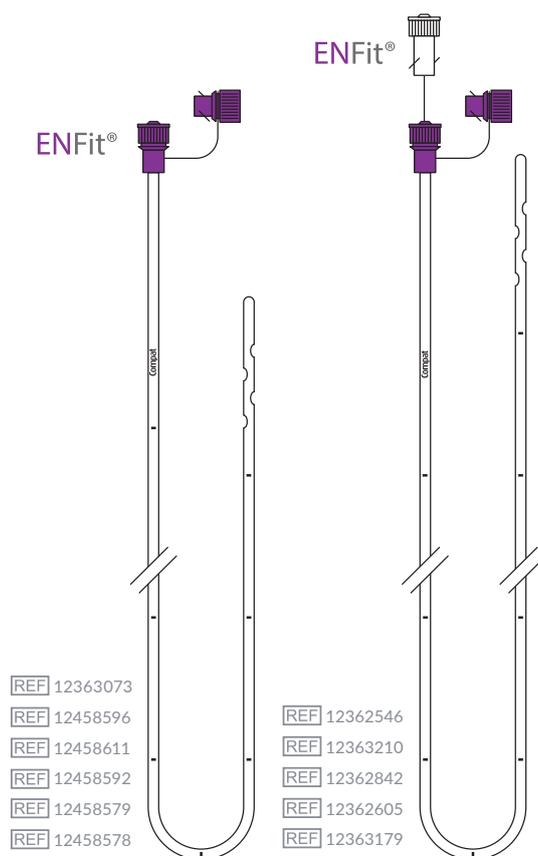

Nome prodotto	Codice prodotto	Calibro	Lunghezza	Sterile	Mandrino
Compat [®] Soft Junior 5FR 50 cm	12363073	5FR	50 cm	Si	No
Compat [®] Soft Junior 6FR 90 cm	12458596	6FR	90 cm		Si
Compat [®] Soft Junior 6FR 90 cm S	12362546				No
Compat [®] Soft 8FR 120 cm	12458611	8FR	120 cm		Si
Compat [®] Soft 8FR 120 cm S	12363210				No
Compat [®] Soft 10FR 120 cm	12458592	10FR	120 cm		Si
Compat [®] Soft 10FR 120 cm S	12362842				No
Compat [®] Soft 12FR 120 cm	12458579	12FR	120 cm		Si
Compat [®] Soft 12FR 120 cm S	12362605				No
Compat [®] Soft 14FR 120 cm	12458578	14FR	120 cm		Si
Compat [®] Soft 14FR 120 cm S	12363179				No

La Cura del Paziente. La Nostra Priorità.

Gamma Completa di Sonde Nasogastriche per Nutrizione in Poliuretano Morbido

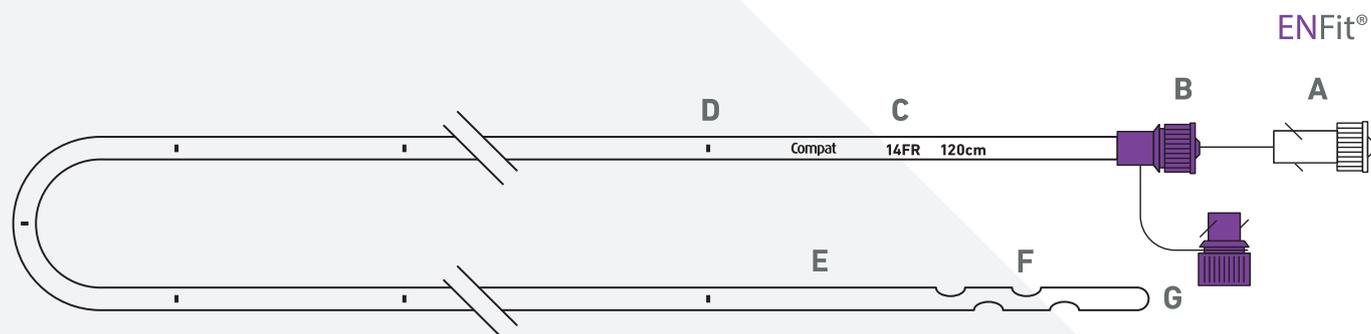

Componenti

- A Mandrino prelubrificato e a circuito aperto ENFit® (opzionale)
- B Connettore ENFit® con chiusura a rotazione provvisto di tappo
- C Identificazione del prodotto, calibro (FR) e lunghezza stampati sul tubo
- D Contrassegni di profondità di posizionamento distanziati di 5 cm
- E Tubo in poliuretano morbido radio-opaco
- F Fori sulle pareti laterali del tubo
- G Estremità distale arrotondata

Specifiche

- Sterile:** Sterilizzato con ossido di etilene (EO).
- Confezionamento:** Confezionato singolarmente in scatole da 10 pezzi (220 × 90 × 240 mm).
- Conservazione:** Conservare all'asciutto a temperatura ambiente e al riparo dalla luce solare.
- Durata:** 3 anni dalla data di produzione. Data di scadenza indicata sulla confezione.
- Durata di impiego:** Fino a 42 giorni. Monouso.
- Lunghezza della sonda:** 50, 90 e 120 cm.
- Diametro della sonda:** Da 5 a 14 FR.
- Standard ISO:** Connettore ENFit® conforme allo standard ISO 80369-3.
- Marchio CE:** Conforme alla direttiva europea 93/42/CEE concernente i dispositivi medici. Certificazione CE rilasciata da un organismo notificato accreditato: TÜV SÜD (CE0123).
- Classificazione:** Classe IIb.
- Fabbricante legale:** Cedic Srl, Via Liberazione 63/9, IT-20068 Peschiera Borromeo (MI).
- Sostenibilità:** Sistema di gestione ambientale conforme a ISO 14001:2015.
- Materiali:** Tubo in poliuretano. Connettore ENFit® in copoliestere. Tutti i materiali utilizzati sono privi di DEHP, BPA e lattice¹. Ulteriori dettagli disponibili su richiesta.
- Paese di origine:** Prodotto in Italia.

1. Non vengono intenzionalmente aggiunti DEHP e BPA durante il processo di fabbricazione. Non formulato con lattice di gomma naturale.

Per richiedere maggiori informazioni, contattare il rappresentante Compat® di fiducia o visitare il sito www.compat.com

[®] Se non diversamente specificato, tutti i marchi commerciali sono stati utilizzati previa autorizzazione.

AXI00024 REV.1 05 APRILE 2022