

Compat[®] Adapter

Adaptateur Compat[®] pour connexion de tubulures ENFit[®] aux sondes coniques US

L'adaptateur est destiné à relier une tubulure d'administration ENFit[®] à une sonde conique.

Aperçu des caractéristiques

L'adaptateur Compat[®] pour connexion de tubulures ENFit[®] aux sondes coniques US trouve sa place entre la tubulure d'administration et la sonde conique.

Utilisation facile : l'adaptateur Compat[®] pour connexion de tubulures ENFit[®] aux sondes coniques US est conçu pour **faciliter la transition vers ENFit[®]** en permettant aux sets d'administration entérale ENFit[®] d'être rendus compatibles avec les sondes de nutrition dotées de ports de drainage coniques traditionnels.

Raccords plus sûrs : l'adaptateur Compat[®] pour connexion de tubulures ENFit[®] aux sondes coniques US comprend un raccord ENFit[®] fabriqué conformément à la norme ISO 80369-3. Le raccord ENFit[®] est conçu pour être incompatible avec les perfusions intraveineuses afin de **favoriser la sécurité des patients** en évitant les erreurs de connexion accidentelles.

Sécurité des matériaux : l'adaptateur Compat[®] pour connexion de tubulures ENFit[®] aux sondes coniques US est fabriqué **sans DEHP, BPA ni latex***.

Compatibilité :

- Tubulures d'administration : ENFit[®]
- Sondes de nutrition entérale : type conique**




Informations de commande

Nom du produit	Code produit	Unité de vente/carton
Adaptateur Compat [®] pour connexion de tubulures ENFit [®] aux sondes coniques US	12298016	30 pcs

Les Soins aux Patients. Notre Priorité.

Adaptateur Compat® pour connexion de tubulures ENFit® aux sondes coniques US

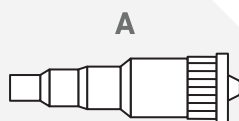

Composants

A Adaptateur pour connexion de tubulures ENFit® aux sondes coniques US

Spécifications

Stérilisation :	Produit non stérile.
Emballage :	Conditionné en blisters de 5 pièces. 30 pièces par boîte (11,5 × 9,5 × 9 cm).
Stockage :	Stocker à température ambiante. Conserver à l'abri de l'humidité et de la lumière du soleil.
Durée de conservation :	3 ans à compter de la date de production. La date d'expiration est marquée sur l'emballage.
Durée d'utilisation :	24 heures. Usage unique.
Norme ISO :	Raccord ENFit® fabriqué conformément à la norme ISO 80369-3.
Marquage CE :	Conforme au Règlement européen sur les dispositifs médicaux 2017/745.
Classification :	Classe I.
Fabricant légal :	Cedic Srl, Via Liberazione 63/9, IT-20068 Peschiera Borromeo (MI), Italie.
Développement durable :	Le système de gestion environnementale est conforme à la norme ISO 14001.
Matériaux :	Tous les matériaux sont sans DEHP, sans BPA et sans latex*. Détails supplémentaires disponibles sur demande.
Pays d'origine :	Fabriqué en Italie.

*Le DEHP et le BPA ne sont pas ajoutés intentionnellement au cours du processus de fabrication. Non formulé avec du latex de caoutchouc naturel.

**Certaines incompatibilités pourraient subsister.

Pour plus d'informations, veuillez contacter votre délégué(e) médical(e) Compat® ou visiter www.compat.com

*Sauf mention contraire, toutes les marques sont utilisées avec permission.
Ce document ne remplace pas la notice d'utilisation qui doit être lue avant emploi.

AXI01702 Rév.0 27 Novembre 2025

Compat®