

Compat[®] Adapter

Adaptador Compat[®] para conectar conjuntos ENFit[®] a sondas com conector cônico (EUA)

O Adaptador Compat[®] para conectar conjuntos ENFit[®] a sondas com conector cônico (EUA) é destinado a conectar um conjunto de administração com conector ENFit[®] a uma sonda com conector cônico.

Características principais

O Adaptador Compat[®] para conectar conjuntos ENFit[®] a sondas com conector cônico (EUA) é colocado entre o conjunto de administração e a sonda de alimentação.

Facilidade de uso: O Adaptador Compat[®] para conectar conjuntos ENFit[®] a sondas com conector cônico (EUA) foi desenvolvido para **facilitar a transição para o conector ENFit[®]** permitindo a compatibilidade entre os conjuntos de administração ENFit[®] e as sondas de alimentação com conectores tipo funil antigos.

Conectores mais seguros: O Adaptador Compat[®] para conectar conjuntos ENFit[®] a sondas com conector cônico (EUA) inclui um conector ENFit[®] fabricado de acordo com a norma ISO 80369-3. ENFit[®] é projetado para ser incompatível com IV para ajudar a **promover a segurança do paciente** e evitar conexões indevidas acidentais.

Materiais seguros: O Adaptador Compat[®] para conectar conjuntos ENFit[®] a sondas com conector cônico (EUA) é isento de DEHP, BPA e Látex*.

Compatibilidade:

- Conjuntos de administração: ENFit[®]
- Sondas de alimentação enteral: com conector cônico**




Informações para pedido

Nome do Produto	Código do Produto	Qtd./Caixa
Adaptador Compat [®] para conectar conjuntos ENFit [®] a sondas com conector cônico (EUA)	12298016	30 itens

Cuidados com o paciente. Nossa prioridade.

Adaptador Compat® para conectar conjuntos ENFit® a sondas com conector cônico (EUA)

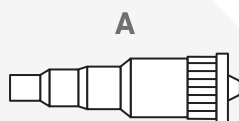

Componentes

A Adaptador para conectar conjuntos ENFit® a sondas com conector cônico (EUA)

Especificações

Esterilização:	Produto não estéril.
Embalagem:	Embalado em blisters de 5 itens. 30 itens por caixa (11,5 x 9,5 x 9 cm).
Armazenamento:	Armazenar em temperatura ambiente. Manter afastado da luz solar e da umidade.
Prazo de validade:	3 anos a partir da data de produção. Data de validade indicada na embalagem.
Duração de utilização:	24 horas. Para uso único.
Norma ISO:	Conector ENFit® fabricado de acordo com a norma ISO 80369-3.
Marca CE:	Em conformidade com o Regulamento Europeu de Dispositivos Médicos 2017/745.
Classificação:	Classe I.
Fabricante legal:	Cedic Srl, Via Liberazione 63/9, IT-20068 Peschiera Borromeo (MI), Itália.
Sustentabilidade:	Sistema de gestão ambiental em conformidade com a norma ISO 14001.
Materiais:	Todos os materiais são isentos de DEHP, BPA e látex*. Informações adicionais a pedido.
País de origem:	Fabricado na Itália.

*DEHP: não adicionado intencionalmente durante o processo de fabricação. Não formulado com BPA ou látex de borracha natural.

**Podem existir algumas incompatibilidades.

Para obter mais informações, entre em contato com seu representante da Compat® ou acesse www.compat.com

*Salvo indicação em contrário, todas as marcas registradas são utilizadas com permissão.
Esse documento não substitui as Instruções de Uso originais que devem ser lidas antes do uso.

AXI01702 Rev0 15 DE JANEIRO DE 2026

Compat®