

Compat[®] Adapter

Sistema escalonado Compat[®] Adapter > Sonda ENFit[®]

El Sistema escalonado Compat[®] Adapter > Sonda ENFit[®] está diseñado para conectar una sonda de nutrición ENFit[®] con un sistema de administración escalonado, una jeringa con punta de catéter grande o un dispositivo de drenaje/aspiración gástrica.

Características generales

El Sistema escalonado Compat[®] Adapter > Sonda ENFit[®] se coloca entre la sonda de nutrición y el sistema de administración, la jeringa o el dispositivo de drenaje/aspiración gástrica.


Uso sencillo: El Sistema escalonado Compat[®] Adapter > Sonda ENFit[®] está diseñado para **facilitar la transición a ENFit[®]**, ya que permite la compatibilidad entre las sondas de nutrición ENFit[®] y la mayoría de los sistemas de administración dotados de un extremo distal escalonado. También es compatible con la mayoría de los sistemas de drenaje o aspiración **para facilitar el control del volumen de residuo gástrico**.

Conectores más seguros: El Sistema escalonado Compat[®] Adapter > Sonda ENFit[®] incluye un conector ENFit[®] fabricado de conformidad con la norma ISO 80369-3. ENFit[®] está diseñado para ser incompatible con la administración IV con el objetivo de ayudar a **incrementar la seguridad del paciente** impidiendo errores de conexión accidentales.

Materiales seguros: El Sistema escalonado Compat[®] Adapter > Sonda ENFit[®] no contiene **DEHP, BPA ni látex***.

Compatibilidad:

- Sondas de nutrición enteral: ENFit[®]
- Sistemas de administración: Escalonados, ENLock
- Jeringas: Punta de catéter grande, ENLock
- Dispositivos de drenaje/aspiración: Tipo embudo**

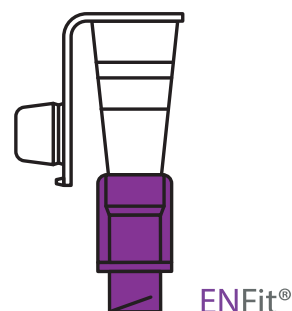


Información de pedido

Descripción	Código	Unidad de venta
Sistema escalonado Compat [®] Adapter > Sonda ENFit [®]	12319560	30 unidades

El cuidado del paciente, nuestra prioridad.

Sistema escalonado Compat® Adapter > Sonda ENFit®

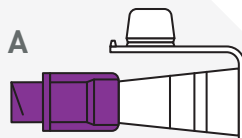

Componentes

A Sistema escalonado Adapter con tapón

Especificaciones técnicas

Esterilización:	Producto no estéril.
Embalaje:	Embalado individualmente en cajas de 30 unidades (19 × 19 × 10 cm).
Almacenaje:	Almacenar a temperatura ambiente. Mantener alejado del sol y la humedad.
Periodo de conservación:	3 años a partir de la fecha de producción.
Duración de uso:	24 horas. Un solo uso.
Norma ISO:	Conector ENFit® fabricado de conformidad con la norma ISO 80369-3.
Marca CE:	Cumple el Reglamento Europeo sobre Productos Sanitarios 2017/745.
Clasificación:	Clase I.
Fabricante legal:	Cedic Srl, Via Liberazione 63/9, IT-20068 Peschiera Borromeo (MI), Italia.
Sostenibilidad:	El sistema de gestión ambiental cumple con la norma ISO 14001:2015.
Materiales:	Todos los materiales están libres de DEHP, BPA y látex*. Detalles adicionales bajo solicitud.
País de origen:	Fabricado en Italia.

*DEHP: no añadido intencionadamente durante el proceso de fabricación. No contiene BPA ni goma natural (látex).

**Pueden existir ciertas incompatibilidades.

Para obtener más información, consulte a su delegado Compat® o visite www.compat.com

*Salvo que se indique lo contrario, todas las marcas comerciales se utilizan con la debida autorización.
Este documento no sustituye a las Instrucciones de Uso originales, que deben leerse antes de la utilización.

AXI01534 Rev0, 15 DE ENERO DE 2026

Compat®