

Compat[®] Adapter

Adaptateur cranté Compat[®] pour connexion aux sondes ENFit[®]

L'adaptateur cranté Compat[®] pour connexion aux sondes ENFit[®] est destiné à relier une sonde de nutrition ENFit[®] à une tubulure d'administration à embout cranté, une seringue à embout de cathéter grande taille ou un dispositif d'aspiration / drainage gastrique.

● Aperçu des caractéristiques

L'adaptateur cranté Compat[®] pour connexion aux sondes ENFit[®] trouve sa place entre la sonde de nutrition et la tubulure d'administration, la seringue ou le dispositif d'aspiration / drainage gastrique.


Utilisation facile : l'adaptateur cranté Compat[®] pour connexion aux sondes ENFit[®] est conçu pour **faciliter la transition vers ENFit[®]** en assurant la compatibilité entre les sondes de nutrition ENFit[®] et la plupart des tubulures d'administration munies d'administration munis d'extrémité distale crantée. Il est également compatible avec la plupart des systèmes de drainage ou d'aspiration **pour une gestion simplifiée du volume résiduel gastrique.**

Raccords plus sûrs : l'adaptateur cranté Compat[®] pour connexion aux sondes ENFit[®] comprend un raccord ENFit[®] fabriqué conformément à la norme ISO 80369-3. Le raccord ENFit[®] est conçu pour être incompatible avec les perfusions intraveineuses afin de **favoriser la sécurité des patients** en évitant les erreurs de connexion accidentelles.

Sécurité des matériaux : l'adaptateur cranté Compat[®] pour connexion aux sondes ENFit[®] est **fabriqué sans DEHP, BPA ni latex***.

Compatibilité :

- Sondes de nutrition entérale : ENFit[®]
- Tubulures d'administration : type cranté, ENLock
- Seringues : embout de cathéter de grande taille, ENLock
- Dispositifs d'aspiration / drainage : type conique**

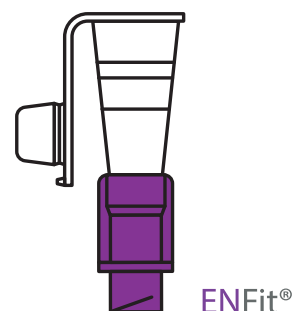


● Informations de commande

Nom du produit	Code produit	Unité de vente/carton
Adaptateur cranté Compat [®] pour connexion aux sondes ENFit [®]	12319560	30 pcs

Les Soins aux Patients. Notre Priorité.

Adaptateur cranté Compat® pour connexion aux sondes ENFit®

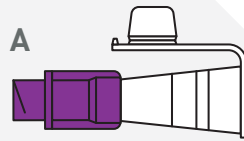

Composants

A Adaptateur cranté avec capuchon

Spécifications

Stérilisation :	Produit non stérile.
Emballage :	Emballage individuel en boîtes de 30 pièces (19 x 19 x 10 cm).
Stockage :	Stocker à température ambiante. Conserver à l'abri de l'humidité et de la lumière du soleil.
Durée de conservation :	3 ans à compter de la date de production. La date d'expiration est marquée sur l'emballage.
Durée d'utilisation :	24 heures. Usage unique.
Norme ISO :	Raccord ENFit® fabriqué conformément à la norme ISO 80369-3.
Marquage CE :	Conforme au Règlement européen sur les dispositifs médicaux 2017/745.
Classification :	Classe I.
Fabricant légal :	Cedic Srl, Via Liberazione 63/9, IT-20068 Peschiera Borromeo (MI), Italie.
Développement durable :	Le système de gestion environnementale est conforme à la norme ISO 14001:2015.
Matériaux :	Tous les matériaux sont sans DEHP, sans BPA et sans latex*. Détails supplémentaires disponibles sur demande.
Pays d'origine :	Fabriqué en Italie.

*Le DEHP et le BPA ne sont pas ajoutés intentionnellement au cours du processus de fabrication. Non formulé avec du latex de caoutchouc naturel.

**Certaines incompatibilités pourraient subsister.

Pour plus d'informations, veuillez contacter votre délégué(e) médical(e) Compat® ou visiter www.compat.com

*Sauf mention contraire, toutes les marques sont utilisées avec permission.
Ce document ne remplace pas la notice d'utilisation qui doit être lue avant emploi.

AXI01534 Rév.0 27 Novembre 2025

Compat®