

# Compat<sup>®</sup> Adapter

## Compat<sup>®</sup> Adapter - Set con Connettore Multiconico > Sonda ENFit<sup>®</sup>

Questo adattatore è concepito per il collegamento di una sonda per nutrizione ENFit<sup>®</sup> a un set di somministrazione con connettore multiconico, a una siringa con punta catetere grande o a un dispositivo di drenaggio/aspirazione gastrico.

### *Panoramica delle Caratteristiche*

L'adattatore Compat<sup>®</sup> Adapter Set con connettore multiconico > Sonda ENFit<sup>®</sup> deve essere posizionato tra la sonda per nutrizione e il set di somministrazione, la siringa o il dispositivo di drenaggio/aspirazione gastrico.


**Facilità di Utilizzo:** Questo adattatore è progettato per semplificare la transizione allo standard ENFit<sup>®</sup> rendendo compatibili con le sonde per nutrizione ENFit<sup>®</sup> la maggior parte dei set di somministrazione dotati di connettore multiconico all'estremità distale, ed è compatibile con la maggior parte dei sistemi di drenaggio o aspirazione per agevolare la gestione del volume gastrico residuo.

**Connettori più Sicuri:** L'adattatore Compat<sup>®</sup> Adapter Set con connettore multiconico > Sonda ENFit<sup>®</sup> comprende un connettore ENFit<sup>®</sup> realizzato in conformità allo standard ISO 80369-3. I connettori ENFit<sup>®</sup> sono studiati per non essere compatibili con i set per infusione endovenosa al fine di tutelare la sicurezza del paziente aiutando a evitare involontari collegamenti sbagliati.

**Materiali Sicuri:** Questo prodotto è privo di DEHP, BPA e lattice\*.

#### **Compatibilità:**

- Sonde per nutrizione enterale: ENFit<sup>®</sup>
- Set di somministrazione: con connettore multiconico, ENLock
- Siringhe: con punta catetere grande, ENLock
- Dispositivi di drenaggio/aspirazione: con connettore a imbuto\*\*

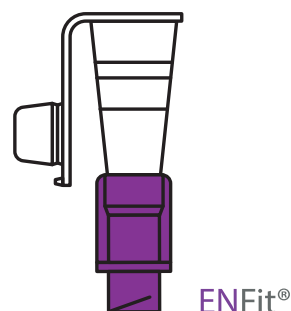


### *Informazioni per gli Ordini*

Nome Prodotto	Codice Prodotto	N. pezzi/conf.
Compat <sup>®</sup> Adapter - Set con Connettore Multiconico > Sonda ENFit <sup>®</sup>	12319560	30 pezzi

*La Cura del Paziente. La Nostra Priorità.*

# Compat® Adapter - Set con Connettore Multiconico > Sonda ENFit®

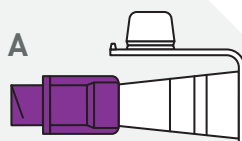

## Componenti

**A** Adattatore multiconico con tappo

## Specifiche

<b>Sterilizzazione:</b>	Prodotto non sterile.
<b>Confezionamento:</b>	Confezionato singolarmente in scatole da 30 pezzi (19 × 19 × 10 cm).
<b>Conservazione:</b>	Conservare a temperatura ambiente. Tenere al riparo dalla luce solare e dall'umidità.
<b>Durata:</b>	3 anni dalla data di produzione. Data di scadenza indicata sulla confezione.
<b>Durata di impiego:</b>	24 ore. Monouso.
<b>Standard ISO:</b>	Connettore ENFit® conforme allo standard ISO 80369-3.
<b>Marchio CE:</b>	Conforme al Regolamento europeo 2017/745 relativo ai dispositivi medici (MDR).
<b>Classificazione:</b>	Classe I.
<b>Fabbricante legale:</b>	Cedic Srl, Via Liberazione 63/9, IT-20068 Peschiera Borromeo (MI).
<b>Sostenibilità:</b>	Sistema di gestione ambientale conforme a ISO 14001:2015.
<b>Materiali:</b>	Tutti i materiali utilizzati sono privi di DEHP, BPA e lattice*. Ulteriori dettagli disponibili su richiesta.
<b>Paese di origine:</b>	Prodotto in Italia.

\* DEHP: non intenzionalmente aggiunto durante il processo di produzione. Non formulato con BPA o lattice di gomma naturale.

\*\* Non sono escluse alcune incompatibilità.

Per richiedere maggiori informazioni, contattare il rappresentante Compat® di fiducia o visitare il sito [www.compat.com](http://www.compat.com)

\* Se non diversamente specificato, tutti i marchi commerciali sono stati utilizzati previa autorizzazione. Questo documento non sostituisce le Istruzioni per l'uso originali, che devono essere lette prima dell'uso.

AXI01534 Rev0 19 SETTEMBRE 2024