

Compat[®] Adapter

Compat[®] Adapter stegvis uppsättning > ENFit[®] slang

Compat[®] Adaptersats med steg > ENFit[®] slang är avsedd att ansluta en ENFit[®]-matningsslang till en administreringsset med steg, en spruta med stor kateterspets eller en magdränerings/suganordning.

Kortfattad beskrivning

Compat[®] Adaptersats med steg > ENFit[®] slang placeras mellan sonden och administreringssetet, sprutan eller magdränerings-/suganordningen.


Lätt att använda: Compat[®] Adaptersats med steg > ENFit[®] slang är utformad för att underlätta övergången till ENFit[®] genom att möjliggöra kompatibilitet mellan ENFit[®] matningsslangar och de flesta administrationssatser som är utrustade med en stegad distala ände. Den är också kompatibel med de flesta dränerings- eller aspirationssystem för att underlätta hanteringen av gastrisk restvolym.

Säkrare anslutningar: Compat[®] Adaptersats med steg > ENFit[®] slang innehåller en ENFit[®] anslutning tillverkad enligt ISO 80369-3. ENFit[®] är utformat för att vara IV-inkompatibelt i syfte att främja patientsäkerheten genom att hjälpa till med att undvika oavsiktliga felkopplingar.

Säkra material: Compat[®] Adaptersats med steg > ENFit[®] slang är DEHP-, BPA- och latexfri*.

Kompatibilitet:

- Rör för enteral näringstillförsel: ENFit[®]
- Administreringsset: Stegad, ENLock
- Sprutor: Stor kateterspets, ENLock
- Dränerings/suganordningar: Tratt**

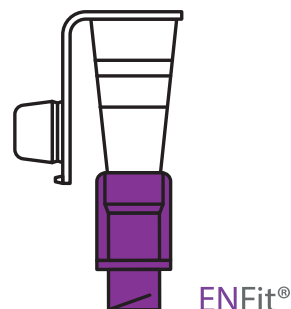


Beställningsinformation

Produktnamn	Produktkod	Antal/Förpackning
Compat [®] Adapter stegvis uppsättning > ENFit [®] slang	12319560	30 st.

Patientvård. Vår prioritet.

Compat® Adapter stegvis uppsättning > ENFit® slang

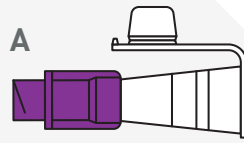

Komponenter

A Adapterstegset med lock

Specifikationer

Sterilisering:	Icke-steril produkt.
Förpackning:	Individuellt förpackade i lådor om 30 stycken (19 × 19 × 10 cm).
Förvaring:	Förvaras i rumstemperatur. Förvaras skyddat mot solljus och fukt.
Hållbarhetstid:	3 år från tillverkningsdatumet. Utgångsdatum på förpackningen.
Användningstid:	24 timmar. För engångsbruk.
ISO-standard:	ENFit®-koppling tillverkad enligt ISO 80369-3.
CE-märkning:	Överensstämmer med den europeiska förordningen om medicintekniska produkter 2017/745.
Klassificering:	Klass I.
Laglig tillverkare:	Cedic Srl, Via Liberazione 63/9, IT-20068 Peschiera Borromeo (MI), Italien.
Hållbarhet:	Miljöledningssystemet uppfyller kraven i ISO 14001:2015.
Material:	Alla material är DEHP-, BPA- och latexfria*. Extra detaljer på begäran.
Ursprungsland:	Tillverkad i Italien.

*DEHP: Har inte lagts till med avsikt under tillverkningsprocessen. Ej utformad med BPA eller naturgummilatex.

**Vissa inkompatibiliteter kan förekomma.

För mer information genom att kontakta din Compat®-representant eller besök www.compat.com

*Om inte annat anges används alla varumärken med tillstånd.
Detta dokument ersätter inte den ursprungliga bruksanvisningen som måste läsas före användning.

AXI01534 Rev0 15 JANUARI 2026

Compat®