

Compat[®] Adapter

Compat[®] Adapter ENFit[®] an Oral-/Luer-Spritze

Der Compat[®] Adapter ENFit[®] an Oral-/Luer-Spritze dient zum Anschluss einer enteralen Oral-, Luer- oder ENLock-Spritze an ein enterales Überleitset, das mit einem ENFit[®]-Medikamentenport ausgestattet ist. Er ist auch für die Verwendung mit einer Ernährungssonde mit ENFit[®]-Anschluss vorgesehen.

Merkmale auf einen Blick

Der Compat[®] Adapter ENFit[®] an Oral-/Luer-Spritze wird zwischen der Ernährungssonde und der Spritze oder zwischen dem Medikamentenport und der Spritze angebracht.


Einfache Anwendung: Der Compat[®] Adapter ENFit[®] an Oral-/Luer-Spritze wurde entwickelt, **um den Übergang zu ENFit[®] zu erleichtern**, indem er die Kompatibilität zwischen ENFit[®] Medikamentenports und Ernährungssonden mit herkömmlichen Spritzen ermöglicht.

Sichere Anschlüsse: Der Compat[®] Adapter ENFit[®] an Oral-/Luer-Spritze verfügt über einen ENFit[®]-Anschluss gemäß ISO 80369-3. ENFit[®] ist so konzipiert, dass er nicht mit intravenösen Systemen kompatibel ist, um **die Patientensicherheit zu erhöhen** und versehentliche Fehlanlüsse zu verhindern.

Sichere Materialien: Der Compat[®] Adapter ENFit[®] an Oral-/Luer-Spritze ist **steril und frei von DEHP, BPA und Latex***.

Kompatibilität:

- Enterale Ernährungssonden: ENFit[®]
- Medikamentenport: ENFit[®]
- Spritzen: ENLock, Oral, Luer

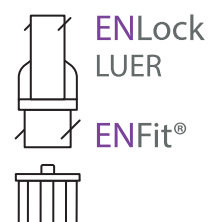


Bestellinformationen

Produktname	Artikelnummer	Menge/Packung
Compat [®] Adapter ENFit [®] an Oral-/Luer-Spritze	12459535	30 Stk.

Patientenversorgung ist unsere Priorität.

Compat® Adapter ENFit® an Oral-/Luer-Spritze

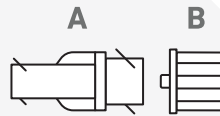

Komponenten

- A Oral-/Luer-Adapter
- B Abnehmbare Kappe

Spezifikationen

Sterilisation:	Sterilisiert mit Ethylenoxid (EO).
Verpackung:	Einzelverpackt in Kartons zu je 30 Stück (11,5 x 9,5 x 9 cm).
Lagerung:	Bei Raumtemperatur lagern. Vor Sonnenlicht und Feuchtigkeit schützen.
Haltbarkeit:	3 Jahre ab Herstellungsdatum. Verfallsdatum auf der Verpackung.
Gebrauchsdauer:	24 Stunden. Einmalgebrauch.
ISO-Norm:	ENFit®-Anschluss gemäß ISO 80369-3.
CE-Kennzeichnung:	Entspricht der europäischen Richtlinie 93/42/EWG über Medizinprodukte. Die CE-Kennzeichnung wurde von einer akkreditierten Prüfstelle ausgestellt: TÜV SÜD (CE0123).
Klassifizierung:	Klasse Is.
Legal-Hersteller:	Cedic S.r.l., Via Liberazione 63/9, IT-20068 Peschiera Borromeo (MI).
Nachhaltigkeit:	Das Umweltmanagementsystem entspricht der Norm ISO 14001:2015.
Materialien:	Alle Materialien sind frei von DEHP, BPA und Latex*. Weitere Details auf Anfrage.
Ursprungsland:	Hergestellt in Italien.

*DEHP: Nicht absichtlich während des Herstellungsprozesses zugesetzt. BPA- und Naturkautschuklatex-frei.
Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren Compat®-Vertreter oder besuchen Sie www.compat.com.
*Soweit nicht anders angegeben, werden alle Markenzeichen mit Genehmigung verwendet.
Dieses Dokument ist kein Ersatz für die Original-Gebrauchsanweisung, die vor dem Gebrauch gelesen werden muss.

AXI01535 REV0 15. JANUAR 2026

Compat®