

Compat[®] Adapter

Adaptador Compat[®] Adapter ENFit[®] a Jeringa Oral/Luer

El adaptador Compat[®] Adapter ENFit[®] a Jeringa Oral/Luer está diseñado para conectar una jeringa enteral Oral, Luer o ENLock a un sistema de administración enteral dotado de puerto de medicación ENFit[®]. También está previsto su uso con una sonda de nutrición dotada de conector ENFit[®].

Características generales

El adaptador Compat[®] Adapter ENFit[®] a Jeringa Oral/Luer se coloca entre la sonda de nutrición y la jeringa o entre el puerto de medicación y la jeringa.


Uso sencillo: El adaptador Compat[®] Adapter ENFit[®] a Jeringa Oral/Luer está diseñado para **facilitar la transición a ENFit[®]**, ya que permite la compatibilidad entre los puertos de medicación ENFit[®] y las sondas de nutrición con jeringas preexistentes.

Conectores más seguros: El adaptador Compat[®] Adapter ENFit[®] a Jeringa Oral/Luer dispone de conexión ENFit[®] de conformidad con la norma ISO 80369-3. ENFit[®] está diseñado para ser incompatible con la administración IV, con el objetivo de **incrementar la seguridad del paciente** e impedir errores de conexión accidentales.

Materiales seguros: El adaptador Compat[®] Adapter ENFit[®] a Jeringa Oral/Luer es **estéril y no contiene DEHP, BPA ni látex***.

Compatibilidad:

- Sondas de nutrición enteral: ENFit[®]
- Puerto de medicación: ENFit[®]
- Jeringas: ENLock, Oral, Luer

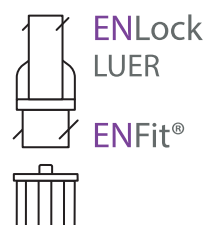


Información de pedido

Descripción	Código	Unidad de venta
Adaptador Compat [®] Adapter ENFit [®] a Jeringa Oral/Luer	12459535	30 unidades

El cuidado del paciente, nuestra prioridad.

Adaptador Compat® Adapter ENFit® a Jeringa Oral/Luer

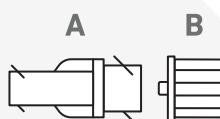

Componentes

- A Adaptador Oral/Luer
- B Tapón extraíble

Especificaciones técnicas

Esterilización:	Producto esterilizado con óxido de etileno (EO).
Embalaje:	Embalado individualmente en cajas de 30 unidades (11,5 x 9,5 x 9 cm).
Almacenaje:	Almacenar a temperatura ambiente. Mantener alejado del sol y la humedad.
Periodo de conservación:	3 años a partir de la fecha de producción.
Duración de uso:	24 horas. Un solo uso.
Norma ISO:	Conector ENFit® fabricado de conformidad con la norma ISO 80369-3.
Marca CE:	Cumple la Directiva Europea de Productos Sanitarios 93/42/CEE. Certificación CE emitida por un Organismo Notificado acreditado: TÜV SÜD (CE0123).
Clasificación:	Is.
Fabricante legal:	Cedic Srl, Via Liberazione 63/9, IT-20068 Peschiera Borromeo (MI), Italia.
Sostenibilidad:	El sistema de gestión ambiental cumple con la norma ISO 14001:2015.
Materiales:	Todos los materiales están libres de DEHP, BPA y látex*. Detalles adicionales bajo solicitud.
País de origen:	Fabricado en Italia.

*DEHP: no añadido intencionadamente durante el proceso de fabricación. No contiene BPA ni goma natural (látex).

Para obtener más información, consulte a su delegado Compat® o visite www.compat.com

*Salvo que se indique lo contrario, todas las marcas comerciales se utilizan con la debida autorización. Este documento no sustituye a las Instrucciones de Uso originales, que deben leerse antes de la utilización.

AXI01535 REV0, 15 DE ENERO DE 2026

Compat®