

Compat[®] Adapter

Adaptateur ENFit[®] Compat[®] pour seringue Oral / Luer

L'adaptateur ENFit[®] Compat[®] pour seringue Oral / Luer est destiné à raccorder une seringue entérale Oral, Luer ou ENLock à un set d'administration entérale équipé d'un orifice d'injection du médicament ENFit[®]. Il est également conçu pour être utilisé avec une sonde de nutrition dotée d'un raccord ENFit[®].

Aperçu des caractéristiques

L'adaptateur ENFit[®] Compat[®] pour seringue Oral / Luer trouve sa place entre la sonde de nutrition et la seringue ou entre l'orifice d'injection du médicament et la seringue.


Utilisation facile : l'adaptateur ENFit[®] Compat[®] pour seringue Oral / Luer est conçu pour **faciliter la transition vers ENFit[®]** en permettant aux orifices d'injection de médicament ENFit[®] d'être rendus compatibles avec les sondes de nutrition dotées de seringues traditionnelles.

Raccords plus sûrs : l'adaptateur ENFit[®] Compat[®] pour seringue Oral / Luer comprend une connexion ENFit[®] conforme à la norme ISO 80369-3. Le raccord ENFit[®] est conçu pour être incompatible avec les perfusions intraveineuses afin de **favoriser la sécurité des patients** en évitant les erreurs de connexion accidentelles.

Sécurité des matériaux : l'adaptateur ENFit[®] Compat[®] pour seringue Oral / Luer est **stérile et fabriqué sans DEHP, BPA ni latex***.

Compatibilité :

- Sondes de nutrition entérale : ENFit[®]
- Orifice d'injection de médicament : ENFit[®]
- Seringues : type ENLock, Oral, Luer

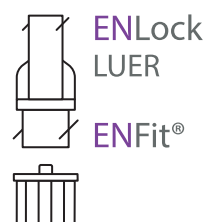


Informations de commande

Nom du produit	Code produit	Unité de vente / carton
Adaptateur ENFit [®] Compat [®] pour seringue Oral / Luer	12459535	30 pcs

Les Soins aux Patients. Notre Priorité.

Adaptateur ENFit® Compat® pour seringue Oral / Luer

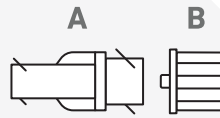

Composants

- A Adaptateur Oral / Luer
- B Capuchon amovible

Spécifications

Stérilisation :	Stérilisation à l'oxyde d'éthylène (OE).
Emballage :	Emballage individuel en boîtes de 30 pièces (11,5 x 9,5 x 9 cm).
Stockage :	Stocker à température ambiante. Conserver à l'abri de l'humidité et de la lumière du soleil.
Durée de conservation :	3 ans à compter de la date de production. La date d'expiration est marquée sur l'emballage.
Durée d'utilisation :	24 heures. Usage unique.
Norme ISO :	Raccord ENFit® fabriqué conformément à la norme ISO 80369-3.
Marquage CE :	Conforme à la Directive européenne sur les dispositifs médicaux 93/42/CEE. Une certification CE a été délivrée par un Organisme notifié accrédité : TÜV SÜD (CE0123).
Classification :	Classe Is.
Fabricant légal :	Cedic Srl, Via Liberazione 63/9, IT-20068 Peschiera Borromeo (MI), Italie.
Développement durable :	Le système de gestion environnementale est conforme à la norme ISO 14001:2015.
Matériaux :	Tous les matériaux sont sans DEHP, sans BPA et sans latex*. Détails supplémentaires disponibles sur demande.
Pays d'origine :	Fabriqué en Italie.

*DEHP : aucun ajout volontaire au cours du processus de production. Ne contient pas de BPA ni de latex de caoutchouc naturel.

Pour plus d'informations, veuillez contacter votre délégué(e) médical(e) Compat® ou visiter www.compat.com

*Sauf mention contraire, toutes les marques sont utilisées avec permission.
Ce document ne remplace pas la notice d'utilisation qui doit être lue avant emploi.

AXI01535 RÉV.0 15 JANVIER 2026

Compat®