

Compat[®] Adapter

Adattatore Compat[®] ENFit[®] per siringhe Oral/Luer

L'adattatore Compat[®] ENFit[®] per siringhe Oral/Luer è destinato al collegamento di una siringa enterale Oral, Luer o ENLock a un deflussore enterale dotato di porta ENFit[®] per la somministrazione di medicinali. È inoltre pensato per essere utilizzato con una sonda per nutrizione dotata di connettore ENFit[®].

Panoramica delle caratteristiche

L'adattatore Compat[®] ENFit[®] per siringhe Oral/Luer si posiziona tra la sonda per nutrizione e la siringa oppure tra la porta per la somministrazione di medicinali e la siringa.


Facilità di utilizzo: l'adattatore Compat[®] ENFit[®] per siringhe Oral/Luer è progettato per **semplificare la transizione allo standard ENFit[®]**, favorendo la compatibilità tra le porte per la somministrazione di medicinali e le sonde per nutrizione dotate di connettore ENFit[®] e le siringhe di vecchio tipo.

Connettori più sicuri: l'adattatore Compat[®] ENFit[®] per siringhe Oral/Luer presenta un connettore ENFit[®] in conformità allo standard ISO 80369-3. I connettori ENFit[®] sono studiati per essere incompatibili con i set per infusione endovenosa, al fine di **migliorare la sicurezza del paziente** riducendo il rischio di errori di collegamento accidentali.

Materiali sicuri: l'adattatore Compat[®] ENFit[®] per siringhe Oral/Luer è **sterile e privo di DEHP, BPA e lattice***.

Compatibilità:

- Sonde per nutrizione enterale: ENFit[®]
- Porta per la somministrazione di medicinali: ENFit[®]
- Siringhe: ENLock, Oral, Luer

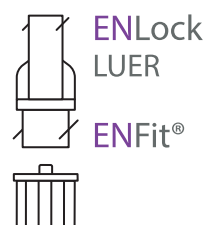


Informazioni per gli ordini

Nome prodotto	Codice prodotto	N. pezzi/conf.
Adattatore Compat [®] ENFit [®] per siringhe Oral/Luer	12459535	30 pezzi

La cura del paziente. La nostra priorità.

Adattatore Compat® ENFit® per siringhe Oral/Luer

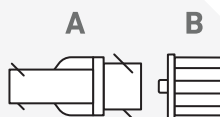

Componenti

- A Adattatore Oral/Luer
- B Tappo rimovibile

Specifiche

Sterilizzazione:	sterilizzazione con ossido di etilene (EO).
Confezionamento:	confezionato singolarmente in scatole da 30 pezzi (11,5 × 9,5 × 9 cm).
Conservazione:	conservare a temperatura ambiente. Tenere al riparo dalla luce solare e dall'umidità.
Durata:	3 anni dalla data di produzione. Data di scadenza indicata sulla confezione.
Durata di impiego:	24 ore. Monouso.
Standard ISO:	connettore ENFit® conforme allo standard ISO 80369-3.
Marchio CE:	conforme alla direttiva europea 93/42/CEE concernente i dispositivi medici. Certificazione CE rilasciata da un organismo notificato accreditato: TÜV SÜD (CE0123).
Classificazione:	classe Is.
Fabbricante legale:	Cedic Srl, Via Liberazione 63/9, IT-20068 Peschiera Borromeo (MI).
Sostenibilità:	sistema di gestione ambientale conforme a ISO 14001:2015.
Materiali:	tutti i materiali utilizzati sono privi di DEHP, BPA e lattice*. Ulteriori dettagli disponibili su richiesta.
Paese di origine:	prodotto in Italia.

* DEHP: non intenzionalmente aggiunto durante il processo di produzione. Non formulato con BPA o lattice di gomma naturale.

Per richiedere maggiori informazioni, contattare il rappresentante Compat® di fiducia o visitare il sito www.compat.com

® Se non diversamente specificato, tutti i marchi commerciali sono stati utilizzati previa autorizzazione.
Questo documento non sostituisce le Istruzioni per l'uso originali, che devono essere lette prima dell'uso.

AXI01535 REV0 15 gennaio 2026

Compat®