

Compat[®] Adapter

Adaptador Compat[®] ENFit[®] para Seringa Oral/Luer

O Adaptador Compat[®] ENFit[®] para Seringa Oral/Luer é destinado a conectar uma seringa enteral Oral, Luer ou ENLock a um conjunto de administração enteral equipado com uma porta de medicação ENFit[®]. Também se destina ao uso com uma sonda de alimentação com conector ENFit[®].

Características principais

O Adaptador Compat[®] ENFit[®] para Seringa Oral/Luer é posicionado entre a sonda de alimentação e a seringa ou entre a porta de medicação e a seringa.


Facilidade de uso: O Adaptador Compat[®] ENFit[®] para Seringa Oral/Luer é projetado para **facilitar a transição para ENFit[®]**, permitindo a compatibilidade entre as portas de medicação ENFit[®] e as sondas de alimentação e as seringas existentes.

Conectores mais seguros: O Adaptador Compat[®] ENFit[®] para Seringa Oral/Luer inclui uma conexão ENFit[®] de acordo com ISO 80369-3. ENFit[®] é projetado para ser incompatível com IV para ajudar a **promover a segurança do paciente** e evitar conexões indevidas acidentais.

Materiais seguros: O Adaptador Compat[®] ENFit[®] para Seringa Oral/Luer é **estéril e isento de DEHP, BPA e látex***.

Compatibilidade:

- Sondas de alimentação enteral: ENFit[®]
- Porta de medicação: ENFit[®]
- Seringas: ENLock, Oral, Luer

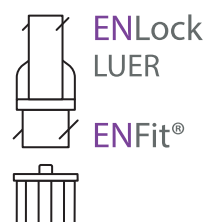


Informações para pedido

Nome do Produto	Código do Produto	Qtd./Caixa
Adaptador Compat [®] ENFit [®] para Seringa Oral/Luer	12459535	30 itens

Cuidados com o paciente. Nossa prioridade.

Adaptador Compat® ENFit® para Seringa Oral/Luer

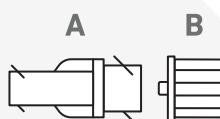

Componentes

- A Adaptador Oral/Luer
- B Tampa removível

Especificações

Esterilização:	Esterilizado com Óxido de Etileno (EO).
Embalagem:	Embalado individualmente em caixas de 30 itens (11,5 x 9,5 x 9 cm).
Armazenamento:	Armazenar em temperatura ambiente. Manter afastado da luz solar e da umidade.
Prazo de validade:	3 anos a partir da data de produção. Data de validade indicada na embalagem.
Duração de utilização:	24 horas. Para uso único.
Norma ISO:	Conector ENFit® fabricado de acordo com a norma ISO 80369-3.
Marca CE:	Em conformidade com a Diretiva Europeia para Dispositivos Médicos 93/42/CEE. Foi emitida uma certificação CE por um Organismo Notificado credenciado: TÜV SÜD (CE0123).
Classificação:	Classe Is.
Fabricante legal:	Cedic Srl, Via Liberazione 63/9, IT-20068 Peschiera Borromeo (MI), Itália.
Sustentabilidade:	Sistema de gestão ambiental em conformidade com a norma ISO 14001:2015.
Materiais:	Todos os materiais são isentos de DEHP, BPA e látex*. Informações adicionais a pedido.
País de origem:	Fabricado na Itália.

*DEHP: não adicionado intencionalmente durante o processo de fabricação. Não formulado com BPA ou látex de borracha natural.

Para obter mais informações, entre em contato com seu representante da Compat® ou acesse www.compat.com

*Salvo indicação em contrário, todas as marcas registradas são utilizadas com permissão.
Esse documento não substitui as Instruções de Uso originais que devem ser lidas antes do uso.

AXIO1535 REV.0 15 DE JANEIRO DE 2026

Compat®